



From Australia

Dr Mark's HyGenie



紹介動画

デンタルクリーナー



持ち運べる
携帯ケース付き

商品名 デンタルクリーナー

標準価格 3,900円 (税別)

本体サイズ：Φ90mm×85mm



商品名 デンタルクリーナー交換用ブラシ (2個セット)

標準価格 1,250円 (税別)

本体サイズ：Φ75mm×40mm




商品名 デンタル携帯用ケース

標準価格 1,350円 (税別)

本体サイズ：83mm×88mm×33mm



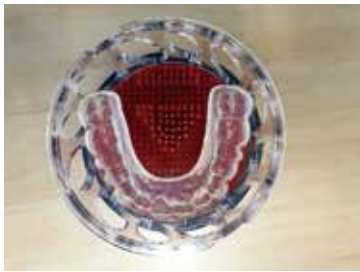

Dr Mark's
HyGenie


ナイトガードやマウスピースなどさまざまな歯科関連のアイテムをクリーニング可能。(対応幅<65mm)
全体を一度に簡単ブラッシングできる形状に加え、細かなところもケアできるテーパー状のブラシは、どなたが使用しても一定のブラッシング効果を発揮。手に馴染みやすいエルゴノミックデザイン。



使用方法

1 開け方

赤と黒カバー部分を両手でしっかり把持してください。
カバー部分を回転させて、ホールケース間にある「↑↓」と矢印が合わさった位置で、「カチッ」とロックが外れる音がしたら、ケースからカバーを取り外してください。

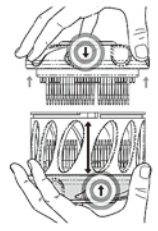


2 装着

図のようにナイトガードやマウスピースなどを1つまたは2つセットします。
(対応幅<65mm)




3 閉め方

ホールケース間にある「↑↓」と、1で取り外した赤または黒カバーにある「↑↓」が図のように重なるように合わせてください。その後、軽く回転するとカバーはロックされます。

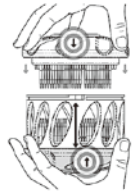

4 洗う

ホールケース内に、ある程度均一に広がるように、ジェルタイプの歯磨き剤を2〜3滴たらし、軽く水を加えます。

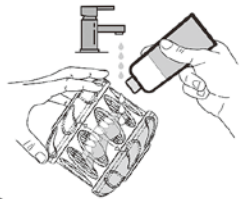


5 磨く

赤と黒カバー部分をしっかり持ち、左右逆回転(45度ぐらいの回転)させてください。30〜45秒を目安に磨きます。




6 すすぐ

ホールケースに水をしっかり入れながら、同様に左右逆回転して、すすいでください。泡がなくなったら、1と同様に開けてください。

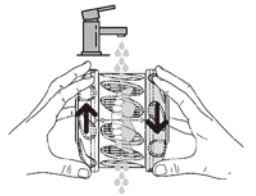

7 装着、保管、携帯

もし、泡が残っていたら、開けた状態で軽くすすいでください。その後、口腔内に装着してご使用ください。使用しない場合は、カバーを閉じて保管してください。デンタルクリーナーのケースは衝撃にも強いので、安全に保管や携帯ができます。

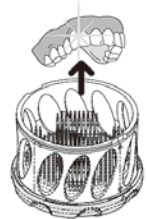

メンテナンスと交換

メンテナンスは、何も設置していない状態で、月に一回ほど洗浄剤や歯磨き剤などを上記同様の手順で流し込み、軽く回転させてすすぎます。ブラシは半年に1回のペースで、デンタルクリーナー交換用ブラシと交換してください。交換方法は、ブラシをしっかり掴み本体から剥がした後、それぞれのカバーにある「↑」と新しいブラシの「▲」の位置が合わさるように、差し込むだけの簡単な作業です。

*仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2024年2月現在の税別価格です。

禁無断転載

●取扱店

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月〜金 9:00〜17:30 ± 9:00〜17:00
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937018712

C02300/2024年2月/PRI/10/@20/改