


クラブロックス ブラック is ホワイトの 音波式電動歯ブラシと粉歯みがき 使用手順書

使用前の確認（音波式電動歯ブラシの状態）

1

電源ボタンを2回押してBlack is Whiteの電動歯ブラシが充電されていることを確認しましょう。

※ 3つのLEDが全て点灯していれば、バッテリーはフル充電されています。下部のLEDがピンクではなく赤の場合、バッテリーの充電残量は20%未満ですので、充電をしましょう。はじめて使用する際には、10時間以上充電してからご使用ください。

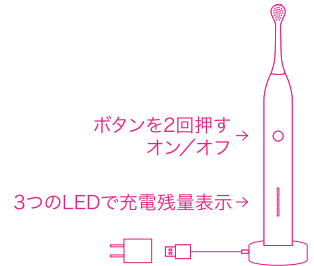

2

歯ブラシが乾いていることを確認しましょう。

※ 歯ブラシが濡れていると「Black is White 粉歯みがき」のつけすぎの原因となります。



3

Black is White 粉歯みがきのふたを開ける前に、平らな場所で軽く左右にゆすり粉面を平らにします。



効果的にご使用いただくために

「Black is White」の効果を最大限に生かすためには、あらかじめ歯科医院における口腔ケアで、口腔内をきれいな状態にしておくことをお勧めします。生涯に渡り健康的な口腔を保つためには、日々のホームケアと歯科医院での定期検診が不可欠です。しっかりと歯磨きが出来ているか確認する為にも、定期的に歯科医院での検診を受診されることをお勧めします。



使用前の確認（歯の状態）

鏡で歯の着色や汚れをチェックしてください。

※後で確認できるように写真を残しておきましょう。




使用方法


1 まず「Black is White 粉歯みがき」を軽く振って、粉を平らな状態にします。ブラシは水につけないで歯磨き粉の容器の中に歯ブラシを押し当て、ブラシに歯磨き粉を付けてください。




2 ブラシをお口の中に入れてから、「Black is White 粉歯みがき」を歯牙全体にいきわたらせてください。自分に合ったパワーモードを設定してください。

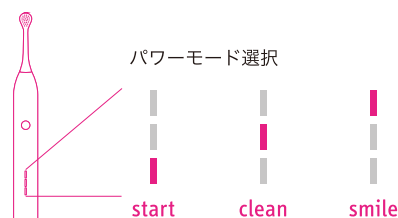

3 スイッチを入れ、ブラシが歯を包み込むように、一歯一歯にブラシをあててください。一歯あたり45°の角度で2-3秒間ほどあててください。※ブラシは強く押しつけないでください。

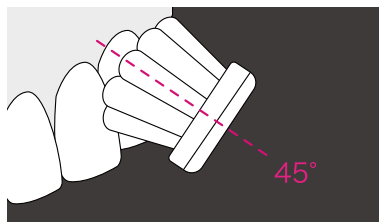


4 磨き初めて30秒たつと0.2秒の短い中断があり、歯磨きの部位を移動する時間になったことをお知らせします。全ての部位で一連の清掃作業を繰り返します。

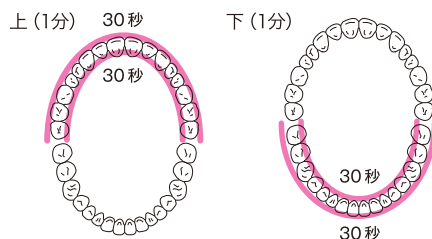

5 磨いていない歯がないように、ブラッシングする部位は必ずいつも同じ順番で行うようにしてください。

歯の裏も忘れずに

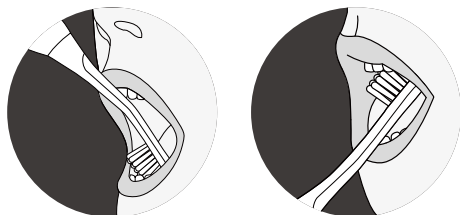

6 歯磨きが終わった後に鏡で着色や汚れが落ちたか確認してください。※確認のため写真を撮っておきましょう。



7 汚れが残っている場合は、強くあてすぎないでその部位を注意して歯磨きしてみてください。

1/d

Once a day

「Black is White 粉歯みがき」は、1日に1回ご使用ください。



Dental clinic

汚れが落ちない場合などは、かかりつけの歯科医院などにて相談してください。



(01)02747937020128

C02443/2022年9月/@20/新