

CURAPROX

SWISS PREMIUM ORAL CARE 

音波式電動歯ブラシ ハイドロソニックシリーズ ラインナップ HYDROSONIC SERIES

YOSHIDA

歯科専用

CURAPROX

HYDROSONIC PRO

クラブロックス ハイドロソニック プロ
音波式電動歯ブラシ

商品コード 427002
患者参考価格 23,800 円 (税別)



HYDROSONIC BLACK IS WHITE

クラブロックス ハイドロソニック ブラックイズホワイト
音波式電動歯ブラシ

商品コード 457796
患者参考価格 21,800 円 (税別)



HYDROSONIC EASY

クラブロックス ハイドロソニック イージー
音波式電動歯ブラシ

商品コード 443580
患者参考価格 19,800 円 (税別)



HYDROSONIC パワーブラシヘッド2本入

商品コード 427034
患者参考価格 3,900 円 (税別)



HYDROSONIC センシティブブラシヘッド2本入

商品コード 427027
患者参考価格 3,900 円 (税別)



HYDROSONIC シングルブラシヘッド2本入

商品コード 427041
患者参考価格 3,900 円 (税別)



BLACK IS WHITE カーボンブラシヘッド

商品コード 457839
患者参考価格 4,000 円 (税別)



CHS200 フレイル替えブラシ

商品コード 443597
患者参考価格 4,200 円 (税別)



※ブラシヘッドの交換目安：約3カ月です。

CURAPROX BLACK IS WHITE クラブロックス ブラックイズホワイト 粉はみがき 3g

商品コード 457846
患者参考価格 1,000 円 (税別)



CURAPROX BLACK IS WHITE クラブロックス ブラックイズホワイト 粉はみがき 20g

商品コード 457853
患者参考価格 2,200 円 (税別)




HYDROSONIC SERIES

HYDROSONIC BRUSHHEAD

WHITENING POWDER

すべてのツールにプロの品質を。CURAPROXはスイスのプロフェッショナルオーラルケアブランドです。

歯科専用

◎販売元:  株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 <http://www.yoshida-dental.co.jp>

◎輸入元: 株式会社クラデンジャパン(スイス クラデン社 日本法人)



(01)02747937021644

C02595/2025年3月/@100/改

HYDROSONIC SERIES

音波式電動歯ブラシ ハイドロソニックシリーズ

SWISS PREMIUM ORAL CARE 

CURAPROX

HYDROSONIC SERIES

音波式電動歯ブラシ ハイドロソニックシリーズ比較表

詳しい使い方動画



YouTube














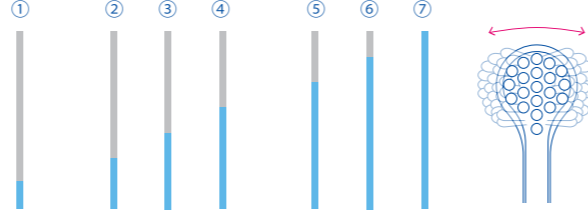



誰でもかんたん、キレイにみがける音波式電動歯ブラシ

様々な口腔環境の患者様に対して、セルフケアの向上に電動歯ブラシをおススメしてみませんか？
歯ブラシのケアは仕上がりに個人差がありますが、電動歯ブラシならブラシを歯に当てるだけなので、誰でもカンタンに安定した歯みがきの効果を得られます。

安定した
清掃効率

一定に保てる
力加減

当てるだけで
疲れない

	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 歯科医院 専売品 </div> クラプロックス ハイドロソニック プロ HYDROSONIC PRO <small>患者参考価格 23,800円 (税別)</small>	クラプロックス ハイドロソニック ブラックイズホワイト HYDROSONIC BLACK IS WHITE <small>患者参考価格 21,800円 (税別)</small>	クラプロックス ハイドロソニック イージー HYDROSONIC EASY <small>患者参考価格 19,800円 (税別)</small>																																																																				
	さまざまな口腔環境への対応が可能な3つのブラシヘッド	「カーボン」ブラシで着色汚れが気になる方へ	はじめて電動歯ブラシを使う方へ																																																																				
標準セット ブラシ 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>パワーブラシヘッド しっかりパワフルな毛質 健康な歯肉の方に</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>センシティブブラシヘッド 非常に柔らかい毛質 歯肉に炎症がある方に</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>シングルブラシヘッド 全てのリスク部位への アプローチに</p>  </div> </div> <p>クレーン® 繊維は 歯みがきに適した やわらかさと弾力性を備え 安定した性能を発揮します。</p> <p>クラカーブ®の 人間工学に基づいた角度は 磨きにくい部位にも 簡単に行き届きます。</p>	<p>カーボンブラシヘッド 「カーボン」ブラシで 着色汚れが気になる方へ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>活性炭粒子を配合した カーボンブラシは、 細かな粒子により エナメル質を傷つけにくく 効果的にブラッシング。</p>	<p>センシティブブラシヘッド 非常に柔らかい毛質 はじめての方に</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>簡単操作で 歯と歯肉を徹底ケア 50歳からの 電動歯ブラシ。</p>																																																																				
特化パートナー 	<p>ガムケアに役立つ (標準セット)</p>  <p>さまざまな口腔環境に使用できるプロフェッショナルブラシ シングルブラシ</p>	<p>ホワイトニングに役立つ (オプション別売)</p>  <p>粉はみがきとのセット使用で美しい歯へ仕上げます 粉はみがき</p>	<p>フレイル対策に役立つ (オプション別売)</p>  <p>歯に当てやすい大きなブラシヘッド フレイルブラシ</p>																																																																				
モード 	<p>7段階の音波振動モード</p> <p>スタート: 22,000回/分 ① クリーン: 32,000回/分 ②③④ スマイル: 42,000回/分 ⑤⑥⑦</p> 	<p>3段階の音波振動モード</p> <p>スタート: 22,000回/分 ① クリーン: 32,000回/分 ② スマイル: 42,000回/分 ③</p> 	<p>3段階の音波振動モード</p> <p>スタート: 22,000回/分 ① クリーン: 32,000回/分 ② スマイル: 42,000回/分 ③</p> 																																																																				
付属品 	<table border="0"> <tr><td>ハンドル本体</td><td>x1</td><td>USB ケーブル付き充電器</td><td>x1</td></tr> <tr><td>センシティブブラシヘッド</td><td>x1</td><td>USB プラグ</td><td>x1</td></tr> <tr><td>パワーブラシヘッド</td><td>x1</td><td>トラベルケース</td><td>x1</td></tr> <tr><td>シングルブラシヘッド</td><td>x1</td><td>取扱説明書</td><td>x1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>クイックスタート小冊子</td><td>x1</td></tr> </table>	ハンドル本体	x1	USB ケーブル付き充電器	x1	センシティブブラシヘッド	x1	USB プラグ	x1	パワーブラシヘッド	x1	トラベルケース	x1	シングルブラシヘッド	x1	取扱説明書	x1			クイックスタート小冊子	x1	<table border="0"> <tr><td>ハンドル本体</td><td>x1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>カーボンブラシヘッド</td><td>x2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>USB ケーブル付充電器</td><td>x1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>USB プラグ</td><td>x1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>トラベルケース</td><td>x1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>取扱説明書</td><td>x1</td><td></td><td></td></tr> </table>	ハンドル本体	x1			カーボンブラシヘッド	x2			USB ケーブル付充電器	x1			USB プラグ	x1			トラベルケース	x1			取扱説明書	x1			<table border="0"> <tr><td>ハンドル本体</td><td>x1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>センシティブブラシヘッド</td><td>x1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>USB ケーブル付き充電器</td><td>x1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>USB プラグ</td><td>x1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>トラベルケース</td><td>x1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>取扱説明書</td><td>x1</td><td></td><td></td></tr> </table>	ハンドル本体	x1			センシティブブラシヘッド	x1			USB ケーブル付き充電器	x1			USB プラグ	x1			トラベルケース	x1			取扱説明書	x1		
ハンドル本体	x1	USB ケーブル付き充電器	x1																																																																				
センシティブブラシヘッド	x1	USB プラグ	x1																																																																				
パワーブラシヘッド	x1	トラベルケース	x1																																																																				
シングルブラシヘッド	x1	取扱説明書	x1																																																																				
		クイックスタート小冊子	x1																																																																				
ハンドル本体	x1																																																																						
カーボンブラシヘッド	x2																																																																						
USB ケーブル付充電器	x1																																																																						
USB プラグ	x1																																																																						
トラベルケース	x1																																																																						
取扱説明書	x1																																																																						
ハンドル本体	x1																																																																						
センシティブブラシヘッド	x1																																																																						
USB ケーブル付き充電器	x1																																																																						
USB プラグ	x1																																																																						
トラベルケース	x1																																																																						
取扱説明書	x1																																																																						

歯ブラシの理想を追求した革新的なブラシヘッド

歯や歯肉を傷つけにくく、正しくブラッシングができ口腔内を隅々までしっかり磨ける。
 ハイドロソニックシリーズはそんな歯ブラシの理想を追求したブラシ毛を独自開発し、音波式電動歯ブラシに採用しました。



クーレン®繊維は
 歯みがきに適した
 やわらかさと弾力性を備え
 安定した性能を発揮します。



人間工学に基づき
 磨きにくい部位にも
 簡単に毛先が行き届く
 クラカーブ®















活性炭粒子を配合した
 カーボンブラシは、
 細かな粒子により
 エナメル質を傷つけにくく
 効果的にブラッシング。



HYDROSONIC SERIES

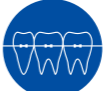音波式電動歯ブラシ ハイドロソニックシリーズ ブラシ比較表

商品名	HYDROSONIC パワーブラシヘッド	HYDROSONIC センシティブブラシヘッド	HYDROSONIC シングルブラシヘッド	BLACK IS WHITE カーボンブラシヘッド	CHS200 フレイルブラシヘッド
商品コード	427034	427027	427041	457839	443597
患者参考価格	3,900円(税別)	3,900円(税別)	3,900円(税別)	4,000円(税別)	4,200円(税別)
ブラシ	しっかりパワフルな毛質 健康な歯肉の方に 	非常に柔らかい毛質 歯肉に炎症がある方に 	全てのリスク部位への アプローチに 	「カーボン」ブラシで 着色汚れが気になる方へ 	歯に当てやすい 大きなブラシヘッド 
ガムケア	●	●	●		
フレイル予防					●
より優しいケア		●			●
矯正ブラケット	●	●	●		
矯正マウスピース				●	
ホワイトニング				● ※粉歯みがきと併用	
その他 特徴	さまざまな口腔環境において、安定した性能を発揮します。  炎症時  叢生部位  インプラント治療時  矯正治療中  修復補綴領域			粉はみがきと併用が効果的 	フレイル対策に最適 50歳 過ぎたら 電動歯ブラシ 

BLACK IS WHITE WHITENING POWDER

クラブロックス ブラックイズホワイト 粉はみがき

汚れ、黄ばみ、歯石、歯垢の沈着を防ぐ「カーボン」入り
 ホワイトニングパウダー。
 清涼感が口腔内を疾走するストロングミントフレーバーで
 口臭もケア。ブラックイズホワイトの音波式電動歯ブラシ
 と併用使用するとより効果的です。※効果には個人差があります。

- 2種類の
ヒドロキシアパタイト(清掃剤)
- 炭(清掃剤)
- サンゴ末(清掃剤) 配合

クラブロックス ブラックイズホワイト
 粉はみがき 20g
 商品コード 457853
 患者参考価格 2,200円(税別)

クラブロックス ブラックイズホワイト
 粉はみがき 3g
 商品コード 457846
 患者参考価格 1,000円(税別)



HYDROSONIC PRO

クラプロックス ハイドロソニック プロ

目指したのは
誰でも歯ブラシの効果を最大限に発揮できること

歯科医院専売品


ハイドロソニック プロは歯科医院でのみ購入が可能です。詳しくは、かかりつけの歯科医院にお問い合わせください。

RUBBER GRIP ラバーグリップ

人間工学に基づき設計された把持しやすいラバーグリップ。自然な持ち方で、歯磨きに理想的な角度を保ちます。

ベングリップ


バームグリップ

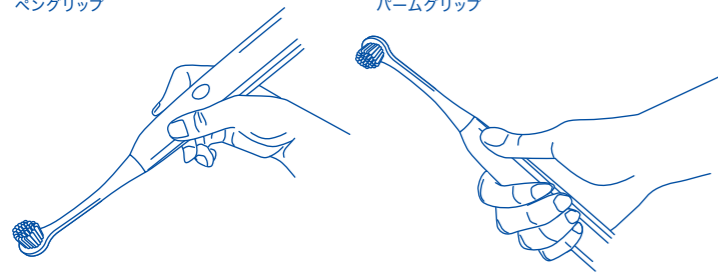

CHARGING 充電

フル充電 10 時間

1日4分2週間使用可*

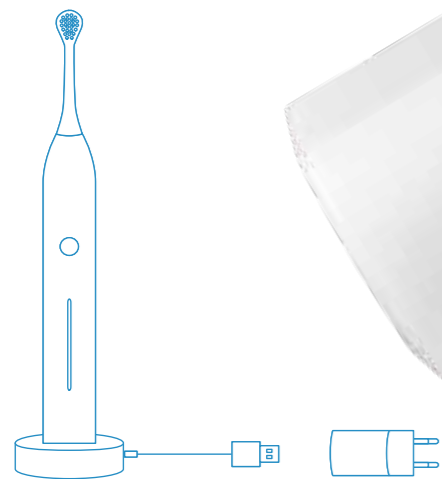


*使用環境によって時間は前後します。
・本体LEDが青ではなく赤の場合、バッテリーの充電残量は20%未満です。
・充電状況の確認は、充電器からハイドロソニック プロを取り外した時や、スイッチを切った時に充電状況を確認することができます。

スイス生まれの
イノベーションが
日本に上陸

ON/OFF・MODE 1つのボタンで簡単操作

電源のON/OFF。電源が入っている状態の長押しで、7段階の音波振動モード変更ができます。

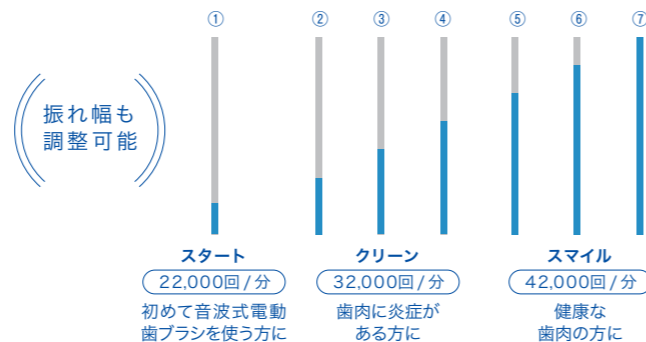


*次回使用する際は、最後に選択されたモードで起動します。

MECHANICS 力学

音波振動

音波振動による振幅運動が、歯や歯肉を傷つけにくくしっかりと汚れを落とすことができます。

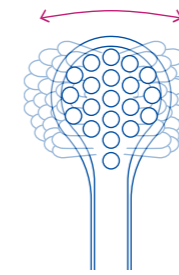


流体力学

毛先の高速振動によって、口腔内で唾液と歯磨き粉が混ざりあったところに乱流が生じます。この乱流により、毛先が届かなかった場所のデンタルバイオフィルムを取り除くことができます。

使用方法や個人差で変わります。

BRUSH SHAPE ブラシの形状

歯の幅径に合わせて包み込んで磨けるしずく形。

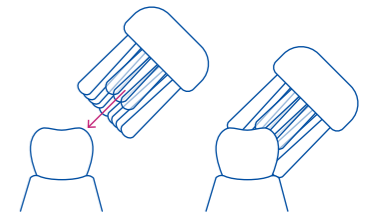

SILICON COATING シリコンコーティング

ブラシの背面にはシリコンコーティングを施しており、不快な振動の伝達を防ぎ、安全にやさしく磨けるように配慮しています。

SMART HEAD 3つのブラシヘッド


さまざまな口腔環境への対応が可能な、クーレン®繊維・クラカーブ®搭載の3つのブラシヘッド。

クーレン®繊維は歯磨きに適したやわらかさと弾力を備え安定した性能を発揮します。*	パワーブラシヘッド しっかりパワフルな毛質 健康な歯肉の方に	センシティブブラシヘッド 非常に柔らかい毛質 歯肉に炎症がある方に	シングルブラシヘッド 全てのリスク部位へのアプローチに

クラカーブ®の人間工学に基づいた角度は磨きにくい部位にも簡単に行き届きます。	10°	10°	15°

*歯ブラシの交換目安：約3カ月です。毛先が広がった場合はかかりつけの歯科医師・歯科衛生士にご相談下さい。


詳しい使い方動画

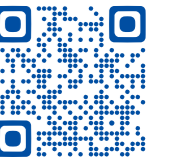

YouTube

SET セット内容

- ・ハンドル本体 1本
- ・センシティブブラシヘッド 1個
- ・パワーブラシヘッド 1個
- ・シングルブラシヘッド 1個
- ・USB ケーブル付き充電器 1個
- ・USB プラグ 1個
- ・トラベルケース 1個
- ・取扱説明書 1冊
- ・クイックスタート小冊子 1冊

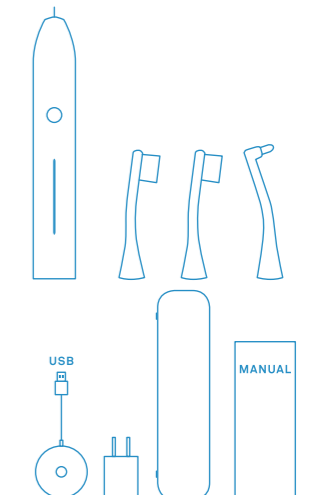


HYDROSONIC BLACK IS WHITE

クラプロックス ハイドロソニック ブラックイズホワイト

「カーボン」ブラシで輝く笑顔に
着色汚れが気になる方へ

RUBBER GRIP ラバーグリップ

人間工学に基づき設計された把持しやすいラバーグリップ。
自然な持ち方で、歯磨きに理想的な角度を保ちます。

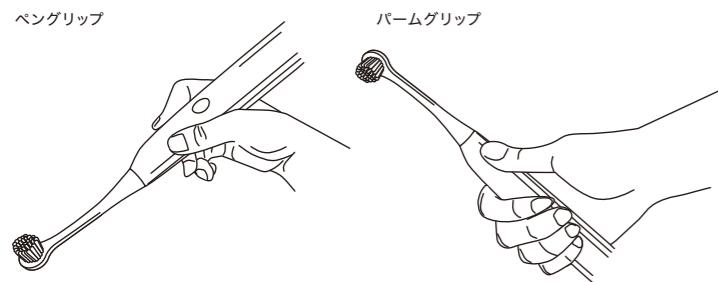


自宅でもできる
セルフ
ホワイトニング

CHARGING 充電

フル充電 10 時間

1日4分2週間使用可*

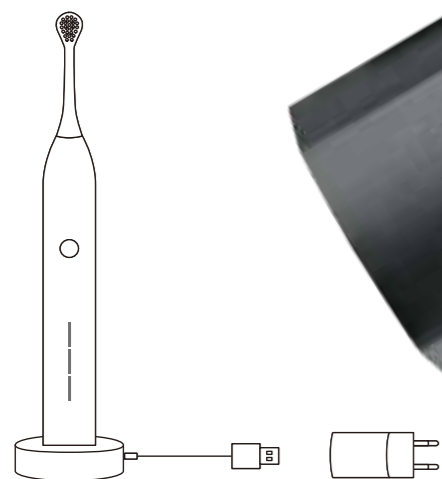

*使用環境によって時間は前後します。
・本体LEDが青ではなく赤の場合、バッテリーの充電残量は20%未満です。
・充電状況の確認は、充電器からハイドロソニック プロを取り外した時や、スイッチを切った時に充電状況を確認することができます。



ON/OFF・MODE 1つのボタンで簡単操作

電源のON/OFF。電源が入っている状態の長押しで、3段階の音波振動モード変更ができます。

振動レベルの調整※

- ① 22,000 回 / 分
- ② 32,000 回 / 分
- ③ 42,000 回 / 分



※振れ幅は調整できません。*次回使用する際は、最後に選択されたモードで起動します。

MECHANICS 力学

音波振動

音波振動による振幅運動が、歯や歯肉を傷つけにくく
しっかりと汚れを落とすことができます。




流体力学

毛先の高速振動によって、口腔内で唾液と歯磨き粉が混ざり
あったところに乱流が生じます。この乱流により、毛先が届か
なかった場所のデンタルバイオフィルムを取り除くことが
できます。

使用方法や個人差で変わります。

BRUSH SHAPE ブラシの形状

歯の幅に合わせて包み込んで磨けるしずく形。

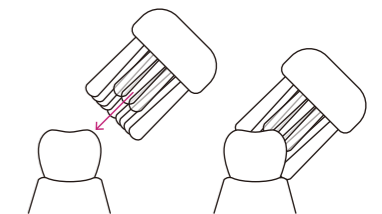


SILICON COATING シリコンコーティング

ブラシの背面にはシリコンコーティングを
施しており、不快な振動の伝達を 방지、安全
にやさしく磨けるように配慮しています。


SMART HEAD ブラシヘッド

独自開発した活性炭粒子を配合のカーボンブラシ

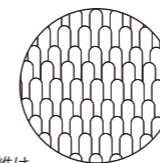


パワーブラシヘッド
しっかりパワフルな毛質
健康な歯肉の方に

クーレン® 繊維は
歯磨きに適した
やわらかさと弾力を備え
安定した性能を発揮します。*

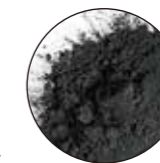

クーレン® 繊維に
活性炭粒子を配合したカーボンブラシは、
細かな粒子によりエナメル質を傷つけにくく
美しい歯へ仕上げます。

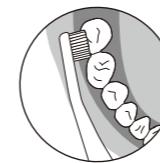

クラカーブ® の
人間工学に基づいた角度は
磨きにくい部位にも
簡単に行き届きます。




※歯ブラシの交換目安：約3カ月です。毛先が広がった場合はかかりつけの歯科医師・歯科衛生士にご相談下さい。



詳しい使い方の動画
YouTube

SET セット内容

- ・ハンドル本体 1本
- ・カーボンブラシヘッド 2個
- ・USB ケーブル付き充電器 1個
- ・USB プラグ 1個
- ・トラベルケース 1個
- ・取扱説明書 1冊

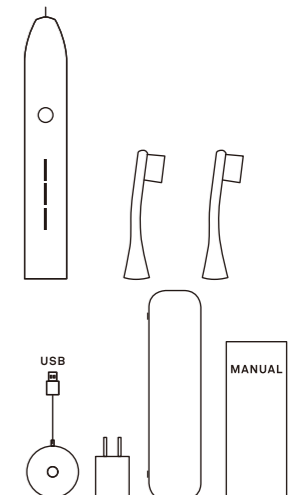


HYDROSONIC EASY

クラプロックス ハイドロソニック イージー

はじめて電動歯ブラシを使う方や
加齢による口腔環境の変化を感じる方へ

RUBBER GRIP ラバーグリップ


人間工学に基づき設計された把持しやすいラバーグリップ。
自然な持ち方で、歯磨きに理想的な角度を保ちます。

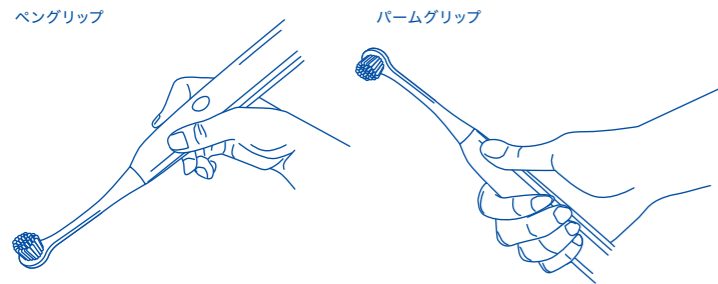

CHARGING 充電

フル充電 10 時間

1日4分2週間使用可*

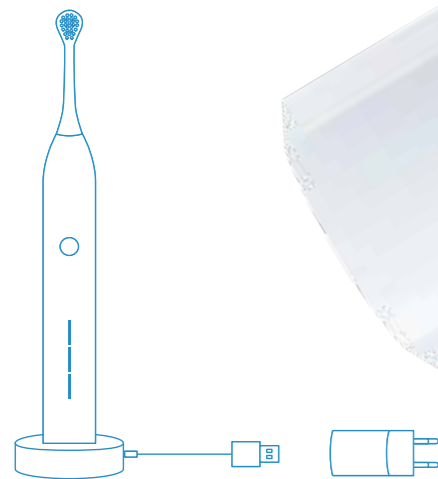

*使用環境によって時間は前後します。
・本体LEDが青ではなく赤の場合、バッテリーの充電残量は20%未満です。
・充電状況の確認は、充電器からハイドロソニック プロを取り外した時や、スイッチを切った時に充電状況を確認することができます。

50歳
過ぎたら
電動歯ブラシ

ON/OFF・MODE 1つのボタンで簡単操作

電源のON/OFF。電源が入っている状態の長押しで、
3段階の音波振動モード変更ができます。

振動レベルの調整※

- ① 22,000 回 / 分
- ② 32,000 回 / 分
- ③ 42,000 回 / 分




※振れ幅は調整できません ※次回使用する際は、最後に選択されたモードで起動します。

MECHANICS 力学

音波振動

音波振動による振幅運動が、歯や歯肉を傷つけにくく
しっかりと汚れを落とすことができます。

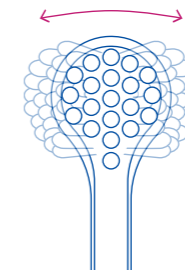


流体力学

毛先の高速振動によって、口腔内で唾液と歯磨き粉が混ざり
あったところに乱流が生じます。この乱流により、毛先が届か
なかった場所のデンタルバイオフィルムを取り除くことが
できます。

使用方法や個人差で変わります。

BRUSH SHAPE ブラシの形状

歯の幅に合わせて包み込んで磨けるしずく形。

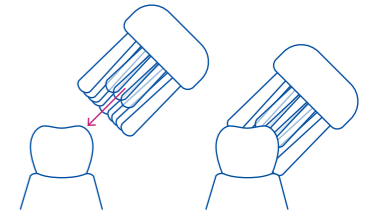


SILICON COATING シリコンコーティング

ブラシの背面にはシリコンコーティングを
施しており、不快な振動の伝達を防ぎ、安全
にやさしく磨けるように配慮しています。


SMART HEAD ブラシヘッド

加齢による変化した口腔環境に最適なセンシティブブラシヘッド

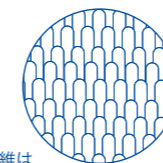

センシティブブラシヘッド
非常に柔らかい毛質
歯肉に炎症がある方に

クーレン® 繊維は
歯磨きに適した
やわらかさと弾力を備え
安定した性能を発揮します。*

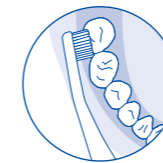


クラカーブ® の
人間工学に基づいた角度は
磨きにくい部位にも
簡単に行き届きます。



※歯ブラシの交換目安：約3カ月です。毛先が広がった場合はかかりつけの歯科医師・歯科衛生士にご相談下さい。


詳しい使い動画

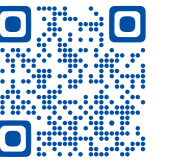

YouTube

SET セット内容

- ・ハンドル本体 1本
- ・センシティブブラシヘッド 1個
- ・USB ケーブル付き充電器 1個
- ・USB プラグ 1個
- ・トラベルケース 1個
- ・取扱説明書 1冊

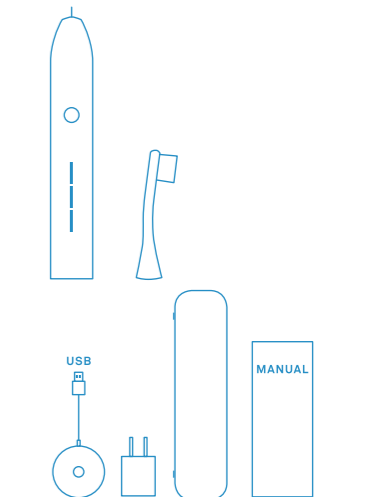

ハイドロソニックシリーズ Q&A

ハイドロソニックシリーズよくあるご質問


Q: 音波式電動歯ブラシのメリットは？

A: 音波式電動歯ブラシは清掃性が高く、歯と歯肉を傷つけにくいことです。

補足：一般的な回転運動の振動による電動歯ブラシは、歯間空隙は清掃できず健康な歯肉を確保するには音波を使用した電動歯ブラシほど有効ではありません。回転運動による電動歯ブラシの場合、特に歯肉から歯への移行部では、繰り返されるブラシの動きによって荒い傷が付きやすくなります。Dr.Ulrich P.Saxer 教授らが行った研究でこの傷が明確に証明されました。一方、音波式電動歯ブラシの運動は振幅運動で、この技術は歯間空隙の清掃性と歯にほとんど傷をつけないことからハイドロソニック シリーズはこの振幅運動を採用しています。


Q: シングルブラシヘッドのお勧めの使い方を教えてください。

A: ささまざまな口腔内で使用できますが、ここでは矯正治療中とインプラント周囲の磨き方についてご紹介させていただきます。

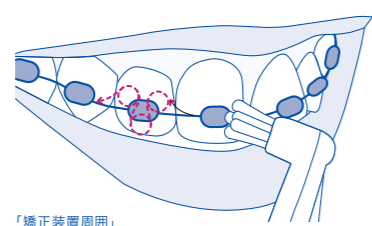

「矯正装置周囲」

シングルブラシヘッドを使い、「スタート」モードでほとんど圧をかけずにスムーズにブラケットの周りを少しずつ移動させます。

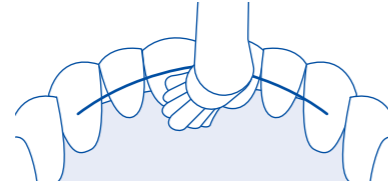

「リンガルブラケットとリテーナー周囲」

歯の裏側に固定されたブラケットやリテーナーの場合でも同様にシングルブラシヘッドを使い、「スタート」モードでほとんど圧をかけずにリンガルブラケットやリテーナーに沿ってスムーズに動かします。ブラシヘッドには CURACURVE® (クラカーブ) が施されているので、歯の裏側の部位にも簡単に使えます。

Q: パワーブラシヘッドとセンシティブブラシヘッドがしずく形の理由は？

A: しずく形の歯ブラシヘッドは、個々の歯の清掃性を高めます。


補足：歯磨きの振幅運動で清掃できるのは歯の表面です。Curaden (クラデン) 社ではそれぞれの歯の外側、内側、そして咬合面の清掃を個々に最適に行えるように、歯ブラシを数種類の形に絞り、それらがどんな部位に適しているか数多くの実験で調査しました。その結果、しずく形が最適であると考えました。

Q: シングルブラシヘッドのメリットは？

A: シングルブラシヘッドの小さな毛先が、口腔内の磨き残しが多いリスク部位に届きます。

補足：シングルブラシは細菌性プラークが主に付着する歯肉辺縁、歯列矯正装置や狭い歯並びの部位など口腔内の磨き残しが多いリスク部位へのアプローチには CURACURVE® (クラカーブ) と柔らい小さなブラシヘッドのシングルブラシが最適で有効です。

海外の多くの歯科医療従事者は、このブラシを歯肉に沿って歯列全体に移動させる方法だけで、歯磨きを行う方もいます。

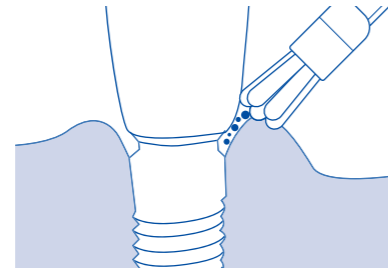

「インプラント周囲」

インプラントを確実に長持ちさせるためには、十分なケアが必要です。インプラント周囲の辺縁歯肉は「スタート」モードでほとんど圧をかけずに清掃してください。シングルブラシヘッドを使うと、歯肉辺縁を集中的に、かつ、優しく清掃できます。

Q: 毛の繊維はナイロン製でないのはどうしてですか？

A: Curaden (クラデン) 社が独自開発した CUREN® (クーレン) 繊維はナイロン毛より撥水性があり、磨く時に柔らかく感じます。口の中でも毛の感触が変わらずコシの強さがあり、歯と歯肉を傷つける事なく効率的にプラークが除去できます。

Q: 何のために CURACURVE® (クラカーブ) という角度があるのですか？

A: CURACURVE® (クラカーブ) は、従来の磨きにくかった部位へアプローチすることができます。歯列の臼歯部や前歯の口蓋側や舌側におけるブラシヘッドの到達性を高めるためにこの傾斜角が最適でした。

Q: どのモードで使うのがお勧めですか？

A: それぞれのブラシを使う時に、患者さんが心地良く感じれる、その人に一番適したモードを選択します。重要なのは、患者さんが心地良く感じることです。

Q: ハイドロソニックシリーズの正しい使い方についてアドバイスはありますか？

A: 歯磨き時に口を閉じ、すべての歯の表面上でブラシヘッドをブラッシング圧をかけずに移動させます。ブラシを1歯ごとに数秒間留めて、辺縁歯肉を良く捉えられるようにブラシヘッドを歯の周りで動かすのが最適です。前歯から臼歯への歯間空隙内へはさらにブラシの向きを変更します。

Q: 歯科医院を通してハイドロソニックシリーズを販売している理由は何ですか？

A: ハイドロソニック シリーズを使うことは簡単ですが、患者さん個々にあった効率的な歯磨きの詳細を知るには歯科医院で検査を受け、歯科医師、歯科衛生士からブラッシング指導を受ける事が重要だと考えていますので、患者さんがハイドロソニック シリーズについて最適な指導を受けることができる歯科医院で販売したいと考えています。

お問い合わせ

ハイドロソニックシリーズ コンタクトセンター & 公式SNS

CURAPROX

SWISS PREMIUM ORAL CARE

CONTACT CENTER

コンタクトセンター



毎日使うものだから 充実・安心のサポートをご用意

歯科医院さんからのお問い合わせ

▷ (株)ヨシダ コンタクトセンター

0800-170-5541 平日 9:00 ~ 17:30 土曜 9:00 ~ 17:00
(日曜・祝日・夏季休暇・冬季休暇は除く)

※携帯電話からは 03-6880-2155 におかけください。

HYDROSONIC シリーズに関する患者さん(一般の方)からのお問い合わせや修理のご依頼

▷ (株)クラデンジャパン コンタクトセンター

0120-985-572 平日 9:00 ~ 17:00
(土曜・日曜・祝日・夏季休暇・冬季休暇は除く)

初期不良の場合は、ご購入歯科医院様へお問い合わせください。

CURAPROX LINE

クラブロックス 公式ライン

クラブロックスの情報を
どこよりも早くGET!!

友だち追加 ▶ QRコード
友だち追加 ▶ ID検索

@183jcstm

公式ライン



LINE

CURAPROX instagram

クラブロックス 公式インスタグラム

クラブロックスの公式インスタグラムでは
商品情報や、日々のオーラルケアに役立つ
知識が満載!ぜひフォローください!

@curaproxjapan

公式インスタグラム



Instagram

私たちは歯科医院を通して、ハイドロソニック シリーズで一人でも多くの人々に健康と笑顔をお届けします。

販売元: 株式会社ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 輸入元: 株式会社クラデンジャパン(スイス クラデン社 日本法人)

ハイドロソニックシリーズをご購入いただいた患者さまへ

マイ クラブボックス
MY CURAPROX
ハイドロソニックシリーズ
ご購入後の患者様の情報を登録ください。




マイクラブボックス 検索



ハイドロソニックシリーズをご購入いただいた患者さまの情報ならびに製品情報を、患者さま自身もしくは医院様にて代理登録するだけで、安心のサポートサービス「マイクラブボックス」をご提供いただけます。

保証期間を2年間から3年間に延長

通常保証は2年間ですが、「マイクラブボックス」に登録するだけで、さらに1年間の保証を無料で追加できます。
※購入時の領収書が保証書になります。お手元に大切に保管してください。保証延長はご購入から1か月以内に製品登録を行った製造番号が対象です。

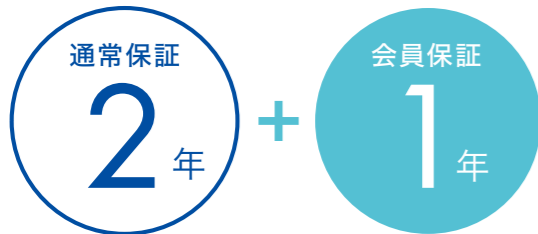

スピーディーな修理対応

保証期間内の故障時の際は、患者さんからコンタクトセンターにお電話いただくことで、非会員に比べて優先的に修理対応を行います。



※ 購入時の領収書が保証書になります。大切に保管いただくようお願いください。

医院様のメリット 1

ハイドロソニック プロ替えブラシを1本プレゼント!

替えブラシが歯科医院様に届くので、お渡しのために患者様の再来を促すことができます。



お好きな
ブラシヘッド
1本
プレゼント!

パワーブラシヘッド センシティブブラシヘッド シングルブラシヘッド



医院様のメリット 2

ハイドロソニックシリーズをご購入いただいた患者様の管理ができます。

ハイドロソニックシリーズをお取扱いの歯科医院さまへ

クラブボックス プロサイト
CURAPROX PRO SITE

歯科医院・歯科医療従事者用サイトが
リニューアル。ぜひご活用ください。

※「旧プロフェッショナルサイト」と「アンバサダーサイト」が統合されました。



クラブボックスプロサイト 検索



「クラブボックス プロサイト」とは、クラブボックスシリーズ / ハイドロソニックシリーズをお取り扱いの歯科医院様をサポートする会員サービスです。ご登録いただくことで様々な特典が受けられます。

法人・個人どちらでも登録可能! 歯科医院さまは法人からご登録ください

法人登録特典

ご登録セットプレゼント

セット内容

- プロサイト使い方ガイド
- クラブロちゃん DVD #01-77 収録
- 船越歯科医院監修パウチ



クラブロちゃん DVD

+ 受付や待合室で使用できる動画などを
無料ダウンロード可能



クラブボックス歯ブラシの
+ プラスチック リサイクルの取り組み
「クラサイクルキット」申込み可能



その他、お役立ちコンテンツが盛りだくさん! *

- 製品情報 使い方 選び方
- 歯科医師 歯科衛生士の 実践動画
- プロのロコミ 1,400件以上
- 患者様説明 下敷き

※個人登録の場合は一部法人向けのコンテンツのご利用ができません

