

使い勝手により選べる2タイプのシッケルスケーラーもご用意しています。


オフセットシッケル

エクスデュラCRHスケーラー

XDURA

シャンクの角度を変えることにより、術視野を確保しました

ブレード厚を薄く小さくすることで歯肉を傷つけにくく、狭い歯間部にもより正確にアクセスできるため精度の高いメンテナンスが行えます。

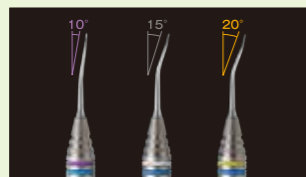

●ブレード厚の比較(当社比)
従来品 オフセットシッケル



N67J-10 シャンク角 10度

前歯部～
小臼歯部の
メンテナンスに



N67J-15 シャンク角 15度

隣接面、捻転の
メンテナンスに



N67J-20 シャンク角 20度

最後臼歯部の
メンテナンスに



同じ前歯部でも
シャンク角を使い分けることで
より精度の高い
メンテナンスが行えます。

N67J-10



N67J-15



N67J-20



●一般的名称: 歯科用スケーラー ●販売名: エクスデュラCRHスケーラー ●標準価格: 各5,800円 ●届出番号: 13B1X00005000216(一般)


シッケル

エクスデュラCRHスケーラー

XDURA

縁上歯石や着色の除去に

両刃なので頬側・舌側や遠心・近心によってスケーラー番手を変更することなく効率的に歯石除去が行えます。

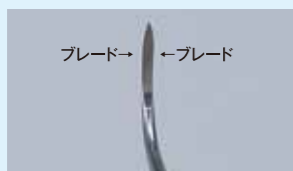

204SD ●使用部位: 臼歯部



N67 ●使用部位: 前歯部・臼歯部



J1S-N5 ●使用部位: 前歯部

●一般的名称: 歯科用スケーラー ●販売名: エクスデュラCRHスケーラー ●標準価格: 各5,800円 ●届出番号: 13B1X00005000216(一般)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

表示価格は2019年4月現在

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0120-178-148

※対応時間 / 月～金 9:00～19:00 ± 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937014295
C01869/2019年4月/明/20/@40/改

●製造販売元: 株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
http://www.yoshida-dental.co.jp

YOSHIDA

Nordent
Instruments of excellence for the dental industry

軽くて握りやすい
ハンドル。
しかも切れ味が
なが～く続きます。

ノーデント新鋼材スケーラー | エクスデュラ

XDURA™

Nordent

XDURA™

疲労感が少なく、しかも的確なスクレーリングができること。

中空構造を採用し、従来のスクレーラーと比較して軽さを実現。

その基本性能は変えることなく新たに新鋼材と技術により、さらに使いやすくなった「エクステデュラ」が誕生しました。



粒子の細かい新鋼材を採用したことにより、軸が安定、さらに刃こぼれが少なく切れ味が長持ちするブレードを実現。

これまで以上にストレスなくスクレーリングが行えます。

デュラライトCRHグレーシーはなぜ疲労感が少ないのでしょうか？

より軽い中空のハンドル

グリップが軽く中空なので歯肉線下のわずかな歯石も手指に敏感に感じ取ることができます。

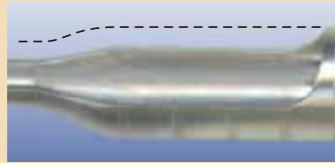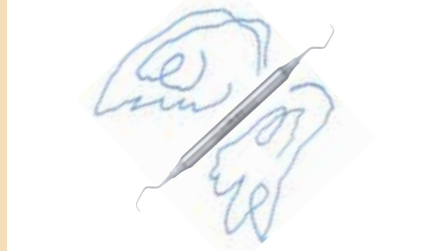


握りやすい太めのハンドル

太めのハンドルは握りやすく、長時間の施術による手指の疲労を軽減。腱鞘炎を予防します。また、工夫されたグリップのスリット形状により、グローブが絡みません。



切れ味が長持ちするので刃部の形態が変わりにくい

新鋼材の採用と技術の革新により、軸の安定したハンドリングを実現。粒子が細かいため、硬く刃こぼれのしにくいブレードで切れ味が長持ちします。

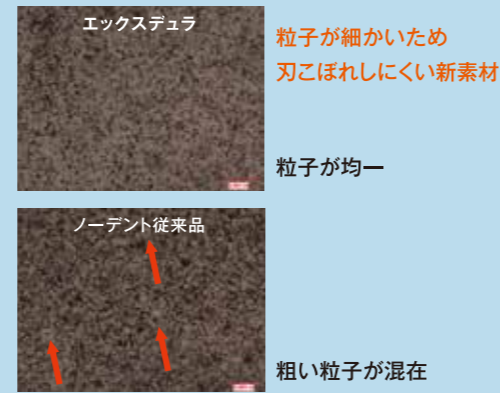

TRUGracey™

TRUGracey™のブレードデザインは、Dr.Graceyがデザインした本来のブレード形態です。ハンドルの中心線にブレードの中心があり、ブレード自体は弯曲しています。そのため、ストローク中に歯根面に広く接触し、スクレーリングをより効果的に行えます。



スタンダード TRUGracey™


軽い・握りやすい・力が出る



従来のインストルメントに比べ、半分以下の重さです。一般的な歯肉線下スクレーリング、ルートプレーニングにご使用ください。

ミニロング


深いポケットや根分岐部に

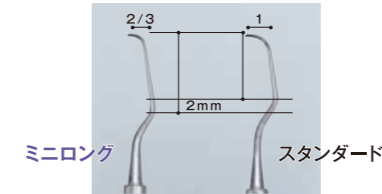

スタンダードに比べ第一シャックが2mm長く、ブレードも2/3の大きさなので、深いポケットや根分岐部のSRP(スクレーリング・ルートプレーニング)がスムーズに行えます。

Jブレード TRUGracey™

日本人の口腔に合わせたブレード

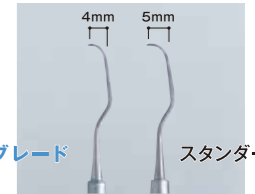

従来のスタンダードに比べブレードをコンパクトにすることで、歯肉線上・線下にスムーズにアクセスでき、しかも硬い歯石のスクレーリングに効果を発揮します。

1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14
使用部位:前歯部	使用部位:前歯部	使用部位:前歯部および小白歯部	使用部位:白歯部および頬舌面	使用部位:頬舌面、根分岐部	使用部位:白歯部の近心面	使用部位:白歯部の遠心面
スタンダード ミニロング J-ブレード	スタンダード ミニロング J-ブレード	スタンダード ミニロング J-ブレード	スタンダード ミニロング J-ブレード	スタンダード ミニロング J-ブレード	スタンダード ミニロング ロング J-ブレード	スタンダード ミニロング ロング J-ブレード

◎ロングはスタンダードに比べ3mm長い第一シャックにスタンダードのブレード(刃部)を組み合わせたスクレーラーです。

ノーデント新鋼材スクレーラー エクステデュラCRHグレーシー



この切れ味、その持続力。

◎エクステデュラCRHグレーシー スタンダード ●種類1-2、3-4、5-6、7-8、9-10、11-12、13-14 ◎エクステデュラCRHグレーシー ミニロング ●種類1-2ML、3-4ML、5-6ML、7-8ML、9-10ML、11-12ML、13-14ML ◎エクステデュラCRHグレーシー ロング ●種類11-12L、13-14L ◎エクステデュラCRHグレーシー Jブレード ●種類1-2J、3-4J、5-6J、7-8J、9-10J、11-12J、13-14J ●標準価格:各5,800円 ●一般的名称:歯科用キュレット ●販売名:エクステデュラCRHグレーシー ●届出番号:13B1X00005000215(一般)