


縁上歯石や着色の除去に。

両刃なので頬側・舌側や遠心・近心によってスケーラー番手を変更することなく、効率的に歯石除去が行えます。



- デュラライトCRHスケーラー
- 種類：204SD、JIS-N5、N67
- 標準価格：1本7,990円
- 一般的名称：歯科用スケーラ
- 届出番号：13B1X00005000028

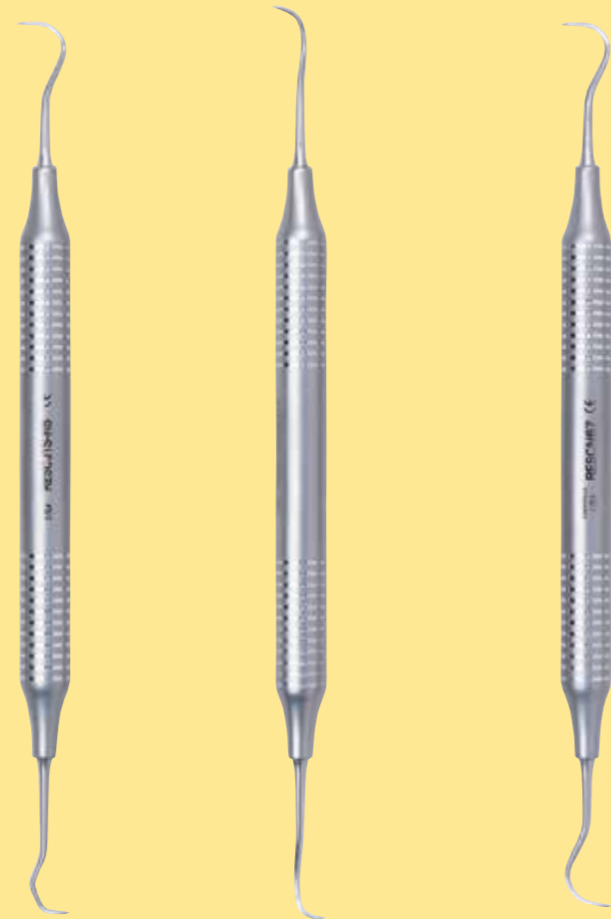

JIS-N5 ●使用部位：前歯部
 204SD ●使用部位：臼歯部
 N67 ●使用部位：前歯部、臼歯部

1本
約12.4g

※共通ハンドル部分

握りやすいグリップ
しかも軽量

ノーデント社は、使う方の手指の健康を守る製品開発をしています。



ノーデント
NORDENT

エルゴノミックデザインインスツルメント

デュラライト
CRHグレーシー

製造元：ノーデント社
Nordent Manufacturing, Inc. (アメリカ合衆国)

製造販売元 株式会社 **ヨシダ**

●仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2023年3月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)




C01603/2023年3月/PRI/3/@40/改

(01)02747937011508




NORDENT

疲労感が少なく、しかも的確なスクレーリングができること。中空構造を採用し、従来のスクレーラーと比較してわずか約1/2※（12.4g）の軽さを実現したデュラライトCRHグレーシー。※当社比
新たに日本人の口腔に合った「J-ブレード」シリーズを加え4シリーズをラインナップ。それぞれの特長を生かして、さまざまな症例に対応できます。
シカゴ生まれの新世代インスツルメント「デュラライトCRHグレーシー」をぜひお試しください。

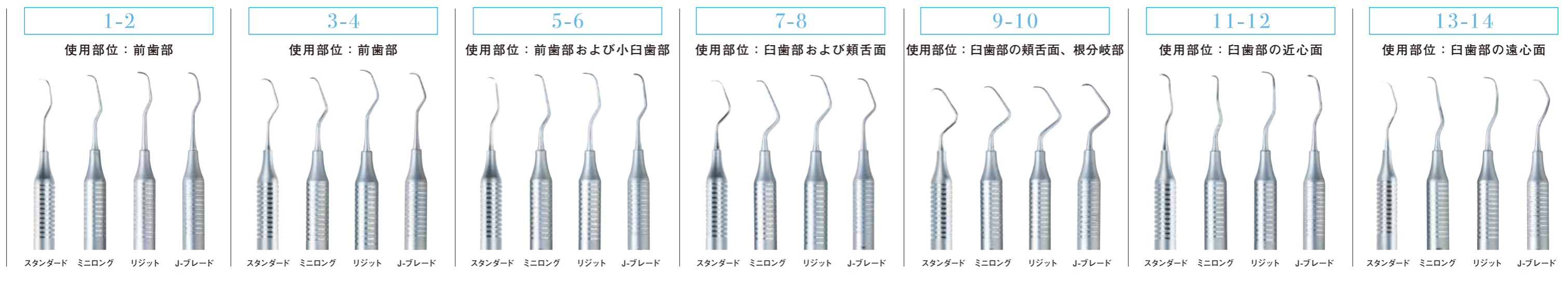

デュラライトCRHグレーシーはなぜ疲労感が少ないのでしょうか？

より軽い中空のハンドル。

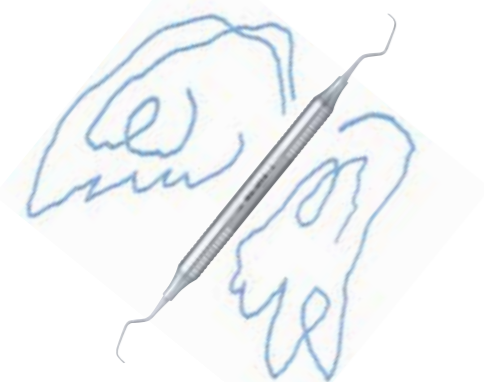

グリップが軽く中空なので歯肉縁下のわずかな歯石も手指に敏感に感じ取ることができます。

握りやすい太めのハンドル。



太めのハンドルは握りやすく、長時間の施術による手指の疲労を軽減。また、工夫されたグリップのスリット形状により、グローブでも滑りません。

スタンダード TRU Gracey™


軽い・握りやすい・力が出る。



わずか12.4g。従来のインスツルメントに比べ、半分以上の重さのハンドルです。スタンダードなブレード、シャंक形状で、一般的な歯肉縁下スクレーリング、ルートプレーニングにご使用ください。

ミニロン グ

深いポケットや根分岐部に。

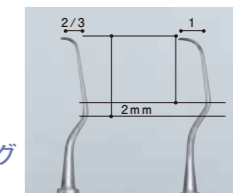

ミニロン グ スタンダード

スタンダードに比べ第一シャंकが2mm長く、ブレードも2/3の大きさなので、深いポケットや根分岐部のSRP（スクレーリング・ルートプレーニング）がスムーズに行えます。

リジ ッ ト

強固な歯石や多量の歯石に。




リジ ッ ト スタンダード

スタンダードに比べシャंक部が太く、硬く柔軟性が少ないため、強固に付着した歯石の除去に適しています。

J-ブレード TRU Gracey™

日本人の口腔に合わせたブレード。

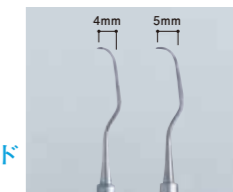

J-ブレード スタンダード

従来のスタンダードに比べブレードをコンパクトにすることで、歯肉縁上・縁下にスムーズにアクセスでき、しかも硬い歯石のスクレーリングに効果を発揮します。

エルゴノミックデザインインスツルメント

デュラライトCRHグレーシー

TRU Gracey™

TRU Gracey™のブレードデザインは、Dr. Graceyがデザインした本来のブレード形態です。ハンドルの中心線にブレードの中心があり、ブレード自体は弯曲しています。そのため、ストローク中に歯根面に広く接触し、スクレーリングをより効果的に行えます。

