

DENTCRAFT.

Ultrasonic3800Z

超音波洗浄器 / ウルトラソニック3800Z

- スイープ方式によるムラの少ない洗浄
- シンプルで簡単な操作性
- コンパクトなボディに容量3.8Lの洗浄槽




コンパクトな本体に大きな容量の洗浄槽。
スイープ発振方式でムラの少ない洗浄を可能にしました。



スイープ発振方式

周波数を変調させて発振することにより、定在波の発生を抑制し、洗浄ムラを少なくします。

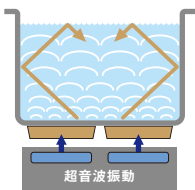

コンパクトなボディに3.8Lの大容量

コンパクトなボディながら3.8Lの洗浄槽で大量の器具が洗浄可能。洗浄の手間を大幅に削減し、洗浄コストを抑えます。

シンプルで簡単な操作性

洗浄する器具を入れてボタンをワンタッチ。シンプルで使いやすい操作パネル。




洗浄能力比較試験

超音波洗浄器にアルミ箔を入れ、その剥離状態により洗浄力を確認します。
(洗浄時間30秒、洗浄液は水道水を使用。)

槽内に水平にアルミ箔を入れる

全体にムラなく剥離が見られます。

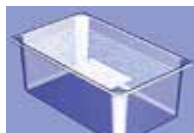

槽内に垂直にアルミ箔を入れる

全体にムラなく剥離が見られます。



(株式会社エスエヌディによる試験結果)

洗浄槽内全体にムラなく超音波による洗浄効果が得られます。

関連商品



ID-213 (インストルメント洗浄液)

ドイツ応用衛生協会「VAH」規定、欧州規格に準拠。50倍希釈で使用出来るため経済的です。

●標準価格:15,900円(2.5L入)



ID-220 (パー・リー・マーファイル)

腐食防止成分を配合しており、器具の材質にやさしい洗浄除菌液です。原液でご使用ください。

●標準価格:10,900円(2.5L入)

ウルトラソニック3800Z仕様

●標準価格:148,700円 ●本体寸法:W342mm×D201mm×H177mm ●洗浄槽寸法(開口):W299mm×D150mm×H100mm(逆台形状)

●洗浄槽容量3.8L ●本体重量:約2.7kg

●電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:75W ●高周波出力:70W ●発振周波数:44kHz

◎販売名:ウルトラソニック3800Z ◎一般的な名称:器具除染用洗浄器 ◎届出番号:20B2X00004000009(一般) ◎製造販売元:株式会社エスエヌディ 長野県諏訪市四賀3225-2

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

価格は2025年3月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

ユニット・歯科材料・滅菌器などお問い合わせは

株式会社 **3S-D** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 ± 9:00～17:00
(日曜・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)



(01)02747937015063

C01947/2025年3月/◎20/改