

歯石及び着色の除去



歯列不正



根面露出



デブリドメント



急性期ポケット内のイリゲーション



メンテナンス時におけるスケーリング



◎写真の製品は実寸大です。

スーパーソニックスケーラー「サリー」だから  
痛みを軽減したSRPが行えます。

スーパーソニック・スケーラー

**サリー**

Super Sonic Scaler SALLY

# 快適な歯石除去はサリーからはじまります。

患者さんが嫌がる不快な振動音を大幅カット\*。

\*当社製品比



快適1


歯面への刺激と痛みを抑えて

患者さんに優しいルートプレーニングが可能に。

従来のミクロン社製エアースケーラーに比べチップ先端の最大振幅を約1/3\*に抑制。

このため、痛みの少ない治療とともに歯面への影響を最小限にしました。しかもスーパーソニックだから効率の良いスケリングが行えます。

\*当社製品比

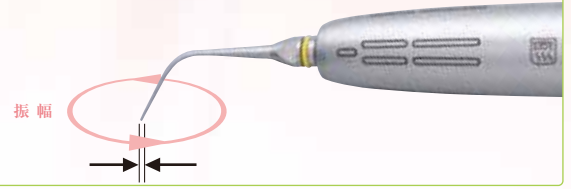

快適2

タービンホースに接続するだけ。だから、煩わしいセッティングは一切ありません。



クイックオプチカジョイント

クイックジョイント


各社ユニット用アダプターもご用意しています。

快適3

処置面の比較でわかる

歯面にやさしいスーパーソニックケーラー・サリー。

歯石が除去され、歯面に損傷のないことが認められます。

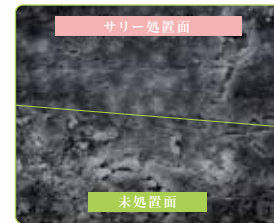


\*電子顕微鏡写真提供：日本大学歯学部 歯周病学講座

快適4

## 標準装備チップ

標準価格：各8,750円


\*チップの大きさは原寸大

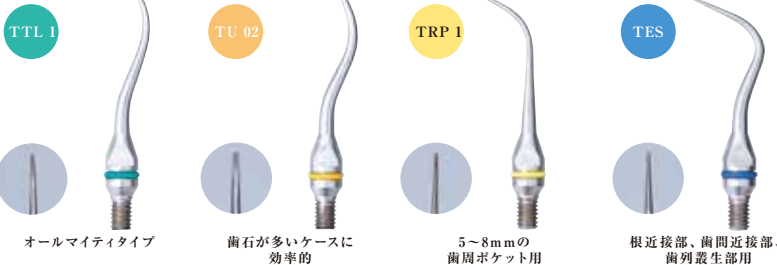

## オプションチップ

標準価格：各9,550円

\*チップの大きさは原寸大

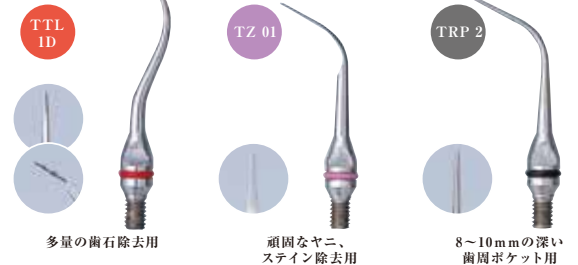

根管洗浄用チップもご用意しています。

根管内に残った切削粉などをスーパーソニックの力できれいに洗浄。

サリー用ホルダーH03セット 標準価格：12,400円  
(Uファイル用チャック0.8φ、ホルダー、レンチA)

\*Uファイルは別売となります。



ご使用のチップは摩耗していませんか？  
チップ消耗ガイドでご確認ください。



- ◎SALLY●接続方式：クイックオプチカジョイント接続●全長(チップ含まず)：105mm●重量：74g●標準価格：195,500円
- ◎SALLY ST●接続方式：クイックジョイント接続●全長(チップ含まず)：111mm●重量：80g●標準価格：195,500円
- ◎SALLY M●全長(チップ含まず)：111mm●重量：80g●標準価格：195,500円
- ◎SALLY・SALLY ST・SALLY M共通仕様
- 振動数：14,000Hz以上(パワー調整リングにより調整可能)及び使用するチップによる
- 空気手元圧力：0.3MPa●一般的名称：歯科用エアースケーラー●認証番号：21400BZZ00149000(管理特管)
- 付属品：スケリングチップ4本(TTL1/TU02/TRP1/TES各1本)、専用レンチ1個、チップカバー1個、チップ消耗ガイド1枚

ユニットから供給されるエアと水で駆動するため、電磁波によるペースメーカーに対する影響がありません。

\*仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

価格は2023年3月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●取扱店

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00  
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937011720

C01619/2023年3月/PRO/1/20/改

●発売元：株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9

●製造販売元：株式会社ミクロン 東京都大田区東雪谷1-34-14