

コア接着時における根管口の洗浄やレーザー治療の際など
 ドクターの治療にもお役に立ちます。



コア接着のための
 根管口洗浄



レーザー治療の後処理



修復物装着前の清掃



カラフルなシリコングリップ

オートクレーブ滅菌対応のカラフルなシリコン製のグリップです。
 各ハイジニストに合わせて色を変えることができます。
 ①ピンク②イエロー③グリーン(以上3点はセットに標準装備)
 ④ブルー(オプション)⑤オレンジ(オプション)
 ●標準価格:シリコングリップ単品(3個入)各2,100円



ユリー標準セット内容




①ユリーブラシチップ②③④シリコングリップ⑤ハンドピース本体⑥ユリーブラシチップレンチ
 ⑦ユリーブラシチップクリーニングワイヤー⑧⑨⑩⑪ユリーブラシ(各5個入)

ユリーブラシ(歯面清掃用ブラシ)※実寸大



①ユリーFブラシ小…フラット型、直径3mm
 ②ユリーFブラシ大…フラット型、直径5mm
 ③ユリーMブラシ小…山型、直径3mm
 ④ユリーMブラシ大…山型、直径5mm
 ●標準価格:ユリーブラシ単品(5個入)各4,000円

ダイレクトカップリングタイプ 各社のタービンホースに直接接続可能なダイレクトカップリングタイプもラインナップ

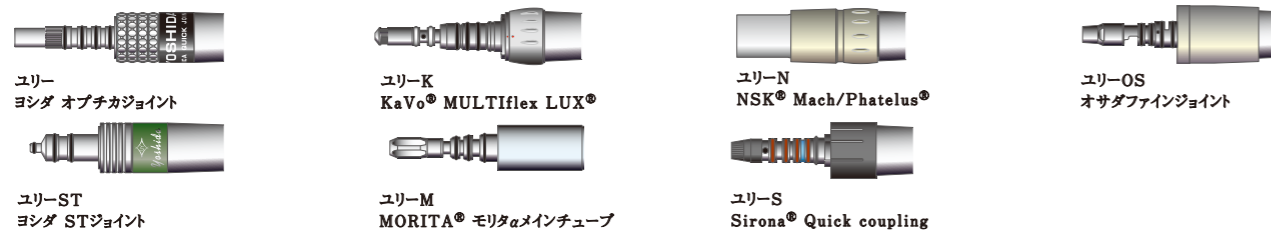

●一般的名称:歯科用エアスケラ ●販売名:ユリー ●認証番号:226AKBZX00111000(管理医療機器 特定保守管理医療機器) ●標準価格:ユリー各種 123,900円

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2023年3月現在。消費税は含まれておりません。

●お問い合わせは下記まで

禁無断転載

●発売元:



〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.0800-170-5541(コンタクトセンター) <http://www.yoshida-dental.co.jp>

●製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7



(01)02747937013014
 C01740/2023年3月/PRO/30/@40/再



マイ
 ブラシハンドピース

Yully
 for PMTC

ユリー

サブソニックブラシシステム

わ・た・しオンリーのブラシハンドピース。

サブソニック振動を効率よく伝えるようになり、清掃力がアップしました。
 ブラシ専用だからブラシの特性を最大限に発揮します。
 ハイジニストをターゲットに新開発したハンドピースは、細めで軽く使いやすいので
 長時間の治療にかかる手の負担を軽減します。

歯面の清掃はもちろん、インプラント周りのデリケートゾーン、
 矯正装置が装着されている部位の清掃ケアに、ユリーは“ちから”を発揮します。

ユリーの
 詳細は→



サブソニックによる洗浄効果。

注水下で水流と振動の音波効果
 (サブソニック振動)によって起きる泡
 により、バイオフィルムの破壊や洗い流
 し作用を生かしたプラーク除去、無
 水下でポリッシングペーストを使用し
 た細部のステイン除去等、幅広い診
 療に使用できます。



ユリーブラシ専用ハンドピース。

ユリーはブラシ専用設計なので、操作も見た目も
 シンプル。面倒な調整はいりません。手になじむ
 形状と軽いハンドピース。歯面へのアクセスも良
 好で、より手軽にご使用いただけます。



	ユリー	当社他製品
重量 (g)	60	73
パワー調整	不要	要
空気手元圧力 (MPa)	0.3	0.3
空気消費量 (L/min)	23	23
冷却水圧力 (MPa)	0.2	0.2
冷却水量 (ml/min供給時)	34	29
ヘッド角度 (°)	110	130

各種パーツは 滅菌可能。


本体はシリコングリップを装着し
 たままオートクレーブ滅菌可能
 です。但し乾燥工程にはかけな
 いください。

※ユリーブラシは10回程度が目安です。



使いやすい角度の ブラシチップ。

垂直に近いヘッド角度により、最後臼歯遠心
 部や隅角部など、さまざまな部位にアクセス
 しやすくなりました。

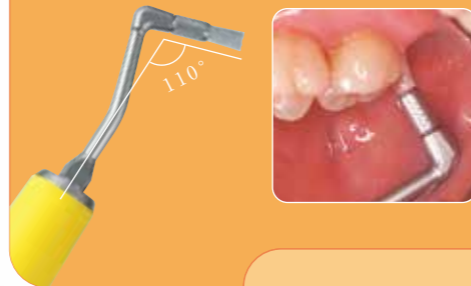

カラフルなグリップ。

3色のシリコングリップを標準
 装備。個々のハイジニストそれ
 ぞれがMyハンドピースを認識
 できます。



○標準カラー:ピンク・イエロー・グリーン
 ○オプションカラー:ブルー・オレンジ

デンタルハイジニストのPMTc処置を効率よくサポート。
 使いやすさとパワーが自慢の「ユリー」です。



サブソニック振動によって発生する洗浄効果で、
 より安全に細部に届き、繊細なパワーでプラークを容易に除去できます。
 初心者の方から熟練した方まで効率的な治療が可能です。

辺縁歯肉部の洗浄



知覚過敏 根面露出部の清掃



シーラント充填前の 裂溝清掃



粘膜についた 歯垢染色剤の除去



余剰セメント除去



ラミネートベニアや ポーセレンのメンテナンス



義歯のクリーニング



根面板周囲の洗浄



矯正装置のプラーク除去



インプラントの アバットメント清掃



ポーンアンカードブリッジの メンテナンス



口腔内の状況に合わせて 選べる4つのタイプ

- Fブラシ小・大
 平滑面の清掃に
 適しています。
- Mブラシ小・大
 歯肉溝や隣接面及び
 小窩裂溝の清掃に
 適しています。

