

YOSHIDA

軽量・コンパクト

わずか130g(ジャスティⅢと比較して約30%軽量化)

幅73mm×奥行84mm×高さ90mm(ジャスティⅢと比較して約30%コンパクト化)

シンプルで使いやすい

シンプルデザイン。ユニットテーブル上でジャマにならず、
持ちやすく移動もラクラク

高精度測定機能

2種類の周波数の組み合わせから常に整合性を確認する「統合補正測定システム」搭載
口腔内の環境に影響されず、ドライでもウェットでも測定できます

本体前面パネルを
押すだけで確実に電源ON
スタート準備ができます



JUSTY 3.5
APICAL LOCATOR

根管長測定器 ジャスティ3.5

測定するだけではなく精度向上も追求した新機能搭載

「ジャスティ3.5」登場

根管にファイルを挿入するとリアルタイムでメーターが連動。根尖付近に近づくとメーターとブザー音で警告します。湾曲根管など触診だけでは気づきにくい治療で術者をサポートします。




ジャスティ3.5 根管長測定表示例

チャンネルインストゥルメントホルダーにファイルをセットして根管内に挿入します。


① ファイル挿入

根管内にファイルを挿入するとリアルタイムでメーターが連動します。

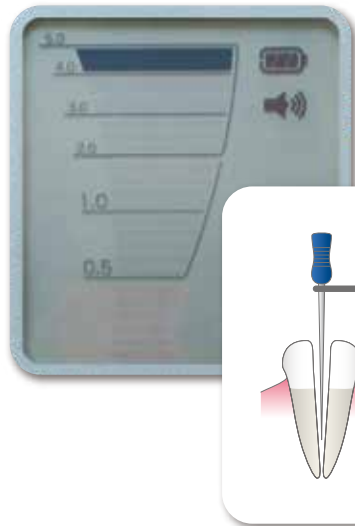

② 根尖付近

根尖に近づくとグリーンのみメーターとブザー音で知らせます。

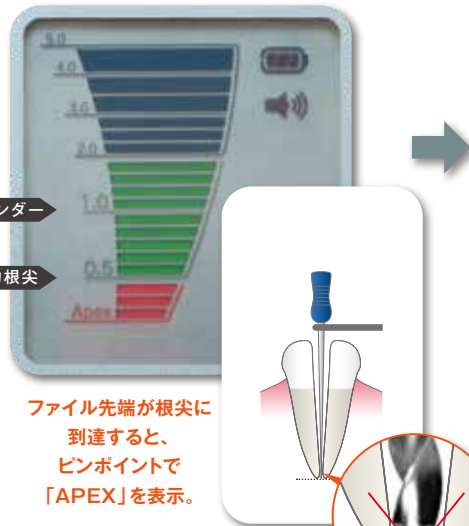

③ 幅広い測定範囲

APEX以降は3段階表示。拡大ファイル選択の目安になります。



● 付属品



チャンネルインストゥルメントホルダー / 1本



口角ホルダー / 1本



排唾管クリップ / 1本

ジャスティ3.5仕様

- ジャスティ3.5本体 ● 定格電源:DC3.0V(単4アルカリ電池×2本) ● 消費電力:70mW ● 測定電圧:AC50mV以下 ● 測定電流:10μA以下 ● 測定表示:LCD表示板/ブザー音
- 本体寸法:W73mm×D84mm×H90mm ● 質量:130g(電池・ケーブル含まず)
- 付属品 ● 本体 ● チャンネルインストゥルメントホルダー1本 ● 口角クリップ1本 ● 排唾管クリップ1本 ● 単4アルカリ乾電池2本
- 一般名称:歯科用根管長測定器 ● 販売名:ジャスティ3.5 ● 認証番号:229AGBZX00014000(管理 特管) ● 標準価格:128,000円(税別)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2022年12月現在。

禁無断転載

● 取扱店

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシタ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～19:00 ± 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937015346