

YOSHIDA

Tockie Clave 260

高圧蒸気滅菌器
トッキークレーブ 260



大容量

簡単操作

スピーディー

ひとまわり大きめだからまとめて滅菌が可能です。

高圧蒸気滅菌器

Tockie Clave 260

トッキークレーブ 260



■まとめて滅菌できる大容量

一度にまとめて滅菌ができ、時間の短縮が図れます。

■スピーディで簡単な操作

滅菌コースをワンタッチで選択できます。

滅菌コース	滅菌温度	滅菌時間
1	121℃	20分
2	132℃	5分

■乾燥工程時間を自由に設定できます。

乾燥工程時間は自由に設定が可能です。(0～99分)

デジタル表示で、設定された乾燥時間が大変見やすくなっています。また、使用した蒸気を貯水タンクへ還元する循環式なので、ランニングコストを抑えられます。

■各種の安全機構を装備

サーミスタによる温度コントロールをはじめとする、圧力、温度の異常上昇防止装置、定電流安全回路等を組み込んだトッキークレーブ 260 は安全に対し細心の注意をはらっております。

■特別な付帯工事は不要

100V コンセントですぐに使用が可能です。

■関連製品

蒸留水
DC スピード・ゾル 4L
標準価格：1,400 円



※1 ヶ月に1度の蒸留水の交換が必要となります。
(機械の消耗を抑える為、蒸留水を使用することを推奨します。)

注水


滅菌

乾燥

完了

電源
OFF

■寸法

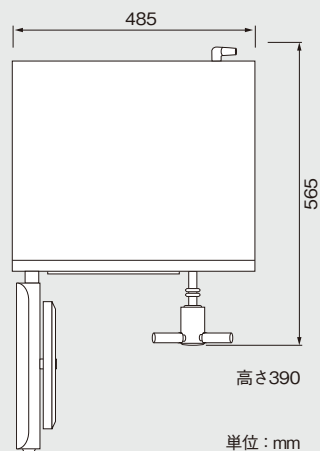

単位：mm

■仕様

販売名	トッキークレーブ
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	1.44Kw
外形寸法	W485×D565×H390mm(取っ手含む)
滅菌槽寸法	260φ×350mm
滅菌温度	121℃/132℃
乾燥時間	0～99分
滅菌時間	132℃-5分/121℃-20分
重量	32Kg 冷却水含まず
付属品	スノコ板 1枚、ナイロンたわし 1個 排水フィルター 1個、簡易カストセット 1個
一般的名称	小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
承認番号	21900BZX00233000(管理 特管)
標準価格	492,000 円

※滅菌用の注水は自動ではありません。
※本体の他に付属の排水ボトルを設置する必要があります。

©販売元：株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9 <https://www.yoshida-dental.co.jp>

©製造販売元：ヒルソン・デック（株）埼玉県鴻巣市宮前 547-1

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ※価格は2025年8月現在の税別価格です。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 ± 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937011959

C01643/2025年8月/20/改