

チェアサイドでは、デンタフォース。

義歯研磨やインレー、クラウンの調整など、  
チェアサイドでの使用に適した技工用マイクロモーター デンタフォース。



デンタフォースは

- ・1,000～35,000 r.p.m.の回転数で、調整や研磨作業などが可能。
- ・チェアサイドでの移動が容易なコンパクトサイズ。
- ・回転数調整は本体でもフットコントローラーでもどちらでも可能。
- ・フットコントローラー標準装備で、お買い得価格の70,000円。



パネルスイッチ



### 技工用マイクロモーター デンタフォース

- セット内容: 本体、モーターハンドピース、フットコントローラー、ハンドピーススタンド、モーターハンガー、カーボンブラシ1組
- 標準価格: ¥70,000
- 本体仕様: 電源: AC100V 50/60Hz 26VA 寸法: W130×D132×H87mm 重量: 1.7Kg
- モーターハンドピース仕様: 回転数: 35,000r.p.m.(最高) 寸法: φ28.8×L162mm 重量: 190g
- 最大(停止)トルク: 3.2Ncm
- 一般的名称: 歯科技工用電気エンジン ●販売名: デンタフォース ●届出番号: 11B3X00018110001

### ●スペアパーツ




モーターハンドピース  
標準価格: ¥45,000




本体  
標準価格: ¥30,000



フットコントローラー  
標準価格: ¥9,500

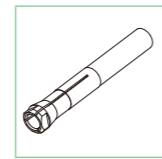

コレットチャック  
標準価格: ¥4,200

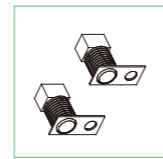

カーボンブラシ  
標準価格: ¥2,500

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●お問い合わせは下記まで

禁無断転載

高機能、低価格 (¥120,000)。

技工用マイクロモーター  
ラボフォース。



# Labo force

技工用マイクロモーター ラボフォース

◎発売元:

株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.0800-170-5541 (コンタクトセンター)

◎製造販売元: 浦和工業株式会社

株式会社ヨシダはISO9001とISO13485を取得しています。  
詳しくはヨシダホームページをご覧ください。  
<https://www.yoshida-dental.co.jp>



(01)02747937009161  
2022年7月/PR/50/@50/改

# 機能性、操作性、耐久性に優れた、プロフェッショナル仕様 ラボフォース。



## 2本のハンドピースが接続可能

・左右どちらにでもハンドピースを接続できるので、作業スペースのレイアウトに合わせて使いやすい配置をすることができます。  
 ・2本のハンドピースを接続し、使い分けが可能なので、バー等の交換頻度を減らすことができ、技工作業効率がアップします。

※2本同時に回転させることはできません。



## オートクルーズ機能

同じ回転数で連続した作業を行う場合に、回転数の固定が可能。フットコントローラーから足を離して使用でき、作業の効率化が図れます。



## パネルスイッチ



## デジタル回転数表示

適切な回転数<sup>\*</sup>で作業することにより、バーの寿命や作業効率がアップします。

※バーメーカー指定回転数



## エラー表示

トラブルが発生したときにエラーコードが表示されるので、表示に応じた対処をすることで修理対応がスムーズになります。



## ハンドピースのトラブルを未然に防ぐトルク表示

トルク表示があるので、過負荷によるモーター焼き付きや、チャックの消耗を防ぎます。また独自の制御プログラムにより、回転数とトルクを適正に保ち、作業効率を高めます。



## 軸ブレがほとんどない高精度ハンドピース

軸ブレを0.02mm以下に低減。精密作業に適しています。

## 持ちやすく低振動タイプのハンドピース

持ちやすく、手にフィットするグリップ。ハンドピース先端部にシリコンゴムを採用し、滑りなくなっています。しかも低振動タイプなので、疲れにくく設計されています。



## スムーズなチャック開閉

チャック開閉時の力を30%<sup>\*</sup>軽減しました。軽い力で交換作業がスムーズに行えます。

※当社比



## 防塵機構

新開発の防塵機構で、切削粉がハンドピース内部に入りにくくなっています。チャックやベアリングをトラブルから守ります。



## 便利な手元スイッチ

マイクロモーターのON/OFFが手元スイッチでも操作できます。



## 技工用マイクロモーター ラボフォース

- セット内容:本体、モーターハンドピース、フットコントローラー、ハンドピーススタンド、モーターハンガー2個、カーボンブラシ1組
- 標準価格:¥120,000
- 本体仕様:  
電源:AC100V 50/60Hz 30VA  
寸法:W200×D180×H100mm  
重量:2.3Kg
- モーターハンドピース仕様:  
回転数:35,000r.p.m.(最高)  
寸法:φ28×L157mm 重量:220g
- 最大(停止)トルク:5.4Ncm
- 一般的名称:歯科技工用電気エンジン
- 販売名:ラボフォース ●届出番号:11B3X00018110002



## ●スペアパーツ



モーターハンドピース  
標準価格:¥75,000




本体  
標準価格:¥60,000



フットコントローラー  
標準価格:¥9,500



コレットチャック  
標準価格:¥4,200

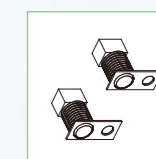

カーボンブラシ  
標準価格:¥2,500