

ラボマックス300




**セミオートタイプ・リングファーンレス
コンパクトサイズで低価格**

本体がコンパクトサイズなので、設置する場所を選ばない省スペース設計です。低価格なので、お求めやすいリングファーンレスです。
(炉内寸法はW115×D180×H90 (mm))

- 仕様**
- 電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:1.2kVA ●最高使用温度:1,000℃
 - 安全設置空間:左右前後50cm以上、上部150cm以上
 - 本体寸法:W260×D325(360含取手)×H360mm ●炉内寸法:W115×D180×H90mm
 - 本体重量:約13kg ●一般的名称:歯科技工用リング焼却炉 ●販売名:ラボマックス300
 - 届出番号:13B2X00051000018(一般) ●標準価格:200,700円(税別)

シンプルな使い易さ

昇温速度と係留時間が設定可能。スタートキーと係留タイマーで操作が可能です。高出力ヒーターで、設定温度まで確実に昇温し、焼却できます。

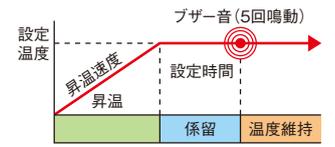

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

◎発売元: 株式会社 **ヨシダ** <https://www.yoshida-dental.co.jp/>
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.0800-170-5541(コンタクトセンター)

◎製造販売元:城田電気炉材(株) 東京都中野区若宮2-55-3