

BEST SURGE

高周波電気メス／ベストサージ

- チップの付け替えが容易なハンドピース
- モードが一目でわかるLEDランプ
- どの方向から踏んでも作動するフットスイッチ



使いやすさとコンパクト化を追求。


標準価格 **¥198,000**

操作性に優れたハンドピース

【コレットチャックハンドピース】
チップの付け替えが容易に行えます。

【コード】
ポリフッ化エチレン樹脂と高純度シリコンの特殊製品。
コードが絡んだり癖がつきません。滅菌可能。

【モード選択】LEDランプで波形モードを一目で確認できます。

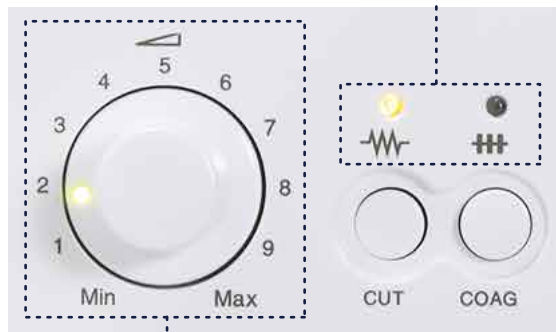

【パワー選択】ダイヤル式のパワー調節。認識しやすいLEDランプ表示。

フットスイッチ

360°どの方向から踏み込んでも作動する
フットスイッチで、治療に専念できます。



チップ収納ケース

そのまま滅菌器に入れられるケースです。




セット内容



セット内容：
ベストサージ本体、チップ収納ケース、チップ#2・#15・#34 各1本

ベストサージ専用チップ一覧

付属の#2・#15・#34以外にも6種類のチップがありますので、豊富な症例に対応できます。

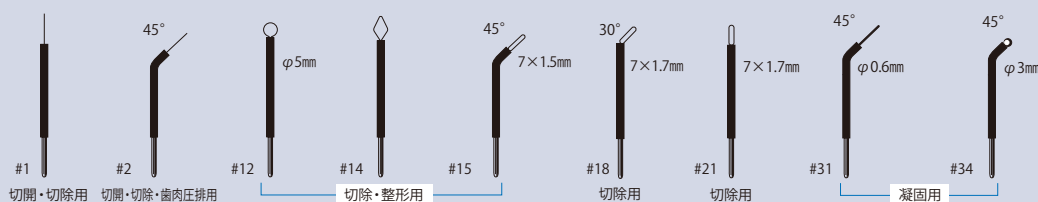

※ベストサージには専用の
「電気メス用チップ単品各種」
をご使用ください。
●標準価格:9,000円(各1本)

ベストサージ 仕様

●標準価格:198,000円 ●本体寸法:W150mm×D193mm×H80mm ●重量:1,160g ●電源:AC100V±10% 50/60Hz ●消費電力:80VA ●周波数:1MHz
●出力切替:①切開波形 ②凝固波形
●販売名:ベストサージ TME-701型 ◎一般的名称:一般的電気手術器 ◎承認番号:21300BZZ00083000(管理 特管)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

価格は2025年11月現在。消費税は含まれておりません。

無断転載禁止

●お取引歯科ディーラー名

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシタ** コンタクトセンター**0800-170-5541**

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937016015

C02034/2025年11月/20/改

●製造販売元:藤栄電気株式会社 神奈川県横浜市都筑区大丸26

●販売元:株式会社 **ヨシタ** 東京都台東区上野7-6-9