

# Poseidon ポセイドン サポートプラン

この度、ポセイドン(セントラルタイプ)の消耗品交換+簡易点検を主としたサービスをスタートいたしました。ぜひご検討ください。



ポセイドン(セントラルタイプ)


内容: フィルター(5個)+電極+気液分離器+簡易点検パックの5年間サポートプラン

対象: 新規導入医院様

価格: 月額¥5,000(税別) ※交換に関する技術料は別途

## ポセイドン付属のフィルター

※写真は一例です。

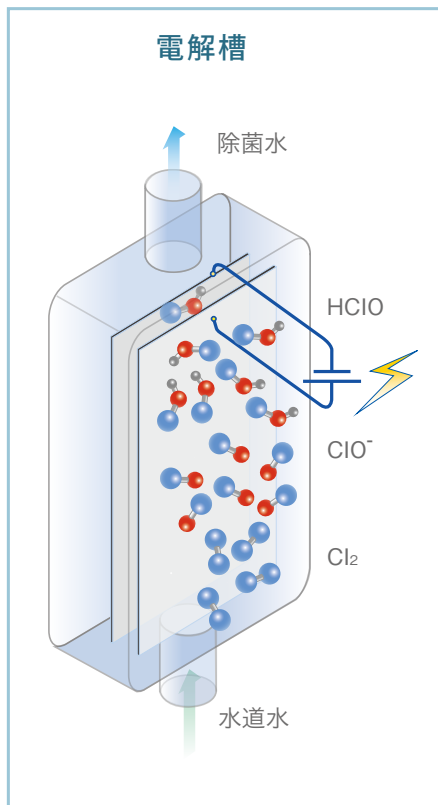

使用直後



使用12ヶ月後



カルシウムなど鉱質分による汚れ



水道配管内のサビなどによる汚れ

## フィルター交換

ポセイドンのフィルターの使用期限は**1年**です。定期的な交換を怠るとカルシウムなどの鉱質分や、サビなどの汚れがユニット給水経路に流れ込み、水量・水質低下による動作不良、水回路の詰まり、漏水の原因となります。

## 電極・気液分離器交換

ポセイドンの電極・気液分離器交換は**設置後5年**(または累計電解時間5,000時間)です。電極が経年劣化すると通電しづらくなり、水を電気分解して、電解水を生成することができなくなります。また、気液分離器の弁体等が劣化すると電解時に発生する気泡の除去効果が低下し、水漏れ等の原因となります。

01

1年後

フィルター交換

02

2年後

フィルター交換

03

3年後

フィルター交換

04

4年後

フィルター交換

05

5年後

フィルター交換  
電極交換  
気液分離器交換

## サポートプラン未加入の場合

交換品：フィルター5個、電極、気液分離器

費用：フィルター ¥20,000×5=¥100,000


電極ユニット ¥150,000

気液分離器 ¥ 32,000

部品交換賃 ¥ 25,000

合 計 ¥307,000

※交換に関する技術料は別途

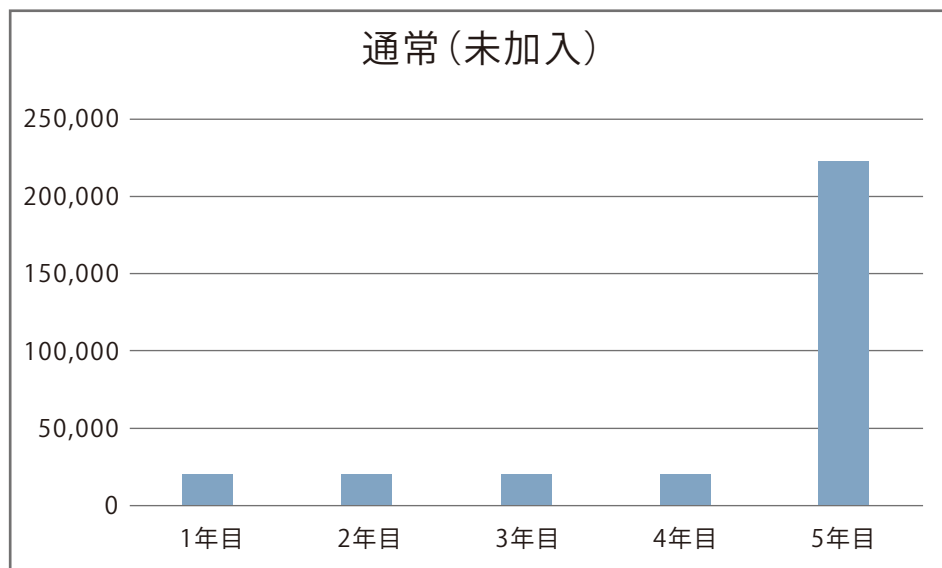

## サポートプラン加入の場合


交換品：フィルター5個、電極、気液分離器

費用：月々¥5,000×60ヶ月=¥300,000

**¥7,000オフ!!**

※交換に関する技術料は別途

定期的な消耗品交換、簡易点検を実施することで  
機器を最適な状態でご利用いただけます！

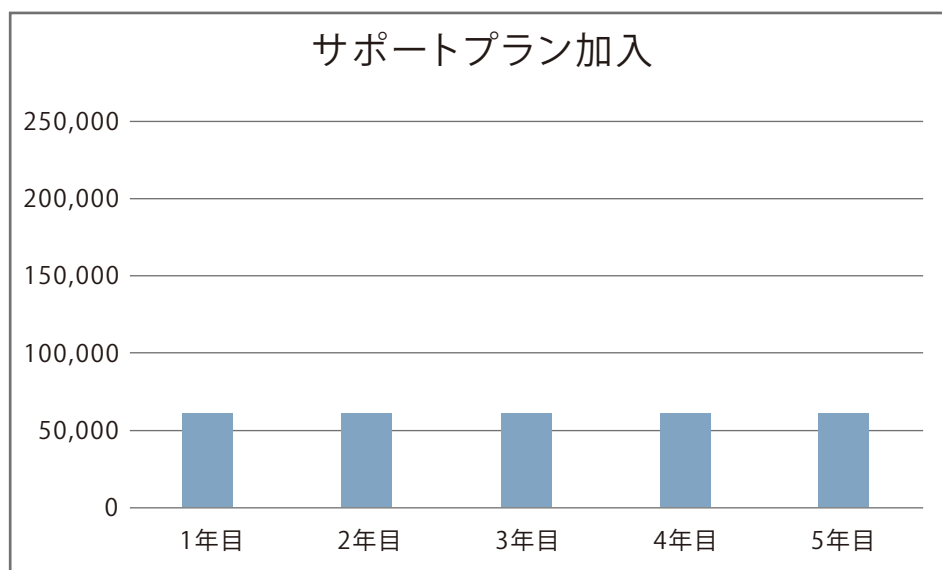

取扱店



〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9  
 (ユニット・歯科材料・滅菌器他のお問い合わせは)  
 TEL.0800-170-5541  
<http://www.yoshida-dental.co.jp>