



EXCEED **CS**

Keep it Simple

求めていたカタチが、ここに。
エクシードシェーズ。

それは、空間をデザインするユニット。

いかに自分の目指す診療を実現し、患者さんに伝えていくか。

それには、ドクターの姿勢やスタイルを

体現した空間づくりが欠かせません。

中でも鍵となるのは、診療室の主役であり、

患者さんと直に接する場所であるユニットです。

エクシードシェーズは、無駄を削ぎ落としたシンプルなデザイン。

いろいろなインテリアに馴染み、使い勝手にも優れています。

自分らしさを表現し、発信する空間を完成させる

重要なピース、それがエクシードシェーズです。





Prime Style

上質なくつろぎで、お迎えしたい。

郊外に歯科医院を構えてから15年。

家族ぐるみで長く通っていただいている方々に、
もっとくつろいだ気分で受診してもらいたい。

そう考えて、診療室のリニューアルに踏み切った。

妻やスタッフの意見を取り入れ、

国内外から選び抜いた壁材や床材の上質な色味に合わせて、

ユニットはゴールドのパネルとシャンパンホワイトのチェアを選択。

洗練された邸宅のリビングのような空間が完成した。

改装後に来院された患者さんが、深くうなずいてくれた。

Prime Panel Color





Active^{アクティブ} Style

私の主張を、空間に込めて。

念願だった開業を、オフィス街でついに果たした。
最新の治療法を、最新の設備やデジタル技術とともに、
ビジネスパーソンの皆さんへ提供していくつもりだ。
とりわけこだわったのが、診療室のデザイン。
他にはない、私の個性を打ち出したかった。
海外で出会った現代建築にインスパイアされ、ユニットのパネルは
鮮やかなネオンライム、シートは光沢のあるオーシャンメタリックに。
この空間なら、いつもベストパフォーマンスを発揮できそうだ。

Active Panel Color





さあ、思い描いていた空間へ。

四辺形と円を基本にした極限までシンプルなデザインにより、
素材やカラーがひととき映えるエクシードシェーズ。

2つのスタイルやバリエーション豊富なパネルカラー、
チェアカラーを自由に選んで組み合わせ、イメージ通りの
診療空間をつくり上げることができます。

そのこだわりは、ドクターの診療へかける思いとして
患者さんに伝わります。

思い描いていた空間で、患者さん一人ひとりと心が通じ合うケアを。

EXCEED 
/ エクシード シェーズ /



洗練されたフォルムの中に、機能がある。




一人ひとりに、しっかり寄り添う。

人が合わせるのではなく、人に合わせるチェアを。エクシードシリーズの「ずっとフィットシート」は、快適性と機能性を追求し、人間工学に基づいてバックレストや座面、レッグレストなどを設計。身体の大きい人にも小さい人にもこれまでよりずっと適応し、ずっと寝ていたくなるような心地よさを実現しました。また、バックレストのショルダー部を切り欠き形状にすることで、より患者さんに近い診療ポジションを取りやすくしています。患者さんに、ドクターに、しっかり寄り添うチェアです。

大きい人にも小さい人にも、「ずっとフィット」。


寝心地

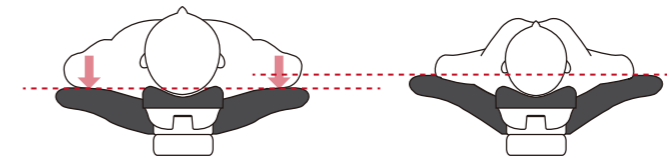

素材の弾性を生かした、多様な体型をカバーするバックレスト



チェアの初動と停止時の振動を低減

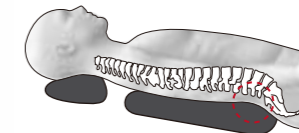


長時間、同じ姿勢でも疲れにくいランバーサポート


肘ものせられるゆったり広いバックレスト

座面とレッグレストは、脚閉じカーブで自然に閉脚

診療のしやすさ

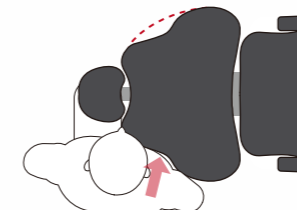

薄いバックレスト、切り欠き形状で患者さんに近づきやすく

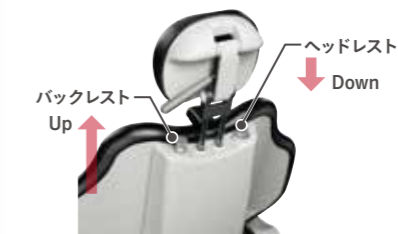


ワンタッチで上下する、バックレストとヘッドレスト

乗り降りのしやすさ

ロングアームレスト

最低位380mm

-5°レッグレスト

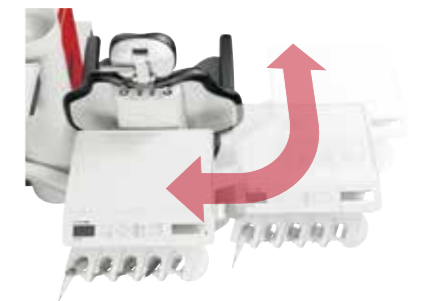

ドクターハンガーがチェアの背面まで移動できるので、スムーズな患者さん導入と多様な診療ポジションが可能

まるごと洗う、という発想。



毎日清掃していても落とすきれない細部の汚れを減らすために、さまざまなアイデアを盛り込みました。たとえば、「テーブルをまるごと洗えたらいいのに」という思いをかなえたのが、簡単に外せるテーブルトップとスイッチパネルが一体化したシリコンカバーです。本体機器に汚れがつかず、いつでも新品のカバーと交換できます。また、スピットンやユニット部は凹凸の少ないフラットな設計で拭きやすくなっています。エクシードシェーズは清掃にかかる時間を短縮し、清潔さをキープして、患者さんに安心をお届けします。



はずして洗える。細部まで拭ける。



Ⅰ お手入れ



お手入れのしやすいフラットデザイン



樹脂



OPTION

人工大理石

ユニット天板は、樹脂製と、よりお手入れしやすい石目のテクスチャが上質な人工大理石製から選べます。



テーブル部は、シリコンカバーを取り外すとフラットなステンレストップ



フラッシング機能搭載

インストゥルメント類とコップ給水の滞留水をオートサイクルで排出し、水回路をクリーンに保ちます。



操作スイッチを一箇所へ集約

一日の始まりと終わりの操作を一箇所で行えるよう、電源スイッチや水・エアークックユニポアを配置しました。

充実の診療アイテム

エアタービン



Skyroad SDC1



パワフルな高切削効率モデル。切削力を持続させるために、パーヘ万遍なく注水するマルチジェットスプレーを採用しています。

認証番号：218AKBZX00116000 (管理 特管)

Airroad 01



タービンヘッド内に、給排気のエアーフローコントロール（気流制御）機能を搭載することで、軸ブレが少ない安定した回転を実現しました。

認証番号：302AKBZX00049000 (管理 特管)

エアスケーラー

ルーティー560-YL-Neo



チップを交換するだけでスケーリング、根管拡大、根管洗浄、歯周ポケット洗浄や歯面清掃まで、様々な用途に活用できます。

認証番号：20700BZZ00045000 (管理 特管)
製造販売元：株式会社ミクロン 東京都大田区池上 2-17-7

マイクロモーターハンドピース

CUREALL 40S(等速)



CUREALL 40L



認証番号：219ACBZX00011000 (管理 特管)

SV200MLX(5倍速)



SV200MLXS(ショートタイプ)



認証番号：219AKBZX00160000 (管理 特管)

ユニット搭載超音波スケーラー



プチピエソ II (光つき)



プチピエソ II (光なし)



認証番号：220ACBZX00050000 (管理 特管)

ピエソS II (光つき/光なし)



認証番号：227AKBZX00076000 (管理 特管)

ハイブリッドインストルメント

keiair (ケイエア)



keiair K1
K1 / 照明：LEDライト (5灯) 注水：5方注水
ヘッド高さ：13mm 全長：112mm 質量：38g




keiair K2
K2 / 照明：LEDライト (1灯) 注水：5方注水
ヘッド高さ：13mm 全長：113mm 質量：38g

認証番号：227AABZX00043000 (管理 特管)

マイクロモーター×エアタービン2つを掛け合わせ生まれた、インストルメント。

従来のタービンでは不可能であった一定の回転速度の維持を実現しました。なめらかな形成と自在なコントロールで、思い通りの切削が可能になりました。

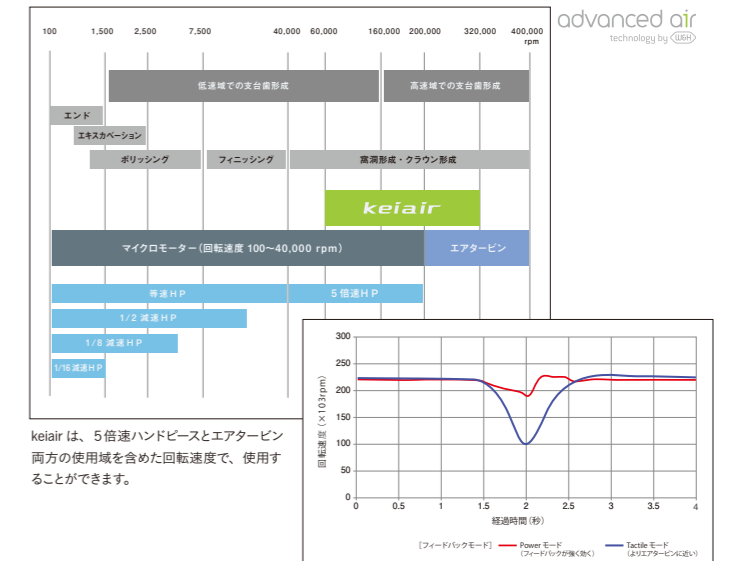

マイクロモーター/マイクロモーターハンドピース

MICRO MOTOR BL (マイクロモータBL)



YW ハンドピースシリーズ
SV40MLXS (等速)

サイズ・質量とも約 10%コンパクトに。※操作性に優れ、手指への負担が少ない、ショートタイプのハンドピースです。※当社従来品との比較

認証番号：219AKBZX00160000 (管理 特管)

マイクロモータ BL

回転数 100~40,000rpm
ブラシレスで本体丸ごと滅菌可能

認証番号：227AABZX00046000 (管理 特管)

無影灯 Lライト



センサーライトの機能に加えて、ヘッド部の可動が 3 軸の LED 无影灯。なめらかな操作性で微細な位置調整もスムーズです。

フットコントローラー

横スライド式フットコントローラー



踏み込み式フットコントローラー



有線/ワイヤレス

自分のスタイルをかなえる、4Step。

Step 1 スタイルをお選びください。



Active Style

Prime Style




標準パネルカラー

アクティブパネルカラー OPTION

Step 2 パネルカラーをお選びください。

プライムパネルカラー OPTION

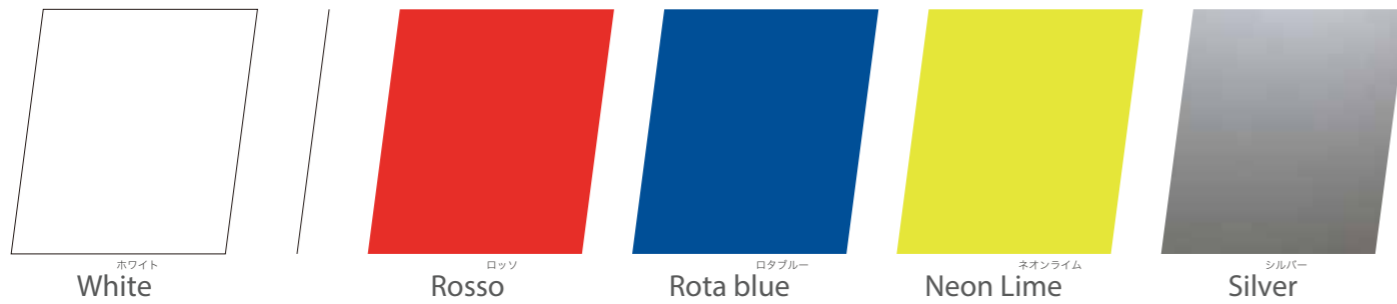

ずっとフィットシート

Step 3 シートカラーをお選びください。



ずっとフィットプライムシート （縫製タイプ） OPTION



縫い目がなく清掃性に優れたチェアシート。イタリア製の人エレザーを使用し目にも鮮やかなカラーが明るいインテリアのアクセントになります。




職人がひとつずつ縫い上げた人エレザーのチェアシート。アメリカンカーフ（仔牛）をモチーフにしたテクスチャと、豊富で落ち着いたカラーが、高級感のあるインテリアを演出します。

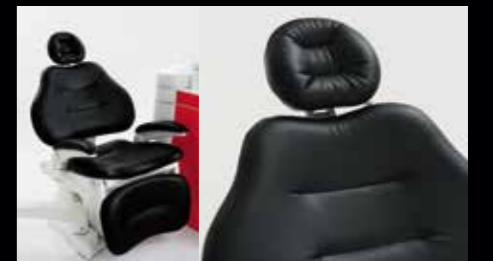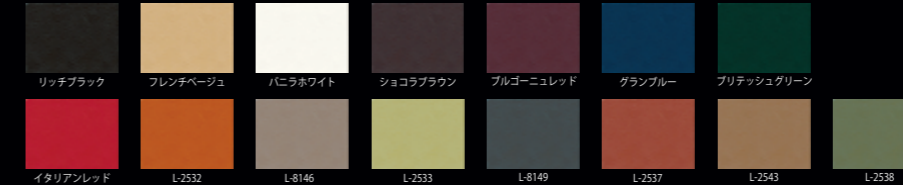

チェアタイプ・テーブルタイプ

Step 4 使いやすいチェアタイプ・テーブルタイプ・診療アイテムをお選びください。

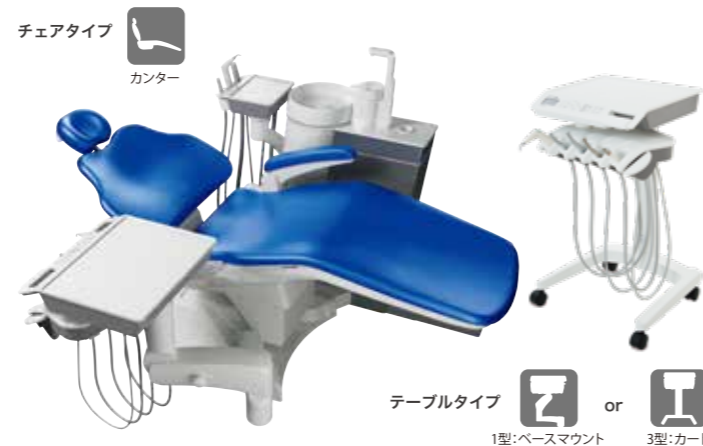

診療アイテムをお選びください。P16,17参照。



エクシードシェーズの特設サイトから、カラーシミュレーションや、いろいろなスタイル別のカラーイメージをご確認いただけます。色見本帳も貸し出しておりますので、お近くのヨシダショールームまたは営業所までお問い合わせください。

エクシードCs

※本カタログに掲載の商品写真はオプション装備仕様です。*モニター画面は、はめ込み合成です。
*本カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
◎販売名/エクシード Cs ◎医療機器認証番号:228AKBZX00083000 ◎一般的名称:歯科用ユニット(管理医療機器 特管 設置)

●発売元: 株式会社ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.0800-170-5541(コンタクトセンター)
●製造販売元: 株式会社吉田製作所 〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6

https://www.yoshida-dental.co.jp



(01)02747937015285

C01959/2023年5月/PRO/30/@200/改



EXCEED **CS**

YOSHIDA