



DENTAPAC  
KOKORO



本ロゴマークが付された製品は、  
日本歯科医師会・日本歯科医学会・  
日本歯科商工協会の連携事業として  
開発・認定された製品です。

カルフェ U

より軽く

質量 5 Kg

より小さく

W200  
×  
D230  
×  
H150mm\*

※カバーなしの場合

実物大

CARFE

コンパクトポータブルユニット カルフェ [CARFE]

訪問診療によって、歯科医院に来院できない患者さんにも健康と  
笑顔をお届けするために。

「すべての方への歯科医療」(dental CARE For Everyone)  
を実現したいという想いから生まれました。

CARFE U

CARFE V

CARFE C

YOSHIDA

# CARFE

# 「軽く」で「小さい」が、

訪問診療をより豊かで身近なものにします。

## より豊かな 訪問診療の未来を目指して

日本歯科医師会、日本歯科医学会、日本歯科商工協会が協力し、訪問診療を必要とする方の口腔内の改善から全身疾患の低減を目指し、健康に寄与していきます。そのため私たちは、訪問診療の現場でより安全な治療や患者さんのニーズに対応した機械、器材をご提供していきます。

軽くて持ち運びもラクラク！

質量わずか 5Kg

小柄な女性でも楽に持ち運べるコンパクトサイズ。肩掛けベルトとカートをご用意しました。



### カルフェだから、活躍の場が広がります。

訪問診療だけではなく、院内のカウンセリングルームや院長室に設置も可能。様々なシチュエーションでご使用いただけます。



※イメージ

## コンパクトながらも充実の機能で、より治療しやすく。

### 市販のミネラルウォーターでいつでも衛生的な注水

#### 500mL ペットボトルを簡単装着

カルフェ U (ユニット部) は市販のミネラルウォーターを装着し注水を行います。水の用意が簡便になり、常に衛生的な治療が可能です。



### ライトのみ点灯可能なマイクロモーターを標準搭載

#### 光付ブラシレスマイクロモーター


マイクロモーター使用時とは別に、単独でライト点灯可能。訪問先の薄暗い室内でも口腔内を明るく照らし、治療部位の確認が容易になります。



### フレキシブルなインスツルメントホルダでより快適な治療を

#### マグネット式インスツルメントホルダ

ホルダ裏面にマグネットを装備。カルフェ本体から離れても、スチール製のキャビネットやベッドフレームがあれば自由自在に取り付けられます。

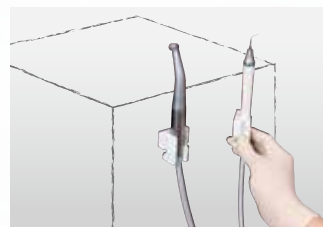

### 口腔ケアが困難な患者さんへ、より安心安全な治療をご提供

#### 超音波スケーラー

「フチピエソII」を搭載。マイクロモーター同様、ライト点灯可能な光付\*もご用意しました。(※オプション)



コンパクトだから使いやすい。訪問先のさまざまな状況に対応できます。

### 患者さんそれぞれの状況に合わせて最適なポジションがとれます。

ドクター側 [インスツルメント] とアシスタント側 [バキューム] を独立して設置できるので、患者さんのいる場所や状態(畳の上・ベッド)に合わせて無理のない最適な診療ポジションを取ることができます。

窓際や壁際の場合でも

窓際や壁際の場合でも、セパレート設計ならドクターもアシスタントも治療しやすいポジションを自在にとることができます。

ベッドの場合でも

マグネットでホルダ取付



### ■ ユニット部



### ■ バキューム部



※気水分離器 (セパレータ) は、別途取納する必要があります。

## 仕様

### CARFE U

(ユニット部)



販売名:カルフェU 一般的名称:可搬式歯科用ユニット  
電圧:AC100V 電源入力:300VA 認証番号:226AKBZX00021000(管理・特管)

#### ■標準装備

ペットボトルホルダ マイクロモータ:マイクロモータ3L(光付)  
超音波スケーラ:プチピエゾII 光無し 運搬ベルト

#### ■オプション装備

マイクロモータハンドピース:CUREALLハンドピース40S、CUREALLハンドピース40L、  
YWハンドピースSV-40SI、YW ハンドピース SV-40MI、YW ハンドピース SV-40MLX  
超音波スケーラ:プチピエゾII 光付き フットスイッチ:インストゥルメント用フットスイッチ



### 用途に合わせてモード切り替え

外部入力口(エア、水)がありますので、マイクロモータの回転速度、トルク、注水量を居宅モードと医院モードに切り替えて使用することができます。



### CARFE V

(バキューム部)



販売名:カルフェV 一般的名称:歯科用吸引装置  
電圧:AC100V 電源入力:300VA/800VA  
認証番号:226AKBZX00022000(管理)

#### ■標準装備

滅菌対応手元コック付バキュームグリップ、  
バキュームチップ、気水分離器(セパレータ)  
運搬ベルト

#### ■オプション装備

フットスイッチ:ON/OFF用フットスイッチ

### CARFE C

(コンプレッサー部)



販売名:カルフェC  
電圧:AC100V 電源入力:300VA

#### ■標準装備

運搬ベルト

#### ■オプション装備

シリンジキット エアのみ  
シリンジキット 3WAY(エア、水、噴霧)

- サイズ [カバーなし] W200×D230×H150mm  
[カバー装着] W203×D252×H179mm(クッションカバー、足ゴム、取手装備の場合)
- 質量 5Kg
- ホース長 1,200mm
- ※カルフェU、カルフェV、カルフェC 共通

販売名:マイクロモータ3L 一般的名称:歯科用電機回転駆動装置  
認証番号:224AKBZX00055000(管理 特管)  
販売名:プチピエゾ 一般的名称:歯科用多目的超音波治療器  
認証番号:220ACBZX00050000(管理 特管)  
販売名:YWハンドピース 一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース  
認証番号:219AKBZX00160000(管理 特管)  
販売名:CUREALLハンドピース 一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース  
認証番号:219ACBZX00011000(管理 特管)

## 関連製品

口臭予防に。

口腔洗浄に。

ステイン除去に。

保湿、清浄、口臭を防ぐ。

L8020乳酸菌入りタブレット



ピュリフレッシュ  
ウノ ティーウォッシュ



ピュリフレッシュ  
ドス リカルケア



ピュリフレッシュ  
トレス ソニックジェル



オーラルピース  
クリーン&モイスター



ラクレッシュPRO

- キシリトール
- 砂糖不使用
- ヨーグルト風味

舌を傷つけにくい  
舌ブラシ



オーラルブラシ  
ペロリーナ



5~10分の  
超音波洗浄で  
頑固な着色を漂白。



リプロクリーン

歯石が頑固に  
付着した  
義歯の洗浄に。



リプロメルト

## 取扱店名

※当カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により予告なく変更する場合があります。  
また、掲載商品の色調は実際の商品の色と異なる場合があります。

◎発売元: 株式会社 **ヨシダ** <http://www.yoshida-dental.co.jp>  
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.0800-170-5541(コンタクトセンター)

◎製造販売元: 株式会社吉田製作所 〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6

禁無断転載

C01695/2020年3月/PRI/10/@40/改



(01)02747937012437