

腰の負担を軽くするチルティング機構\*1をはじめ

座面形状の変更\*2や足踏み昇降機能\*3を新たに加え

ドクターやアシスタントの治療をより快適にするためのさまざまな工夫を施しました。

また、シート生地やカラーをユニットと同様にすることで診療空間をトータルにコーディネートできます。

\*1:MOA Sr \*2:MOA Nr α・MOA Nr \*3:MOA Nr α

いい治療にはいいツールを。

DOCTOR STOOL  
**MOA** ドクターズツール  
【モア】



MOA Nr α



MOA Sr

# ドクターの治療を快適にサポートするためにさまざまな機構をさらに磨き上げました。 ユニットと同色の豊富なカラーバリエーションがトータルコーディネート幅を広げます。

## エルゴノミクスに基づいたさまざまな機構とデザイン

座面のチルト機構 (MOA Sr)をはじめ、座面のクッションデザイン、足踏み昇降 (MOA Nr α) など治療の快適性をサポートするための、エルゴノミクスに基づいたさまざまな工夫がなされています。

### MOA Sr




#### 座面チルト機構

チェア座面が15°チルトすることにより、背骨の形状を座っている際も立っている姿勢のS字カーブに近づけ、腰の負担を軽減します。




#### 背面チルト機構

背のグリップを回転させることで5°の範囲で背面がチルトします。術者の体型、好みに応じ、幅広い診療ポジションに対応します。

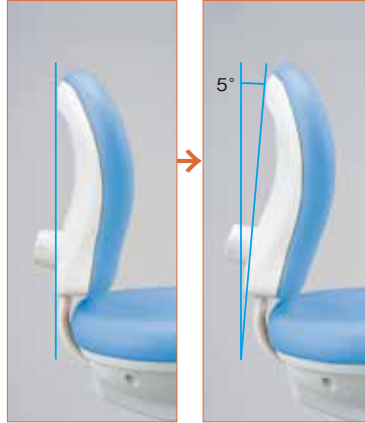

#### 体圧分布

座面部分は適度に体圧が分散されるよう設計されています。長時間の診療でも座面との接触面が痛くなりません。

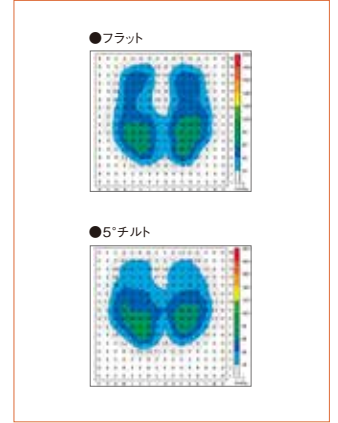

### MOA Nr



#### 座面デザイン

座面部分がより体にフィットするように、左右位置に窪みを付けました。長時間の診療にも快適で疲れにくいデザインでサポートします。


●MOA Nr/MOA Nr α 共通



#### 体圧分布

座面部分は適度に体圧が分散されるよう設計されています。長時間の診療でも座面との接触面が痛くなりません。

●MOA Nr/MOA Nr α 共通

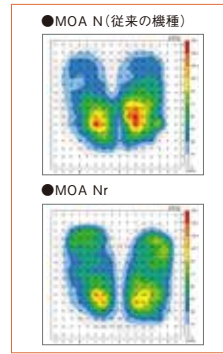


#### 足踏昇降機構

術者の手を煩わせることなく足踏みで高さ調整をすることができます。治療中に治療器具以外に触れる頻度を軽減することで衛生面でのリスクを回避します。

●MOA Nr α に採用されています。



### MOA Nr α

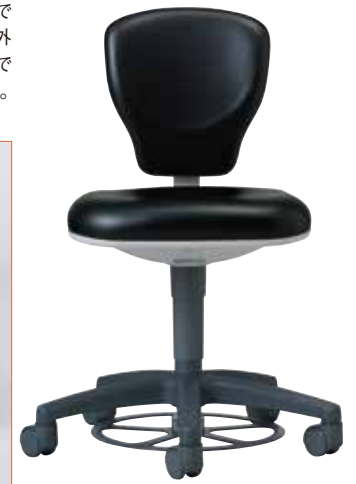

## 豊富なシートカラーバリエーション

チェアカラー-38色をラインナップ。デンタルオフィスのトータルコーディネートをサポートします。



※L品番およびMOA Nr αは受注生産品です。納期は約1ヶ月程度かかります。

### ●モア仕様・価格

- ◎MOA Nr α ●全高:最低・795mm～最高・915mm ●シート高・465mm～最高・590mm ●ストローク高・125mm ●座面・座幅430×奥行380mm ●重量:約10.1kg
- ◎MOA Nr ●全高:最低・775mm～最高・925mm ●シート高・450mm～最高・600mm ●ストローク高・150mm ●座面・座幅430×奥行380mm ●重量:約9.2kg
- ◎MOA Sr ●全高:最低・800mm～最高・950mm ●シート高・465mm～最高・615mm ●ストローク高・150mm ●座面・座幅435×奥行360mm ●重量:約12.5kg

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

◎発売元:

株式会社 **ヨシダ**  
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9  
**0800-170-5541** (コンタクトセンター)  
<http://www.yoshida-dental.co.jp>

●お問い合わせは下記まで

無断転載禁止



(01)02747937012918  
C01734/2025年5月/@20/改