

付属アプリケーション【ペリオスタジオ】によってできること

ペリオスタジオはインストールしたPC1台でポケット検査が可能です。
単体利用されたい医院様に最適です。



ペリオスタジオ 必要システム

対応OS	Windows 8.1 Windows 10 <small>※親機は、Professionalエディションが対象となります。 ※Windows 7SP1につきましては、インストール可能ですが、既にMicrosoftのサポート対象外となっておりますのでご注意ください。</small>
ハードディスク	インストール用空きディスク 1GB以上 <small>※登録データのための空きディスクは別途必要です。</small>
画面解像度	1024 × 768以上
その他	DVD-ROMドライブ またはその互換ドライブ

※お使いのデータが増えた場合、そのデータを格納するためのハードディスクもしくはその他のメディアが別途必要になります。
※ご使用の環境によっては、上記システムを満たしていても正常に動作しない場合がございます。
※Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

別売アプリケーション【達人プラス】によってできること

達人プラスは院内ネットワークを作ることデータ共有ができます。

患者管理支援ソフト
達人プラス
Version 6 ※別売品

■ブランク・ポケット

学術的な視点から捉えた歯周検査を継続的に管理し、正しい情報を患者さんにお伝えすることができます。

各画面にスコアが表示される

ブランクポケットのほか、様々な患者情報を一手に管理

■画像管理・編集

レイアウトした画像で患者さんに説明し、そのまま印刷してお渡しできます。

インフォームドコンセントとして使える

■口腔内情報

ビジュアル的な治療計画書を作成し良好な治療説明ができます。

歯列が大きく表示されスムーズに操作できる

達人プラス 必要システム

対応OS	Windows 8.1 Windows 10 <small>※親機は、Professionalエディションが対象となります。 ※Windows 7SP1につきましては、インストール可能ですが、既にMicrosoftのサポート対象外となっておりますのでご注意ください。</small>
ハードディスク	インストール用空きディスク 1GB以上 <small>※登録データのための空きディスクは別途必要です。</small>
画面解像度	1280 × 1024以上
その他	DVD-ROMドライブまたはその互換ドライブ

※お使いの画像やデータが増えた場合、そのデータを格納するためのハードディスクもしくはその他のメディアが別途必要になります。
※ご使用の環境によっては、上記システムを満たしていても正常に動作しない場合がございます。
※Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

利用料

月額利用料	8,000円	利用料に含まれるサービス ・契約期間における利用ライセンス ・製品の無償アップデート及びアップグレード ・フリーダイヤルによる電話サポート ・遠隔サポート ・クラウドバックアップ (1GB分)
1年バック	90,000円	
3年バック	260,000円	
6年バック	490,000円	

- 達人プラスは同じ院内のPCに何台でもインストールができます。また、ネットワークを作ることデータ共有することができます。
※ネットワークでご使用の場合は正規なネットワーク環境が整っていることが条件となります。
※インターネット環境の無いコンピュータでのご利用は、一部のサポートが制限されます。
※OSによって同時接続台数に制限があります。
- 達人プラスVersion6へのデータコンバートについて
達人プラスVersion3～5からはデータのコンバートが可能です。ただし、達人プラスVersion2からはデータコンバートに費用がかかります。

アプリケーション比較

	歯周データ管理	印刷可能パターン	レセコン頭書きリンク	歯周データカルテ連動
ペリオスタジオ (付属)	○	1点法 / 4・6点法 / 比較1点法 比較4・6点法 / カルテ用印刷 計5種類	—	—
達人プラスVersion6 (別売)	○	18種類 × 枠デザイン4種類 計 72パターン	○*	○*

*頭書き、カルテ連動が可能メーカー詳細は弊社までお問い合わせください。

歯周ポケット測定器
Pam

Pam 本体
医院価格 128,000円

■押し込み圧：最大25g以下

歯周ポケット測定器
Pam SENSITIVE new

Pam センシティブ 本体
医院価格 128,000円

■押し込み圧：最大15g以下

Pam 本体・Pam センシティブ 本体 共通仕様					
仕様	精度及び測定仕様			構成	・本体 1本 ・Pam ディスヘッド7mm 2個 ・Pam ディスヘッド13mm 2個 ・ペリオスタジオ DVD 1枚
サイズ	16mm×185.8mm	測定範囲	7mm 0～6mm 13mm 0～12mm		
重量	48g	最小表示単位	1mm	一般的名称 機器の分類 認証番号	JMDN 70697000 歯周ポケット測定器 特定保守管理医療機器 クラスII 228AIBZX00027000
定格電圧	DC 5V (USB/パワー)	表示精度	±0.5mm		
消費電流	0.1A (最大)				
USBコード長	2m				

Pam USB 1連有線フットスイッチ
医院価格 10,000円

入力設定^{※1}

通常	決定
長押し	出血

Pam(本体 or センシティブ本体)
+
USB 1連有線フットスイッチセット
医院価格 138,000円

Pam USB 2連有線フットスイッチ
医院価格 20,000円

入力設定^{※1}

通常	戻る	決定
長押し	排膿	出血

Pam(本体 or センシティブ本体)
+
USB 2連有線フットスイッチセット
医院価格 148,000円

Pam USB 1連無線フットスイッチ^{※2}
医院価格 40,000円

入力設定^{※1}

通常	決定
長押し	出血

Pam(本体 or センシティブ本体)
+
USB 1連無線フットスイッチセット
医院価格 168,000円

Pam USB 2連無線フットスイッチ^{※2}
医院価格 70,000円

入力設定^{※1}

通常	戻る	決定
長押し	排膿	出血

Pam(本体 or センシティブ本体)
+
USB 2連無線フットスイッチセット
医院価格 198,000円

※1 初期設定の状態です。好みに合わせて変更できます。 ※2 電源を必要としない通信技術「nfc」を採用しています。

Pamをワイヤレス化したい方へ!

Pam ワイヤレスキット new

医院価格 90,000円



製品仕様	Bluetooth仕様
サイズ W69×D115×H19.5mm	適合規格 Bluetooth Ver3.0 class2
重量 100g (電池含まず)	通信距離 最大10m (障害物があると距離は短くなります)
使用電池 単4乾電池×2本	使用周波数帯域 2.4GHz
連続使用時間 約3時間半 (電池の性能に影響を受けます)	変調方式 GFSK方式
付属品	ecoモード搭載
単4形充電池付き充電器セット	使用せずに15分放置した場合に、電池の消費を抑えるために省エネモードに切り替わります。

安心の訪問設定サポート

訪問設定サポート（製品設定及び使用方法説明）をご希望の場合、
¥50,000と交通費にて承ります。
ご希望の方は弊社営業部までご連絡ください。

別売品

- Pam ディスヘッド 7mm (100個入)
- Pam ディスヘッド 13mm (100個入)
- Pam ディスヘッド アソート (50個×2種入)

医院価格 各14,000円

製品の詳細は


※仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
※価格は2020年7月現在のものです。消費税は含まれておりません。

本製品に関するお問合せ先
製造販売元
株式会社ナルコーム
本社・工場 〒384-2107 長野県佐久市蓬田1251-239
松戸営業所 〒271-0091 千葉県松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル5F TEL.047-364-7656 FAX.047-364-7657
E-mail info@narcohm.co.jp URL https://www.narcohm.co.jp

Pam

歯周ポケット測定器 パム

歯周検査がPamで変わる!

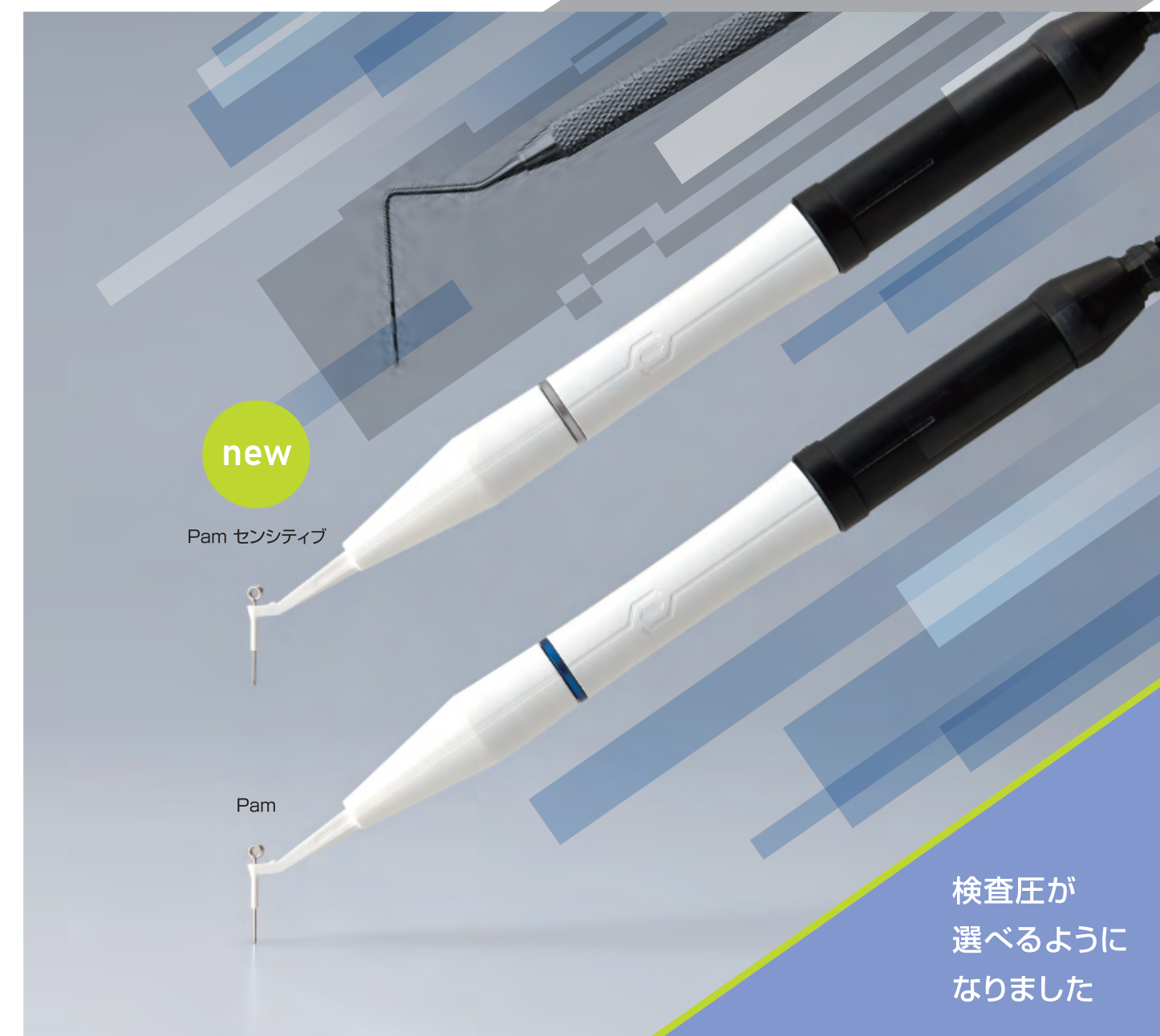

ホームページで
使用方法の
動画公開中



検査圧が
選べるように
なりました

Pamで変わる歯周検査のカタチ

POINT 1

正確に歯周検査ができる!

これまで、正確な歯周ポケット数値の計測は個人の習熟度に頼るところが大きく、検査者によって数値にバラつきがみられました。Pamを歯周ポケットに挿入すると、一定の圧力で計測できるので、正確な検査を行うことができます。

POINT 2

補助なしで一人で歯周検査入力ができる!


Pamで計測した数値を足元のフットスイッチを押すことで入力できます。両手を計測に専念させることができるので、入力のたびに検査機器を持ち替えたり、補助の人を付ける必要もありません。短時間で歯周検査を行え、チェアタイムを短縮することができます。

使用方法

STEP1


適正位置までPamを挿入する

Pamの先端部分に一定以上の圧力がかかると先端の針が引っ込むようになっていきます。適正位置まで挿入し、ポケットの中に入っている針の長さを測ることでポケットの深さを計測します。

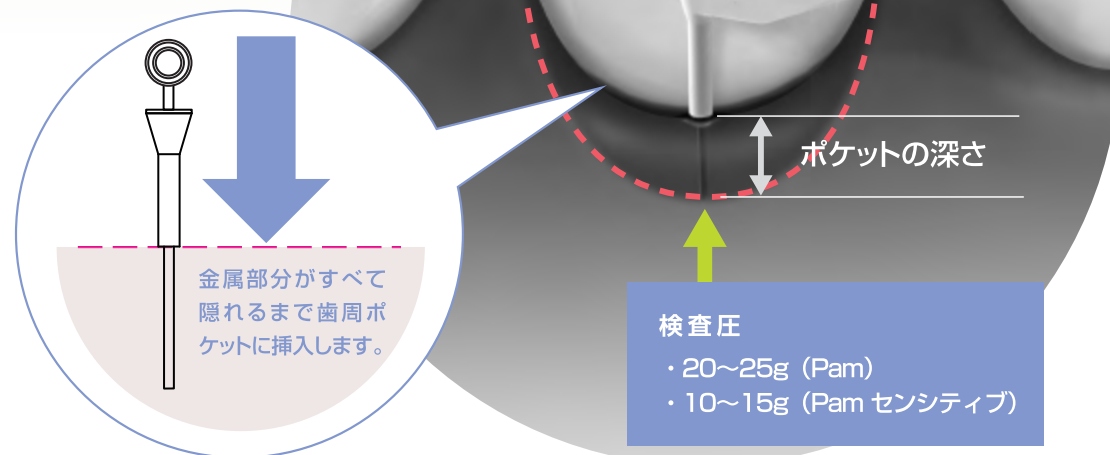

STEP2


フットスイッチを押し確定

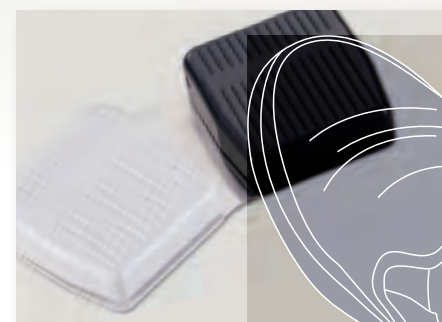

フットスイッチを押して、計測したポケットの数値をアプリケーションに送信します。さらに、ユーザー設定により「出血」や「戻る」「仮入力」などを通常押しと長押しで使い分けることができます。

STEP3

連携したアプリケーションに自動入力

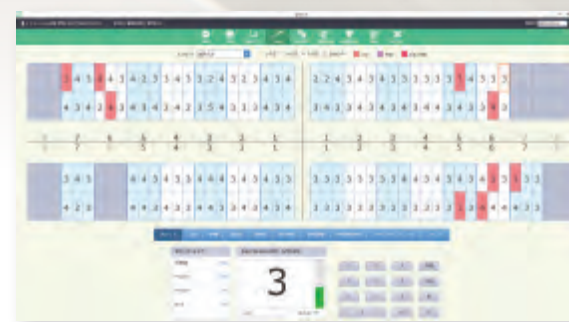


計測されたポケットの数値が付属の「ペリオスタジオ®」に自動的に入力されます。

*「達人プラスVersion6」(別売)と連携させるとさらに便利にご使用頂けます。

STEP4

印刷して活用

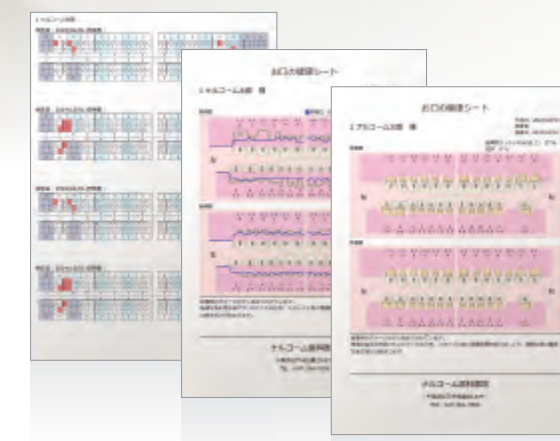


入力した数値はプリントアウトしてカルテに貼付したり、患者説明用として利用できます。

Pam

先端部は衛生的に優れたディスポチップ

先端部は取り外しが可能で、衛生面も考慮されたディスポタイプになっています。また、患者さんの歯周ポケットの深さにあわせて使い分けできる7mmと13mmの2種類の長さをご用意しています。

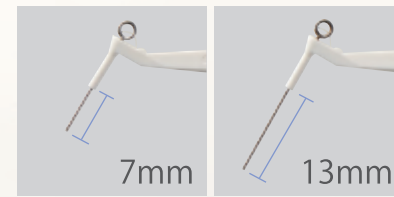

選択可能な2種類の検査圧

- ・ Pam 20g~25g
- new** ・ Pam センシティブ 10g~15g

Pam使用イメージ



補助者がいなくても一人で検査、入力ができます

数値を読み上げてくれるので検査に集中できます

誰でも定圧で検査できるため、数値のバラつきがありません

フットスイッチで検査数値、出血、排膿も入力できます

Pamユーザーボイス

ポケット測定を1人でできる事で時間がかからず、診療の効率が上がっているように思います。

手書きよりもスピードが早いことと、ビジュアル的な印刷物がすぐに作成できる所です。

測定時の挿入圧が一定なので、正確な検査結果が得られるようになりました。

測定者による数値のバラつきがなくなるので全員で使用しています。

手用プローブによる測定・記録の弱点が改善できると思いました。

とくしげ歯科様