

RANGE OF MOTION
400-800mm

SINCE 2019

KL 【竜骨 (りゅうこつ、英: keel)】

竜骨とは、船舶の構造材のひとつで、船首から船尾にかけて船底中央を縦に通すように配置されている一本の強度部材である。SERiO KLはチェアを支える独自構造の一本の竜骨(KL)により、最高位800mmの単独チルト機能の搭載を実現した。

SERiO KL

セリオ・キール

変わりゆく診療に、変わらない思いやりを

KL

設計したのは
思いやりです。

性別、年齢、体型、症状の違う患者さん。

そして時代と共に変わりゆく診療スタイル。

SERiO KLはあらゆる患者さんの

あらゆる診療に対応できる可動性を求めて、

一本の柱を設計しました。

診療の開始から終わりまで、患者さんはもちろん


ドクターにとっても変わらない思いやりを届けます。



あらゆる患者さんのあらゆる診療に対応する可動性。

患者さんにとってもドクターにとっても、やさしく快適なポジショニングを実現します。

01 最低位400mm
最高位800mm

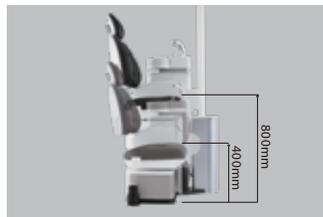

チェアに合わせてスピットン部も昇降するため、うがい時にチェアの高さを戻す手間がありません。立位でも自然な姿勢で診療可能です。

02 やさしくスタート&ストップ
ショックレスチェア



チェアを動かす際の振動や音を大幅に軽減。診療開始の緊張感を与えることなく、穏やかな時間を演出します。

03 ポジションがずれにくい
エルゴアクシズ機構



人間の関節とチェアの関節を同じ位置に設定。チェアを寝かせても背中や頭がずれにくくなりました。

04 楽な姿勢で受診できる
単独チルティング機能



チェア全体が最大20度傾斜し、背中とお腹の負担を軽減。楽な姿勢で診療を受けられます。

05 頸椎保持型
2軸ヘッドレスト



2軸可動式により、患者さんに合わせた頭部の角度調整が可能に。頸椎を支え、開口しやすいポジションを得ることができます。

06 乗り降りしやすい
インナーレッグレスト



乗るときはチェアに深く腰掛けられ、降りるときは、子供から高齢の方でも立ち上がりやすい、インナーレッグレスト。

07 患者さんの快適さを追求した
ノーズニーポジション

診療時の姿勢は、患者さんの快適さを左右するもっとも重要なポイントです。SERiO KLは、人がもっとも楽な姿勢を取れる「ノーズニーポジション」を採用。鼻と膝を結ぶ線が水平になる位置に自然に導きます。

NOSE

KNEE



SERiO KL
2-axis
arm type

FOR DOCTOR



Assistant Equipment Hanger
ユニット・アシスタントエリア可動域

Instrument hanger
インスツルメントハンガー可動域
2軸アーム方式


診療をもっとスムーズに、スマートに。

ユニット・アシスタントエリアとインスツルメントハンガーをどちらも2軸アーム方式にすることで、
効率的な診療ポジションへのスムーズな移動が可能に。また、2ハンド診療、4ハンド診療どちらの診療ポジションにもストレスなく対応します。

大きく使いやすくなった液晶パネルに、便利な前面コントロール。
より感覚的に操作でき、効率的な診療を行えます。

01 大きく使いやすい
4.3inch 液晶パネル


大きくなったLCDパネルに、チェアの状態や
インスツルメントの回転数、注水状態などを
明快に表示。慌ただしい診療中でも、一目で
確認できるようになりました。

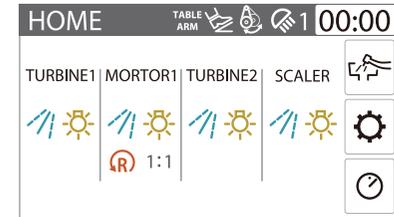

02 エンドモード40is-LUXを標準搭載。
回転数制御、トルク値制御、オートリバース機能が搭載されています。

専用モータを使用せずに根管治療が行えます。

40is-LUX
ブラシレス光付ワイドレンジマイクロモーター
回転数：100~40,000rpm

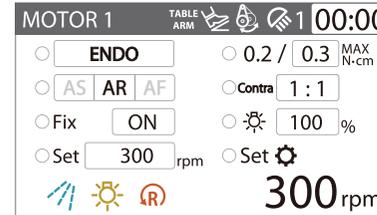

販売名：40is-LUX モーター 一般的名称：歯科用電気回転駆動装置
認証番号：227A0B200008Z00（管理 特管）
選任製造販売業者：AJMD 株式会社 東京都中央区東日本橋2丁目4番5号黄光ビルディング

03 押しやすい
スイッチパネル

ボタンは用途別に色分けして間隔を広く
設計。診療中の押し間違いを防ぎます。



04 便利な
前面コントロール

タービン、マイクロモーターのエア一量・水量
などを手元で調整できます。



Keep clean!!


診療がはかどる、 お手入れが行き届く。

機能性に優れたアシスタントハンガーを標準搭載。
可動域が広くドクターの診療をサポートします。
また、汚れやすい各パーツは簡単取り外しが可能。
アシスタントエリアの日々の清掃に配慮しました。

患者さんにとって歯科医院が清潔であることは何より大切です。
清掃する負担ができるだけ少なくなるよう、お手入れのしやすさにもこだわりました。

01 自動回転式
スピットン

スピットンが患者さんの正面まで最大 90°回転し、楽な姿勢でのうがいが可能です。

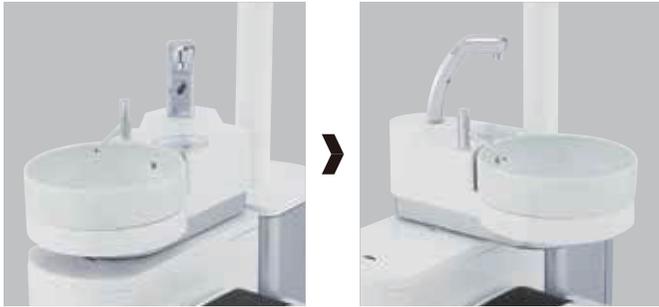

02 取り外して清掃できる
スピットン

スピットンを持ち上げるだけで簡単に取り外しができます。



03 除菌水フィルター(ユニポア)
/エア-除菌フィルター

除菌水フィルターの汚れ状況を一目で確認することができます。



04 お手入れしやすい
排水トラップ

見やすい位置にあるので毎日の清掃が楽にできます。



05 2ハンド・4ハンド対応
アシスタントハンガー

アシスタントインスツルメントは並べ替え可能です。診療スタイルに応じてお選びいただけます。




06 取り外して滅菌できる
インスツルメントホルダー


ホルダーは簡単に取り外しができ滅菌処理が可能です。



07 オート
フラッシング機能

口腔内に入るすべてのインスツルメント類とコップ給水の滞留水を自動サイクルで排出します。簡単な操作で、水回路をクリーンに保ちます。

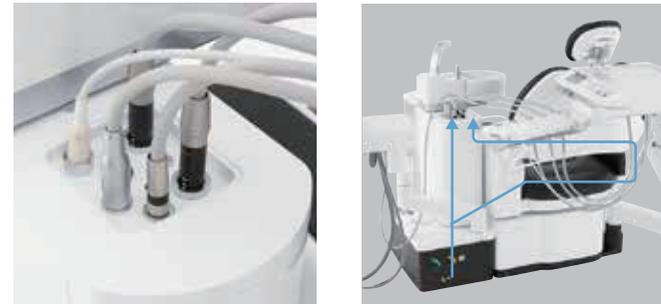

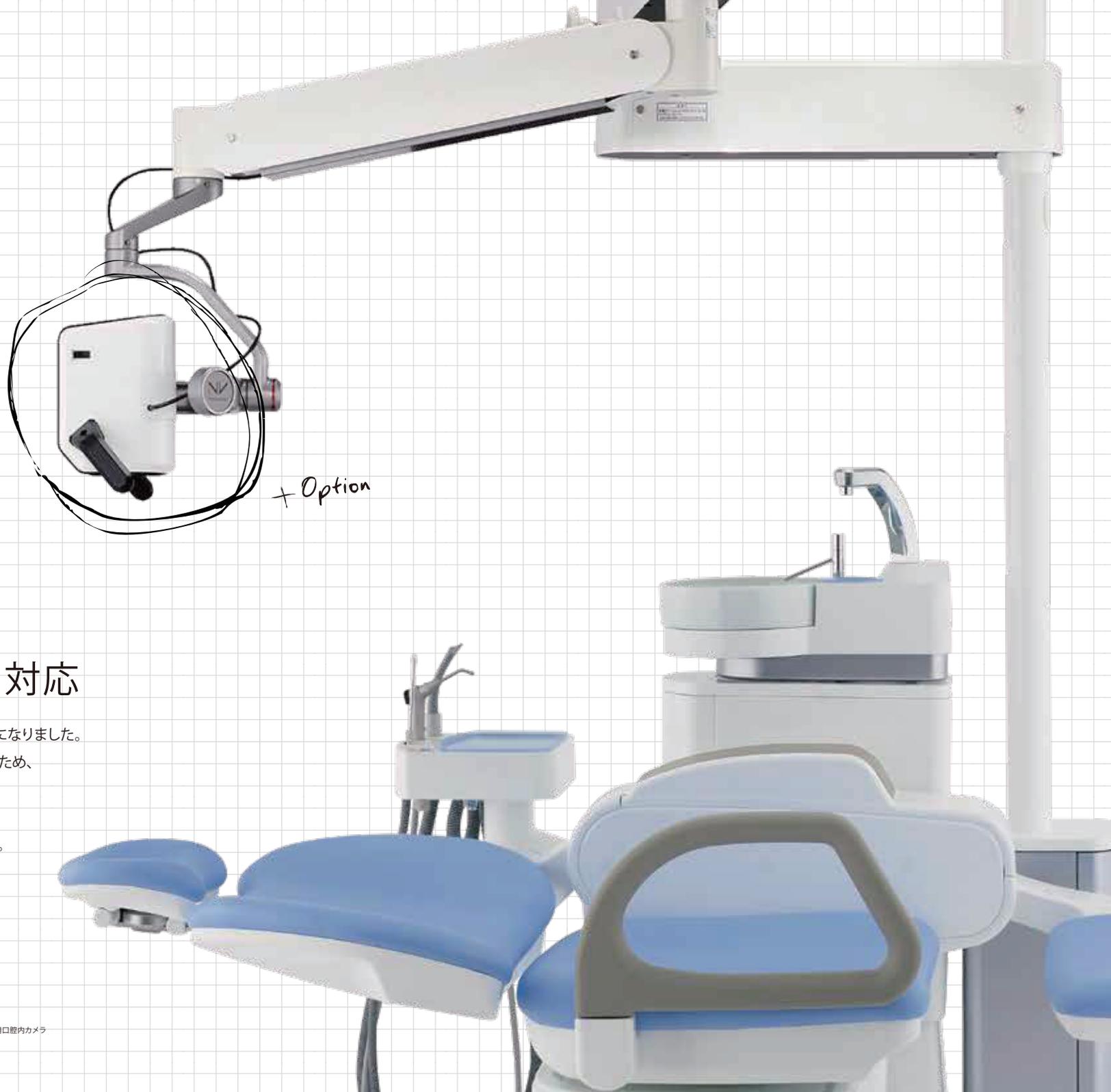

ネクストビジョン ユニットマウント対応

ネクストビジョンのユニットマウントが可能になりました。
ユニット部とライトポール部が分離しているため、
チェアの振動を感じさせず、
エンド治療や CAD/CAM 形成、外科治療等
さまざまな精密診療でご活用いただけます。

Unit Variation

チェア：一体成形シート
カラー：ウォータースタール

販売名：ネクストビジョン
一般的名称：可搬型手術用顕微鏡・手術用顕微鏡・架台式手術用顕微鏡・歯科用口腔内カメラ
届出番号：1381X0013300079(一般 特管 設置)
製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6

+Option

マイクロスコープ装備

Precision SM620



マイクロスコープ・プレジジョン SM620 シリーズの
ユニットマウントにも対応しています。

販売名：プレジジョン SM620
一般的名称：手術用顕微鏡 可搬型手術用顕微鏡
届出番号：27B1X00147000018（一般 特管 設置）
製造販売元：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4 丁目 13 番 206



3軸タイプ LED无影灯（標準）
Lライト (Hi)



口腔内を自然な明るさで照らす 3 軸
タイプの LED 无影灯。診療中の口腔
内状況、例えば出血時でも治療部位
が判別しづらくなるよう設計されて
います。

販売名：Lライト 一般的名称：汎用歯科用照明器
届出番号：08B2X00001000012（一般）
製造販売元：吉田精工株式会社 茨城県行方市八木時 660

+Option

LED无影灯 ルキオン12・
ルキオン24



前面にミラーパネルを採用したこと
により、患者さんに直接的な説明をす
ることができます。顔全体が映るので
歯の色あわせや確認が容易です。

LED无影灯ルキオンCR



コンポジットレジンを充填する際、無
影灯によるレジン硬化を低減する
モードを搭載しました。ワンタッチで
切り替えができるので、診療の効率化
に貢献します。

販売名：ルキオン 一般的名称：汎用歯科用照明器
届出番号：08B2X00001000006（一般）
製造販売元：吉田精工株式会社 茨城県行方市八木時 660

SERiO KL
Fukkafuka
seat

このやすらぎは信頼に変わる。

シートの形状から素材、質感まで様々な試行錯誤を行い開発した
「Fukka-fuka シート」が標準搭載に。
患者さんひとりひとりが最良の診療を受けていただくための「贅沢なやすらぎ」
全ては診療に信頼を感じていただくための品質です。

Comfortability 😊

FOR PATIENT



Unit Variation

Fukka-fuka シートチェア | [1型] ベースマウント

標準



一体成形シート | [1型] ベースマウント

オプション



Seat Color

Fukka-fuka シートチェア



- リッチブラック
- ショコラブラウン
- パニラホワイト
- ターコイズブルー



- フレンチベージュ
- L-2543
- L-8146
- L-2532



- L-2533
- L-2538
- プルゴージュレッド
- グランブルー



- プリティッシュグリーン
- L-8149

一体成形シート



- ウォーターブルー
- ピーチピンク
- サマーイエロー
- アップルグリーン
- スノーホワイト



- ダークブルー
- ブラック
- ボルドーメタリック
- グリーンメタリック
- ブラックメタリック

Panel Color

パネルカラー



- ホワイト(標準)



- シルバーメタリック



- ボルドーメタリック



- ブラックメタリック



- ブルーメタリック

Option

セリオキール オプション



- (ショートタイプ)
5倍速光付ハンドピース
● YW SV200MLXS

販売名: YWハンドピース
一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
認証番号: 219AKBZX00160000 (管理 特管)
製造販売元: 株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋 1-3-6



- 超音波スケーラー
● プチピエゾII (光付、光無し)

販売名: プチピエゾ
一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器
認証番号: 220ACBZX00050000 (管理 特管)
製造販売元: 株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋 1-3-6



- エアースケーラー
● サリー

販売名: サリー
一般的名称: 歯科用エアースケーラー
認証番号: 21400BZZ00149000 (管理 特管)
製造販売元: 株式会社ミクロン 東京都大田区池上 2-17-7



- 5倍速光付ハンドピース
● W SV200MLX

販売名: YWハンドピース
一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
認証番号: 219AKBZX00160000 (管理 特管)
製造販売元: 株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋 1-3-6



- 超音波スケーラー
● ピエゾ SII

販売名: ピエゾ SII
一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器
認証番号: 227AKBZX00076000 (管理 特管)
製造販売元: 株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋 1-3-6



- クイック・エアースケーラー・根管拡大・洗浄装置
● ルーティアー 560-YL-Neo

販売名: ルーティアー 560
一般的名称: 歯科用エアースケーラー
認証番号: 20700BZZ00045000 (管理 特管)
製造販売元: 株式会社ミクロン 東京都大田区池上 2-17-7



- (ショートタイプ)
等速速光付ハンドピース
● YW SV40MLXS

販売名: YWハンドピース
一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
認証番号: 219AKBZX00160000 (管理 特管)
製造販売元: 株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋 1-3-6



- 超音波スケーラー
● ニュートロン (光付、光無し)

販売名: ニュートロンモジュールキット
一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器
認証番号: 224ALBZX00038000 (管理 特管)
製造販売元: 白水貿易株式会社 大阪府大阪市淀川区新高 1-1-1



- PMTC サブソニックブラシシステム
● ユリー

販売名: ユリー
一般的名称: 歯科用エアースケーラー
認証番号: 226AKBZX00111000 (管理 特管)
製造販売元: 株式会社ミクロン 東京都大田区池上 2-17-7



- クールシート



- Dr 側アームレスト



- 縦型ハンガー



- 小物置き & ティッシュボックス



- 930 型フットコントローラー



- ボセイドン (ウォーターライン除菌装置)

- ユニバーサルヘッドレスト

- エア固定ヘッドレスト

- テーブルカラートレー(クリア・ブルー)

- メンテナンスフリーセパレーター

- Dr 側アームレスト(一体成形シート)

- シャーカستن

- ガスバーナー

- エアワンタッチジョイント

- モーターバキューム配線

Specification

セリオキール仕様

- チェアタイプ 前折れ
- Fukka-fuka シート
- テーブルアーム 1 型 ベースマウント
3 型 カート
- タービン ルナサス 1s : 1 本
- マイクモーター 40is-LUX : 1 本
- ハンドピース エクスパートマティック E20L : 1 本
エクスパートマティック E10C : 1 本

- シリンジ 905 シリンジ : 2 本

- テーブル部

TFT 液晶 4.3 インチモニター

シリコンシート

横型ハンガー

- 回転スピット自動

- コップ給水 水量 超音波式

- インストゥルメントホルダー内蔵式

オートフラッシング機能

- 無影灯

L ライト(Hi)

センサースイッチ

オートライト

照度メモリ付(2 メモリ)

無段階調光

- フットコントローラー

S 型(チェア SW なし)

横スライド式 S 型(チェア SW なし)

- 除菌水フィルター ユニボア

- エア除菌フィルタ

SERIO KL

SERiO | KL

- 販売名：U22ユニット
 - 一般的名称：歯科用ユニット
 - 認証番号：301AKBZX00061000（管理 特管 設置）
- セラオキールの販売名はU22ユニットです。

発売元：



〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL. 0800-170-5541（コンタクトセンター）
<http://www.yoshida-dental.co.jp>

製造販売元：吉田精工株式会社 茨城県行方市八木蒔 660

