

YOSHIDA

YOSHIDA
CAD / CAM
SYSTEM



豊富なラインナップから最適なシステムをあなたに



C02286/2026年8月/ @150/改

SCAN



CAD
Design




CAM
Software



MILL






YOSHIDA

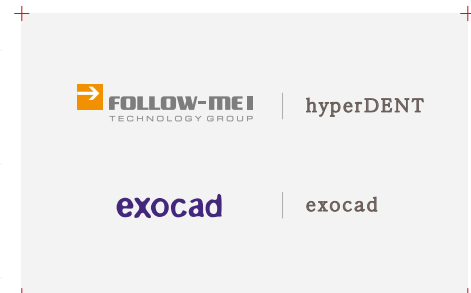

株式会社ヨシダは、世界の製品から選び抜いた
CAD / CAM 機器・材料をそろえています。
優れた製品の中から、あなたに合ったものを
提供いたします。

YOSHIDA

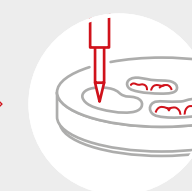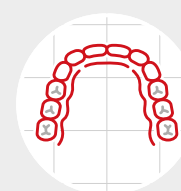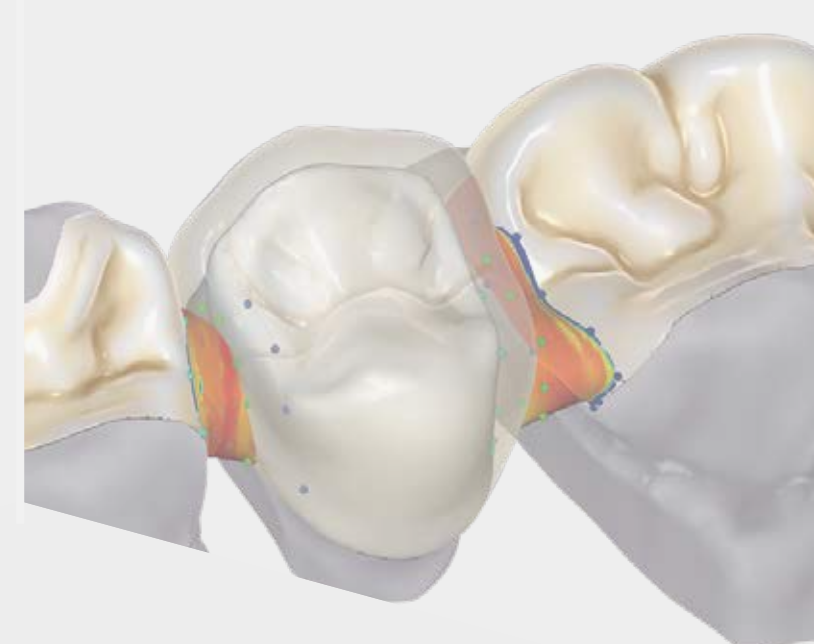

SCAN | P3

CAD
Design | P9

CAM
Software | P11



MILL | P13

> Coex T+ シリーズ
Coex T3+
Coex T5+
Coex T7+

> exocad

> hyperDent

> Coex 300 Pro

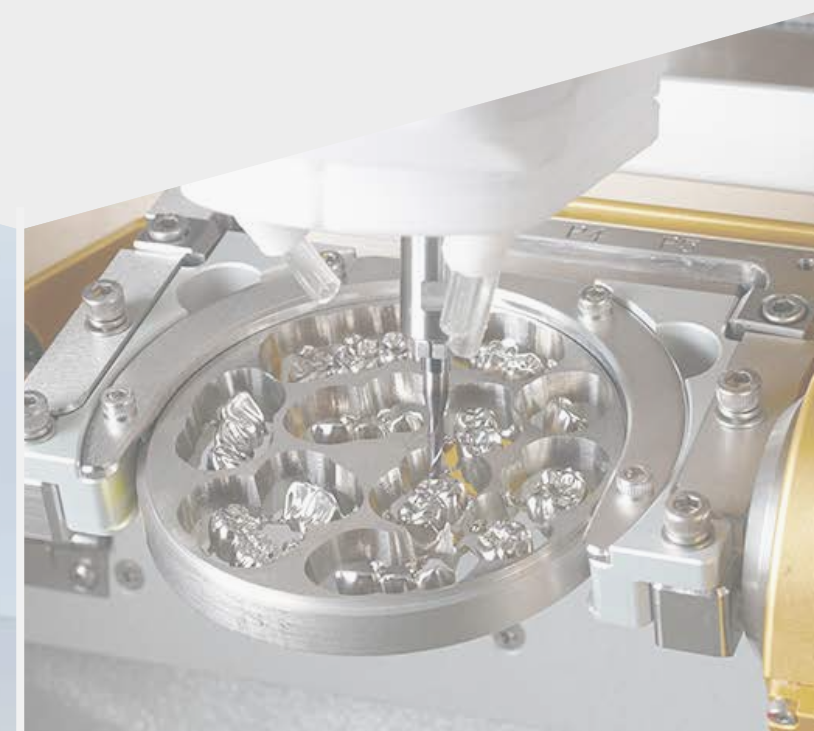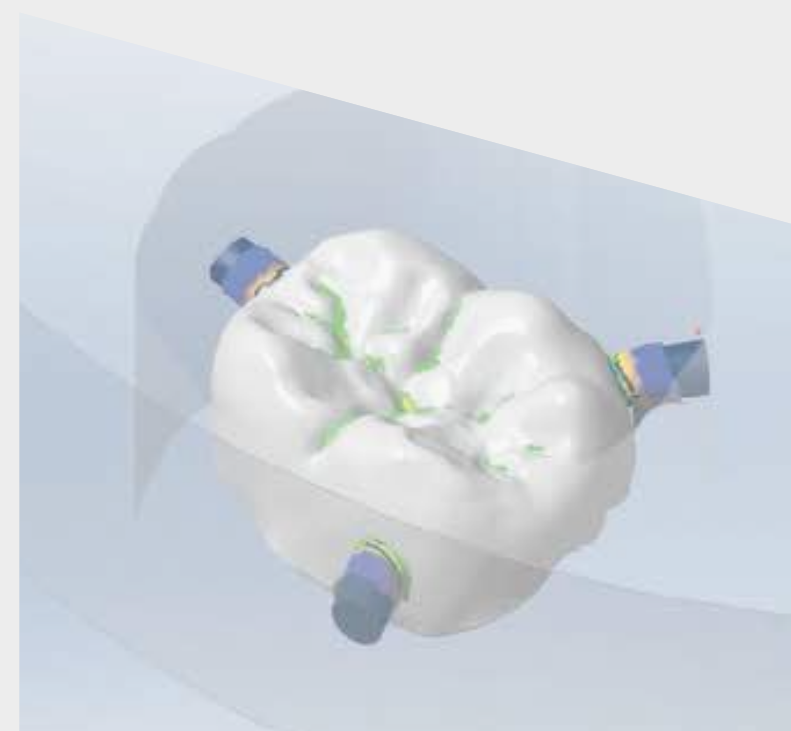

デンタルスキャナー

Coex T+ シリーズ

フルアーチ
スキャン
最短 8 秒



高速・高精度で快適なスキャナーを

スピード、精度、操作性、機能性、あらゆる点に優れたスキャナーです。
洗練された T+ シリーズのスキャナーは、白を基調にしたデザインで
よりスタイリッシュな設計になっています。



Coex T3+



Coex T5+



Coex T7+


なぜ Coex T+シリーズが選ばれるのか

それはすごく単純なことです。

高速スキャン

フルアーチをわずか 8 秒でスキャンします (T7+)。
スキャンスピードが非常に速いため、短時間でスキャンが完了し、作業時間が短縮されます。

フルアーチスキャン ▶ **8 秒**
Coex T7+

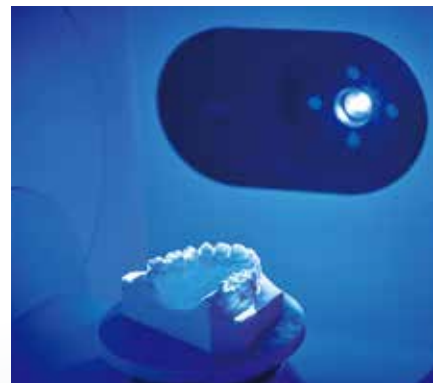

高精度

スキャンが難しい部分も細部まで精密に再現することで、適合性の向上に繋がります。デザイン時にマージンの設定が容易になります。

高精度スキャン ▶ **4 μ m**
Coex T7+



Coex T7+



Coex T5+



Coex T3+

高解像度カメラ

500 万画素の高解像度カメラを 4 つ搭載しています。
スキャンエリアが広くなり、またスキャンもれも少ないデータ取得が可能です。

高解像度カメラ ▶ **5.0MP × 4**
Coex T7+



オートエレベーション

スキャンアームに上下ムーブメントを搭載しているため、自動で高さ調節を行います。
手動で調整する手間が省け、スキャンの準備時間が短くなります。

咬合器スキャン

Coex T7+
Coex T5+

模型をマウントした咬合器をそのままスキャナーにセットできます。
各社咬合器に対応する専用ジグがあります。

アーティキュレーター
プレート
¥94,100



MEDIT口腔内スキャナー i900との連動

Coex T7+
Coex T5+
Coex T3+

T+ スキャナーでスキャンした後に、MEDIT 製の口腔内
スキャナーで追加スキャンを行うことができるため、
必要なスキャンデータを取得できます。



印象スキャン

Coex T7+


あらゆる角度から細部まで印象体をスキャンできます。
上下顎印象体のスキャンも一度で完了します。



レプリカデンチャースキャン

Coex T7+

義歯をスキャンし、レプリカデンチャーの作製に役立て
ることができます。

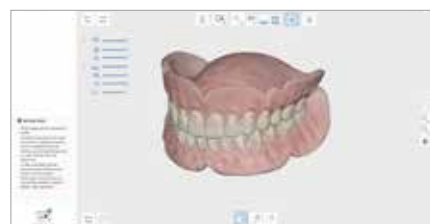

隣接間スキャン

Coex T7+

模型を斜めや縦に配置してスキャンすることで、アン
ダーカット部分や歯間、頬舌のスキャン漏れを防ぎます。



オプション品



フレキシブルマルチダイ
¥150,000



シングルダイ (16個)
¥18,900



KASジグ
¥94,100



AMジグ
¥94,100



スクリュージグ
¥56,400



自分に合った1台がここにある

Coex T+シリーズの3ラインナップ

オプションを追加してカスタマイズすることも可能です。
ぜひ最適なスキャナーをご使用ください


本体機能	Coex T3+	Coex T5+	Coex T7+
フルアーチスキャン時間（ベース&対合）	18 秒	12 秒	8 秒
精度	9 μm	7 μm	4 μm
カメラ	5.0MP×2	5.0MP×2	5.0MP×4
オートエレベーション	○	○	○
カラーテクスチャー	○	○	○
咬合器スキャン	オプション	○	○
印象スキャン	—	—	○
レプリカデンチャー	オプション	オプション	○
フレキシブルスキャン	オプション	○	○
標準価格	¥980,000	¥1,680,000	¥2,580,000

オプション

KAS ジグ	オプション	○	○
AM ジグ	オプション	オプション	オプション
アーティキュレータープレート	オプション	○	○
印象ジグ	—	—	○
スクリュージグ	オプション	オプション	○


exocad

多彩なデジタル技工を可能にする
初心者にもわかりやすいデザインソフトウェア

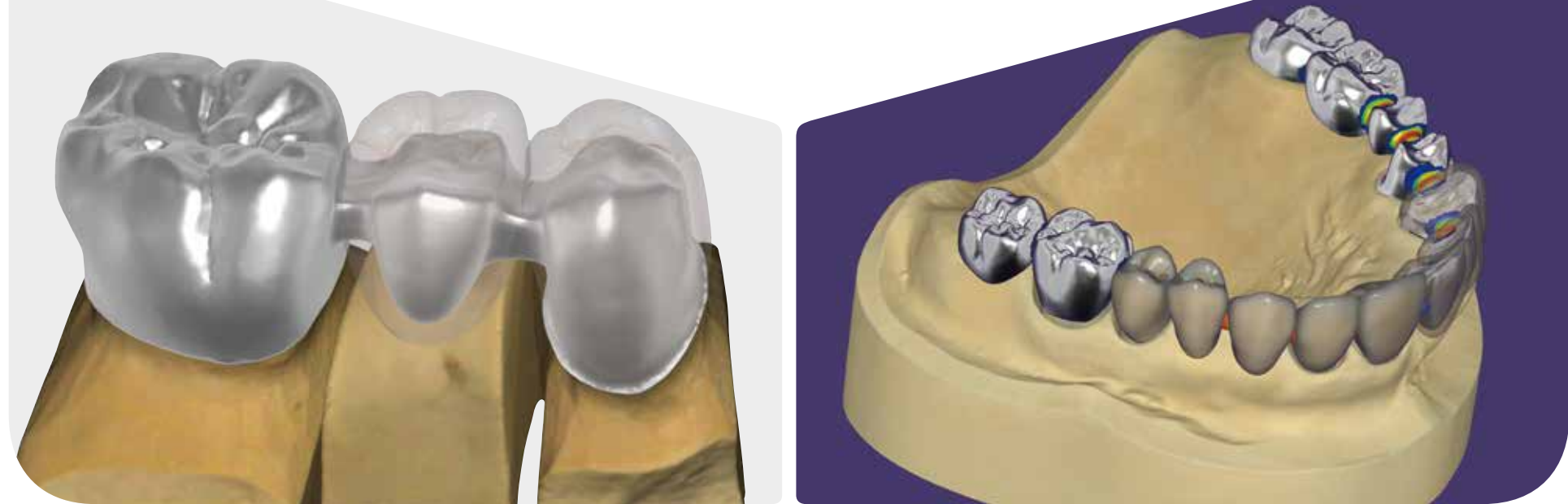

直感的な操作で簡単にデザインできます。
細かい設定や調整ができ、
形態や内面のデザイン時に役立ちます。

ベーシックモジュール コアバージョンに含まれている幅広い適用範囲と機能

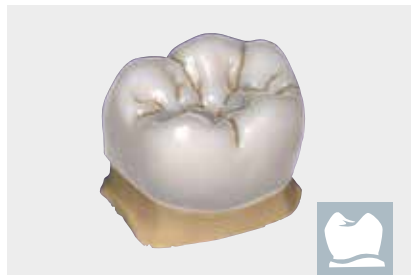

フルクラウン

様々な歯牙ライブラリーから形状を選択し
短時間で機能的なクラウンを
設計できます。



インレー／アンレー

自然な形態のインレー／アンレーを
設計できます。



ベニア

ミラー機能を使用して審美的に優れた
ベニアを設計できます。




カットバック／ オフセットコーピング

再現した歯冠形態からカットバックする
ことで最適なコーピングを設計できます。



ブリッジ

クラウン、インレー／アンレー、コーピング、
ポンティックなどを組み合わせて
ブリッジを設計できます。

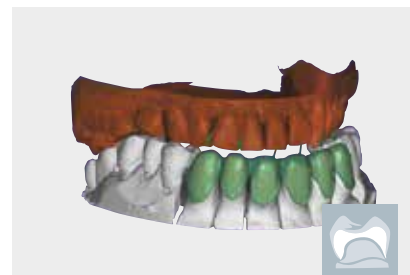

ワックスアップ

ワックスパターンをスキャンすることで
容易に再現・設計することができます。

オプションモジュール 多数のアドオンモジュールによるオプションやサービスの強化




■ バーチャルアーティキュレーター

バーチャル咬合器にスキャンモデル
をマウントし顎運動をシミュレーショ
ンできます。



■ インプラントモジュール

カスタムアパットメント、スクリュー固
定のインプラントなどを設計できま
す。

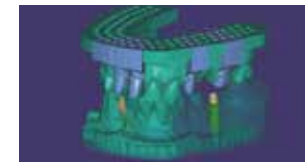

■ モデルクリエイター

口腔内スキャンデータから
3Dプリントモデルを設計できます。



■ プロビジョナル

術前スキャンモデルからテンポラリー
クラウンを設計できます。



■ パーシャルデンチャー

パーシャルデンチャーの
設計ができます。



■ スマイルクリエイター

患者様の写真に合わせて前歯部の位
置を決めます。
※トゥルスマイルが必要となります。




■ バイトスプリント

ナイトガード、トレーを
設計できます。




■ DICOM ビュアー

設計中にCTデータを
視覚化できます。

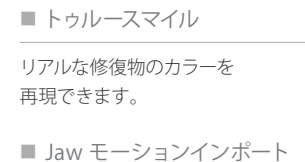


■ ツールズマイル

リアルな修復物のカラーを
再現できます。

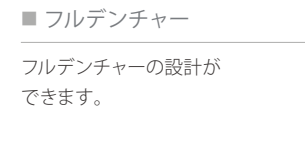


■ フルデンチャー

フルデンチャーの設計が
できます。

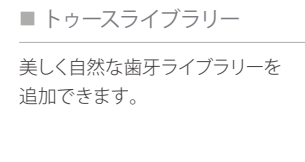

■ トゥースライブラリー

美しく自然な歯牙ライブラリーを
追加できます。

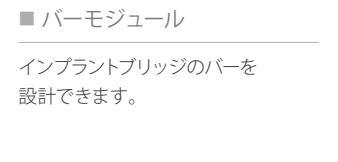

■ バーモジュール

インプラントブリッジのバーを
設計できます。



※exocad DXは永久ライセンスです。アップグレード契約の更新は任意ですが、未更新の場合は最新版へのアップデート、オプションモジュール追加、インプラント・フルデンチャーライブラリーの追加・更新、ドングル交換サービスをご利用いただけません。また、契約再開時には別途リフレッシュ費用およびアップグレード費用が発生します。
※ドングル故障時に交換サービスを受けるため、アップグレード契約の継続を推奨します。

hyperDENT Compact NEW

対応機種

Coex 300 Pro

hyperDENT Compactの機能を備え、さらに見やすいインターフェース・アイコンへ刷新。
よりシームレスな操作工程で加工パスの計算が可能になりました。

分かりやすいアイコン表示

hyperDENT Compact に比べ各工程における操作・機能がアイコン表示になり、操作手順がより明瞭になりました。



パーツ情報の自動読み込み

計算したことのあるデータの場合、自動的に以前の設定情報を読み込みます。




材料マテリアルのグラデーション表示

グラデーション表示機能によりマルチレイヤー素材を使用する際にグラデーションを考慮したパーツ配置がしやすくなります。




C型クランプ対応の加工パス作成

C型クランプを活かした加工パスの設定が可能です。ディスク水平方向に近い角度からモデルを加工することでアンダーカット領域にもアクセスできます。

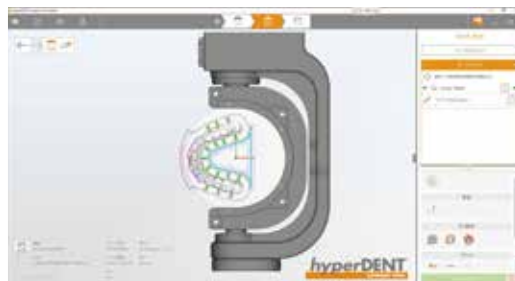

DENTA NOVA

優れた審美性と耐久性を兼ね備えたCAD/CAM用レジンブロック。
保険算定区分に対応し、症例に応じたレジン選択が可能です。

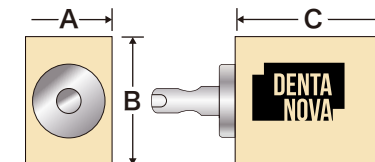

DentaNova ブロックⅠ（５個入）

色 調

| HT A1,A2,A3 LT A1,A2,A3,A3.5

サイズ(A×B×C) (単位mm)

- 12 (10×12×15) ￥10,000
- 14L (14.5×14.5×18) ￥11,000

※小臼歯CAD/CAM冠保険算定（Ⅰ）



DentaNova ブロックⅡ（５個入）

色 調

| HT A1,A2,A3 LT A1,A2,A3,A3.5

サイズ(A×B×C) (単位mm)

- 1n8 (8×14.5×18) ￥ 9,500
- 12 (10×12×15) ￥10,000
- 14L (14.5×14.5×18) ￥12,000

※小臼歯CAD/CAM冠保険算定（Ⅱ）



DentaNova ブロックⅢ（５個入）

色 調

| HT A1,A2,A3 LT A1,A2,A3,A3.5

サイズ(A×B×C) (単位mm)

- 1n8 (8×14.5×18) ￥15,500
- 12 (10×12×15) ￥19,000
- 14L (14.5×14.5×18) ￥19,000

※大臼歯CAD/CAM冠保険算定（Ⅲ）



DentaNova ブロックⅣ（５個入）

色 調

| 3 層 (切縁部：エナメル色- 中間色- 歯頸部：デンティン色)

サイズ(A×B×C) (単位mm)

- 12 (10×12×15) ￥20,000
- 14L (14.5×14.5×18) ￥20,000

※前歯部CAD/CAM冠保険算定（Ⅳ）



ミリングマシン

Coex 300 Pro

世界80カ国、
販売実績
4,000台以上を誇る
コエックス シリーズ



省スペース設計のエントリーモデル

時代とともに普及の一途を辿る歯科用 CAD / CAM ミリングマシン。

Coex300Proは、まずはレジンブロックやジルコニアといったオーソドックスな材料から始めたい方へおおすすめのエントリーモデルです。




Coex 300 Pro

幅広い症例・設置環境に対応

一台完結型の 高機能モデル

電磁チャック採用のイエガー社製スピンドル搭載により少量のエア供給でマシン稼働が可能になりました。それにより小型のエアコンプレッサー（BLDC ポンプ）を内蔵がすることが可能になりました。すべてが一体となっているため、エアコンプレッサーの設置やエア配管の工事が不要になります。

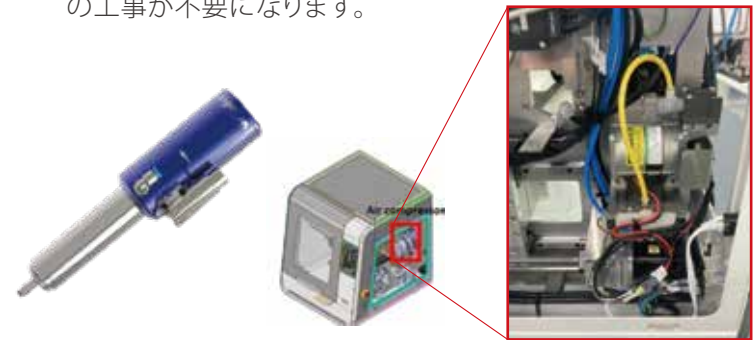

デンタルミリングマシン

Coex 300 Pro

院内技工や歯科技工所の要望へ対応する
2つのオールインワンモデル

加工精度
同時5軸加工
高精度 ±5μm

加工方式



湿式
乾式



湿式乾式両用。幅広い症例に対応する オールインワンモデル。

5軸かつ 500W 最大回転数 80,000 rpm のスピンドルを搭載し、ジルコニアからセラミックブロックまで安定した切削が可能です。きめ細やかな咬合面形態や高いマージン／内面フィット性にて適合のよい補綴物を作成できます。



タッチパネル式UI搭載によるわかりやすい操作

制御 PC 内蔵、タッチパネル式ユーザーインターフェースで直感的に操作ができます。オートキャリブレーション機能により、機械の加工精度をベストな状態に保つことができます。加工状態・位置情報をユーザーインターフェースで正確に確認でき、コエックスミリングマシンの強みである高精度なミリングを最大限に発揮することができます。



外部周辺機器を コンパクトに収納

集塵機・クーラントタンク等の外部周辺機器を専用テーブルへ収納可能なオールインワンモデル。

※サイレントコンパクト CAM 集塵機は別途購入が必要です。



清掃性に優れ、メンテナンスのしやすさを 考慮したデザイン

モールド素材で加工された庫内は、滑らかで粉塵を拭きとりやすい設計になっています。湿式・乾式両用だからこそ、メンテナンスのしやすさを考慮したユーザビリティの高い機構です。

Coex 300 Pro

	レジンブロック	セラミックブロック	ジルコニアディスク	PMMA・WAX ディスク
クラウン	○	○	○	○
インレー・アンレー	○	○	○	○
ブリッジ	×	×	○	○
穴あきクラウン	×	×	○	○

■ アクセサリー・消耗品

ミリングマシン関連

C3PCADブロック カートリッジ (COM等) ¥39,600	C3PCタイプディスク カートリッジ (COM等) ¥37,800	コエックス400 ブロック用カートリッジ ¥36,700	C45ブロック カートリッジ (COM等) ¥30,600	コエックス450 ディスクカートリッジ ¥35,300	コエックス クーラントオイル 2 L ¥5,100
C3P/40/45/30/20/15 切削油タンクフィルター ¥900	IT CAD/CAM プレパレーションバー ¥6,400 ~ ¥7,200	C3P/40/30スピンドル ダストコレクターフード ¥4,300 コエックス450 スピンドルカバー ¥5,700	C3P/15コレット Φ45.1P-5°-VA ¥62,290 C45コレット Φ62.000.4334 ¥99,400	C3P/40/30/3D ツールポケット04-30M0 ¥4,300	コエックス300・400 ウォーターポンプ60Hz/50Hz ¥15,600

ディスク・その他機材

ジビーノ ジルコニアディスク

色 調

ブリーチ (無色), ライト (A1-A2相当),
ミディアム (A2-A3相当)



サイズ

- | | | | |
|--------------|---------|--------------|---------|
| ● φ98mm×12mm | ¥40,000 | ● φ98mm×14mm | ¥46,000 |
| ● φ98mm×18mm | ¥51,000 | ● φ98mm×25mm | ¥56,000 |
| ● φ98mm×30mm | ¥63,000 | | |

ARUM ジルコニアディスク

ARENA Star

色 調

A1, A2, A3

サイズ

【Pre shade】

- | | | | |
|--------------|---------|--------------|---------|
| ● φ98mm×10mm | ¥13,100 | ● φ98mm×14mm | ¥18,300 |
| ● φ98mm×18mm | ¥23,800 | ● φ98mm×20mm | ¥26,500 |
| ● φ98mm×25mm | ¥33,000 | ● φ98mm×30mm | ¥39,800 |

【Multi】

- | | | | |
|--------------|---------|--------------|---------|
| ● φ98mm×14mm | ¥22,800 | ● φ98mm×18mm | ¥29,200 |
| ● φ98mm×20mm | ¥32,400 | ● φ98mm×25mm | ¥40,400 |



ARUM チタンディスク

サイズ

- | | | | |
|--------------|---------|--------------|---------|
| ● φ98mm×10mm | ¥14,400 | ● φ98mm×12mm | ¥15,500 |
| ● φ98mm×14mm | ¥16,900 | ● φ98mm×16mm | ¥18,300 |
| ● φ98mm×18mm | ¥19,500 | ● φ98mm×20mm | ¥20,800 |
| ● φ98mm×22mm | ¥25,400 | ● φ98mm×25mm | ¥27,900 |



エターナルグロウ

25g ¥12,000



CAD/CAM支台歯形成用バー

DigitalDentistryPrepSet

種 類

- | | |
|--|-----------|
| ● DigitalDentistryPrepSet18本組 | ¥20,000 |
| ● ガイドグループ形成用
RKD-1, RKD-2, RKD-3 | ¥5,500/5本 |
| ● インレー・アンレー形成用
RKD-4, RKD-4ff, RKD-5, RKD-5ff | ¥5,500/5本 |
| ● クラウン・ブリッジ形成用
RKD-6, RKD-6ff, RKD-7, RKD-7ff, RKD-8, RKD-8ff | ¥5,500/5本 |
| ● ファイニッシング用
RKD-9ff, RKD-10ff, RKD-11ff, RKD-12ff, RKD-13ff | ¥5,500/5本 |



コエックス用

サイレントCAMコンパクト集塵機

¥303,200

コエックス用

サイレントCAMコンパクト連動キット

¥22,000

※コエックスミリングマシンへの設置をお考えの場合は、
必ず上記連動キットをセットでご購入ください。



CXシンタリングファーマス S-600

¥840,000



歯 科 医 院 の「できたらいいな」をかなえる。

actionGATE
SYSTEM



歯科従事者のための会員サービス

G-PLUS®



今すぐ
登録！

G-PLUS に関するお問い合わせ

株式会社ヨシダ g-plus@yoshida-dental.co.jp

- 一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス T3 プラス 届出番号：13B1X00005000243 (一般)
- 一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス T5 プラス 届出番号：13B1X00005000244 (一般)
- 一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス T7 プラス 届出番号：13B1X00005000245 (一般)
- 一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス 300 プロ 届出番号：13B1X00005000248 (一般)
- 一般的名称：歯科技工用ボーセレン焼成炉 販売名：CX シンタリングファーマス 届出番号：13B1X00005000247 (一般)
※CX シンタリングファーマス S-600 の販売名は CXシンタリングファーマスです。
- 一般的名称：歯科非鑄造用チタン合金 販売名：ARUM チタンディスク 認証番号：304ALBZX00025000 (管理)
- 一般的名称：歯科切削加工用セラミックス 販売名：ARUM ジルコニアディスク ARENA Star 認証番号：305ALBZX00018000 (管理)
上記製造販売元：(株) ヨシダ 東京都台東区上野 7-6-9

- 一般的名称：歯科切削加工用レジン材料 販売名：DentaNova ブロックⅠ 認証番号：307AGBZX00056000 (管理)
- 一般的名称：歯科切削加工用レジン材料 販売名：DentaNova ブロックⅡ 認証番号：307AGBZX00036000 (管理)
- 一般的名称：歯科切削加工用レジン材料 販売名：DentaNova ブロックⅢ 認証番号：307AGBZX00071000 (管理)
- 一般的名称：歯科切削加工用レジン材料 販売名：DentaNova ブロックⅣ 認証番号：307AGBZX00057000 (管理)
上記製造販売元：有限会社デンタルテクニカ 大阪府茨木市上中条 1-1-37

- 一般的名称：デジタル印象採得装置 / 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：i900 オーラルスキャナ 承認番号：30800BZI00003000 (管理 特管)
製造販売元：株式会社ダブリューエスエム 石川県金沢市高尾南 2-33-101

- 一般的名称：歯科切削加工用セラミックス 販売名：Zivino- ジビーノ 歯科補綴用ジルコニアディスク for インプラント 認証番号：229AGBZX00044A02 (管理)
製造販売元：Orbray (株) 東京都足立区新田 3-8-22

- 一般的名称：歯科用研磨器材 販売名：エターナルグロウ 届出番号：11B3X00042000048 (一般)
製造販売元：下村石膏 (株) 千葉県船橋市高瀬町 32-1

- 一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 販売名：メリーダイヤ 届出番号：13B3X0025600001 (一般)
※Digital Dentistry Prep Set の販売名はメリーダイヤです。
- 一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 販売名：IT CAD/CAM プレパレーションバー 届出番号：13B3X00256000014 (一般)
上記製造販売元：(株) 日向和田精密製作所 東京都青海市日向和田 3-698

販売元 株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社ヨシダ コンタクトセンター | ☎ 0800-170-1170 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00 (日曜・祝祭日を除く)

※このカタログに記載の価格は標準価格 (税抜) です。

※仕様および外観は製品改良等のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

無断転載禁止