

寒天コンディショナー・練和器

カートリッジ専用ドライコンディショナー DCてきおん君カートリッジ ホワイト

単独プログラムで使い分け可能な2槽構造のドライコンディショナーです。コンパクトサイズなのに1度に20本のカートリッジをボイル・保存できます。10本ずつの2槽に分かれているため片方ではボイル、もう一方では保存をすることが可能です。また、カートリッジがヒーターに直接接触しないエアースペース加熱方式だから、温度のムラがなく、寒天を均一に加熱・保存します。



本体寸法 : W120×D143×H118mm
重量 : 1.2kg
電源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 170W
予約タイマー : 99時間
カートリッジ本数 : 20本



標準価格
¥118,800 5801 396261

てきおん君ホワイト・てきおん君カートリッジホワイト共通

プログラムを選ぶだけの簡単操作。

プログラムNo.	ボイリング時間	設定温度
0 (フリープログラム)	1~60分	※30℃~80℃
1	12分	60℃
2	10分	60℃
3	12分	58℃
4	10分	58℃
5	12分	56℃
6	10分	56℃

※室温が高い場合、30℃近くの設定温度がコントロールできない場合があります。
※てきおん君カートリッジ ホワイトは、2槽別々のプログラム設定はできません。

マイコン・ホットエアードライコンディショナー DCてきおん君 ホワイト

寒天は小さな温度変化にも敏感です。数多くの実験データを基に開発された温度分布の槽形状を実現。専用マイクロコンピュータが7種類のお好み温度をワンタッチ選択、寒天の温度をコントロールします。



・てきおん君カートリッジ用ラック
・収納カートリッジ本数:12本



本体寸法 : W143×D220×H211mm
重量 : 1.8kg
電源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 170W

標準価格
¥120,000 5801 396254

アルギン酸練和器 みきさん3

あらかじめ印象材と水をなじませる必要がなく、クリーミーな練和が可能です。練和方式は簡単練和とクイック練和が選択できます。



本体寸法 : W243×D305×H335mm
重量 : 約25kg
電源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 900VA
練和容量 : 24~110g(1~4カップ)

標準価格
¥325,000 5801 392171

YOSHIDA



DENTAL IMPRESSION MATERIAL CATALOG

連合印象材カタログ

◎販売名:ファインハイドロスティック・紫陽花 シリンジタイプ5/16" 一般の名称:歯科用寒天印象材 認証番号:219AFBZX00084000(管理) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:ファインハイドロスティック・紫陽花 シリンジタイプ3/8" 一般の名称:歯科用寒天印象材 認証番号:219AFBZX00083000(管理) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:ファインハイドロスティック・紫陽花 カートリッジタイプ 一般の名称:歯科用寒天印象材 認証番号:219AFBZX00082000(管理) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:ファインハイドロスティック・紫陽花 詰替用 一般の名称:歯科用寒天印象材 認証番号:219AFBZX00085000(管理) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:ハイドロスティック・ブルーN シリンジタイプ5/16" 一般の名称:歯科用寒天印象材 認証番号:219AFBZX00074000(管理) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:ハイドロスティック・ブルーN シリンジタイプ3/8" 一般の名称:歯科用寒天印象材 認証番号:219AFBZX00073000(管理) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:ハイドロスティック・ブルーN カートリッジタイプ 一般の名称:歯科用寒天印象材 認証番号:219AFBZX00072000(管理) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:ハイドロスティック・ブルーN 詰替用 一般の名称:歯科用寒天印象材 認証番号:219AFBZX00075000(管理) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:ハイドロスティック・リーガルグリーン シリンジタイプ5/16" 一般の名称:歯科用寒天印象材 認証番号:219AFBZX00078000(管理) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:ハイドロスティック・リーガルグリーン シリンジタイプ3/8" 一般の名称:歯科用寒天印象材 認証番号:219AFBZX00077000(管理) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:ハイドロスティック・リーガルグリーン カートリッジタイプ 一般の名称:歯科用寒天印象材 認証番号:219AFBZX00076000(管理) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:ハイドロスティック・リーガルグリーン 詰替用 一般の名称:歯科用寒天印象材 認証番号:219AFBZX00079000(管理) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:ハイドロスティック・レッド シリンジタイプ5/16" 一般の名称:歯科用寒天印象材 認証番号:219AFBZX00081000(管理) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:ハイドロスティック・レッド シリンジタイプ3/8" 一般の名称:歯科用寒天印象材 認証番号:219AFBZX00080000(管理) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:オムニコカートリッジシリンジ 一般の名称:歯科用注入器具 届出番号:12B2X10003000005(一般) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:ハイドロシリンジ5/16" 一般の名称:歯科用注入器具 届出番号:12B2X10003000001(一般) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:ハイドロシリンジ3/8" 一般の名称:歯科用注入器具 届出番号:12B2X10003000002(一般) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:DCクリアシリンジ 一般の名称:歯科印象材用シリンジ 届出番号:13B3X00243000006(一般) 製造販売元:南秋山歯科器具製作所 ◎販売名:デントクラフト・日の丸トレー 一般の名称:歯科印象採得用トレー 届出番号:13B1X00005000017(一般) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:コーパーシャルトレー 一般の名称:歯科印象採得用トレー 届出番号:13B1X00005000036(一般) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:コーン回転トレー#99 一般の名称:歯科印象採得用トレー 届出番号:13B1X00005000033(一般) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:網トレー 一般の名称:歯科印象採得用トレー届出番号:09B2X00010000036(一般) 製造販売元:株式会社オムニコ ◎販売名:てきおん君カートリッジ 一般の名称:歯科材料加熱器 届出番号:14B2X90011000002(一般) 製造販売元:藤栄電気株式会社 ◎販売名:てきおん君 一般の名称:歯科材料加熱器 届出番号:14B2X90011000001(一般) 製造販売元:藤栄電気株式会社 ◎販売名:みきさん3 一般の名称:歯科印象材混こう器 届出番号:26B2X10018000042(一般) 製造販売元:デンケン/ハイデンタル株式会社

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2024年7月現在の税別価格です。

禁無断転載

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

取扱店

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 ± 9:00~17:00
(日曜・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)



(01)02747937015292

C01960/2024年7月/PRI/3/@40/改



紫陽花 流動性を持たせた
高弾カタイプ

細部まで行き渡る優れた流動性と硬化後の強度・高弾性を併せ持ち、更にアルギン酸塩印象材とのより強固な接着性、石膏との相性を考慮に入れたハイグレードな寒天印象材です。

リーガルグリーン 流動性を抑えた
高弾カタイプ

流動性をやや抑えた寒天含有率の高い寒天印象材です。ゲル化強度、弾力性の向上により、より精密で正確な再現性、安定した寸法精度を発揮します。ポストの印象に適しています。

ブルー 流動性を持たせた
標準タイプ

操作性に優れ、細部まで精密な印象が得られます。低いゲル化温度でゆとりの操作時間を確保。1982年の発売以来、変わらぬご愛顧を頂くスタンダードブランドです。

レッド 流動性を持たせた
標準タイプ

オムニコ社製最年長の寒天印象材です。ハイドロスティック・ブルーとほぼ同じ特徴を備えています。お使いのアルギン酸塩印象材との色調との相性でお選び下さい。

寒天印象材

紫陽花

ゲル化温度:42℃ 保存温度:60~63℃



寒天印象材

ハイドロスティック・ブルー

ゲル化温度:42℃ 保存温度:60~63℃



寒天印象材

ハイドロスティック・リーガルグリーン

ゲル化温度:42℃ 保存温度:60~63℃



流動性を抑えた、寒天の含有率の高い寒天印象材です。ゲル化強度、弾力性の向上により、より精密で正確な再現性、安定した寸法精度を発揮します。

- 標準価格 5/16" (94本入) **¥ 7,250** 5801 727957
- 3/8" (65本入) **¥ 7,250** 5801 727989
- プリスターパック 5/16" (60本入) **¥ 4,400** 5801 861380
- カートリッジ (48本入) **¥ 6,400** 5801 727964
- カートリッジ詰替用 (72本入) **¥ 5,400** 5801 727971

寒天印象材

ハイドロスティック・レッド

ゲル化温度:42℃ 保存温度:60~63℃



オムニコ社製最年長の寒天印象材です。ハイドロスティック・ブルーとほぼ同じ特徴を備えています。お使いのアルギン酸塩印象材の色調との相性でお選び下さい。(5/16"と3/8"のシリンジタイプのみとなっています)

- 標準価格 5/16" (94本入) **¥ 6,250** 5801 727708
- 3/8" (65本入) **¥ 6,250** 5801 727697

1 シリンジタイプ 5/16"・3/8"

細部までスムーズにいきたる流動性、撤去時のちぎれが起きにくい高い弾力性を有しています。機能を追求したハイグレードな寒天印象材。

- 標準価格 5/16" (94本入) **¥ 6,900** 5801 731343
- 3/8" (65本入) **¥ 6,900** 5801 731351

2 プリスターパック 5/16"

紫陽花を1本ずつプリスターパックに入れました。雑菌混入がなく、品質の劣化を防ぎます。

- 標準価格 (60本入) **¥ 4,400** 5801 861372

3 カートリッジ

なめらかな流動性で操作性が良く、細部まで精密な印象が可能です。

- 標準価格 (48本入) **¥ 6,100** 5801 731368

4 カートリッジ詰替用

紫陽花カートリッジの詰替用です。

- 標準価格 (72本入) **¥ 5,200** 5801 731375

1 シリンジタイプ 5/16"・3/8"

なめらかな流動性で操作性が良く、細部まで精密な印象が可能です。

- 標準価格 5/16" (94本入) **¥ 6,400** 5801 727722
- 3/8" (65本入) **¥ 6,400** 5801 727730

2 プリスターパック 5/16"

- 標準価格 (60本入) **¥ 4,000** 5801 861365

3 カートリッジ

- 標準価格 (48本入) **¥ 5,300** 5801 727804

4 カートリッジ詰替用

- 標準価格 (72本入) **¥ 4,500** 5801 727811

寒天印象用シリンジ
カートリッジシリンジ

カートリッジタイプの印象材に使用するシリンジです。カートリッジの出し入れが容易で、操作しやすい設計です。



太曲、細曲、直の3種ニードル付

- 標準価格 セット(横入れ式1本入) **¥ 7,800** 5801 753044


寒天印象用シリンジ
クリアシリンジ



印象材の種類、残量がひとめでわかる透明ボディの寒天用シリンジです。空気・水分の混入を防ぐダブルパッキン方式で高精度な印象採得を実現します。


- 標準価格 5/16" クリアシリンジ(1本入) 3S **¥ 9,600** 5801 727302
- 5/16" クリアシリンジ(1本入) 3L **¥ 10,100** 5801 885890
- 5/16" クリアシリンジ(1本入) 2S **¥ 9,600** 5801 885901
- 5/16" クリアシリンジ(1本入) 2L **¥ 10,100** 5801 885918

有歯顎用トレー
デントクラフト・日の丸トレー

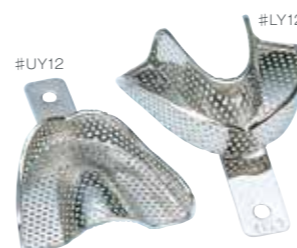

セット内容 6個入 #UY12, 13, 14 #LY 12, 13, 14

アルギン酸及びシリコン印象用トレー。日本人の顎に合わせて設計されています。特に歯肉類移行部が低く設計されているのが特長です。

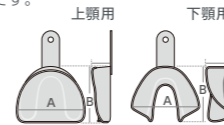

- 標準価格 セット **¥ 34,760** 5801 726556
- 単品 **¥ 6,050**

上顎用 単位mm	トレーNo.	コードNo.	A	B
#UY11	5801 726008		86	62
#UY12	5801 726015		76	61
#UY13	5801 726022		75	56
#UY14	5801 726030		68	54


下顎用 単位mm	トレーNo.	コードNo.	A	B
#LY11	5801 726047		81	65
#LY12	5801 726054		78	63
#LY13	5801 726061		75	60
#LY14	5801 726079		73	59

*表中の値は標準値(許容範囲:±5mm)

局部用トレー
回転トレー(#99)



回転式トレー(#99)は前歯部や臼歯の単冠及びブリッジの印象採得に使用できます。パーシャルトレーセットと使い分けることで、よりの確に印象採得できます。

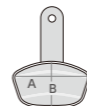

- 標準価格 単品 **¥ 5,500** 5801 725504

単位mm	トレーNo.	コードNo.	A	B
クラウン&ブリッジ	#99	5801 725504	58	32

*表中の値は標準値(許容範囲:±5mm)

寒天印象用シリンジ
ハイドロシリンジ 5/16"・3/8"

より密閉性を高めたシリンジです。材質には、耐熱性に優れたジュラコン樹脂を採用し、プランジャーはダブルパッキン(5/16"のみ)で空気・水分の混入を防ぎます。



- 標準価格 ハイドロシリンジ5/16" (1本入) **¥ 13,800** 5801 727641
- ハイドロシリンジ3/8" (1本入) **¥ 13,800** 5801 727633

アルギン酸印象材除去液
DCトレークリーナー2




強力な洗浄力を持ち、トレーに付着したアルギン酸印象材を浸漬しておくだけで除去します。トレーの腐食・変色が少なく、手にもやさしいトレークリーナーです。

希釈率:20倍 内容量:2,000mL入

- 標準価格 **¥ 3,600** 5801 878941

局部用トレー
パーシャルトレー

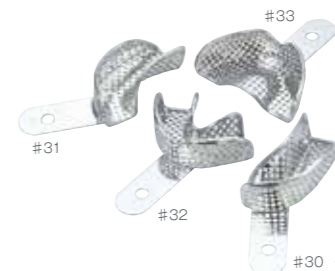

上顎前歯用(#33)、下顎前歯用(#32)、左右の切歯及び臼歯用(#30、 #31)の4個組セットです。穴あきタイプのトレーですから、アルジネート及びシリコン印象材をより確実に保持します。


セット内容 4個入 左右片顎用: #30、 #31 下顎前歯用: #32 上顎前歯用: #33

- 標準価格 セット **¥ 20,900** 5801 725162
- 単品 **¥ 5,610**

単位mm	トレーNo.	コードNo.	A	B
上顎左/下顎右	#30	5801 725170	44	62
上顎右/下顎左	#31	5801 725187	44	62
下顎前歯	#32	5801 725194	64	38
上顎前歯	#33	5801 725205	67	37

*表中の値は標準値(許容範囲:±5mm)

有歯顎用トレー
全顎用網トレー

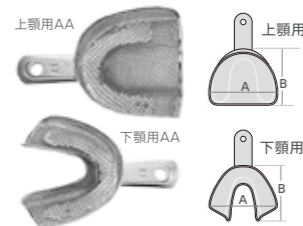

- 標準価格 単品 **¥ 3,600**
- 上下顎セット AAセット **¥ 7,200** 5801 677575
- Aセット **¥ 7,200** 5801 677582
- Bセット **¥ 7,200** 5801 677590
- Cセット **¥ 7,200** 5801 677601

上顎用 単位mm	トレーNo.	コードNo.	A	B	下顎用 単位mm	トレーNo.	コードNo.	A	B
上顎用AA	5801 677689		70	67	下顎用AA	5801 677671		71	67
上顎用A	5801 677625		70	63	下顎用A	5801 677618		70	60
上顎用B	5801 677640		65	60	下顎用B	5801 677632		66	55
上顎用C	5801 677664		65	53	下顎用C	5801 677657		67	50

製品のサイズは、上記寸法と若干異なる場合があります。