

コンポジットレジン

独自の色調適合技術により
歯質の色調に馴染む



ア・ウーノ

f・U・NO

ユニバーサルシェード型コンポジットレジン

商品詳細



色調タイプ		ノーマル	St		
シェード		ベーシック	ベーシック	White	Dark
ペースト性状	ユニバーサル	●	●	—	—
	ローフロー	●	●	●	●
	フロー	●	●	●	●

三種類のペースト性状

ユニバーサル ^{※1}	ローフロー	フロー
付形後 15分	採取後 10秒	採取後 10秒

※1 ベーシックシェードのみラインナップ

CR 充填サポート製品

●Nu:le コート



豊富なカラーラインナップで、低粘性により塗りやすく、熟練度を問わず短時間で光沢を得られます。また低粘性設計で筆跡が残りにくく、薄く均一に塗布することができます。

[816128]

Nu:le コート リキッド クリアー 6mL

[816111]

Nu:le コート ジェル クリアー 2mL



●アダプトセクショナル マトリックス 透明 Kerr™

隣接面用のマトリックスシステムで、歯冠の形態にフィットした豊隆が付与されています。

・50入
・厚さ:50μm



モデルート (緩い豊隆)	黄 5.0mm [498896]	青 6.5mm [498907]
インクリーズド (大きな豊隆)	橙 5.0mm [498914]	紫 6.5mm [498921]

●オブチダム / 3D ラバーダムシート Kerr™



立体的な 3D デザインにより、術野を広く確保します。口腔に合わせた無理の無い形状により、ラバーダムのテンションは弱く、過度の力を生じません。

[396020]

オブチダム白歯用 イントロキット

[396044]

オブチダム前歯用 イントロキット

白歯用

前歯用



オブチダム白歯用 10枚
フレーム 1本

オブチダム前歯用 10枚
フレーム 1本

●オブチディスク Kerr™



平滑面や隣接面のコンポジットレジン研磨するのに適した、半透明の CR 研磨用ディスクです。

●コース / ミディアム (ブラウン)
研磨粒子サイズ: 44.5 μm
直径 9.6mm、12.6mm、15.9mm

●ファイン (オレンジ)
研磨粒子サイズ: 21.8 μm
直径 9.6mm、12.6mm、15.9mm

●エクストラファイン (イエロー)
研磨粒子サイズ: 8.4 μm
直径 9.6mm、12.6mm、15.9mm



●販売名: ア・ウーノ 一般名: 歯科充填用コンポジットレジン 認証番号: 304AABZX00013000(管理) 製造販売元: YAMAKIN 株式会社 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3 ●販売名: Nu:le コート 一般名: 歯科表面滑沢硬化材(高分子系歯冠用着色材料、歯科レジン用接着材料、歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材、歯科接着・充填材料用表面硬化保護材、歯面コーティング材) 認証番号: 303AABZX00051000(管理) 製造販売元: YAMAKIN 株式会社 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3 ●販売名: アダプトセクショナル マトリックス 一般名: 歯科用マトリックスバンド 届出番号: 13B1X10405103900(一般) 製造販売元: エンピスタジャパン株式会社 東京都品川区北品川4-7-35 ●販売名: オブチダム 一般名: 歯科用ラバーダム防湿キット 届出番号: 13B1X10405100600(一般) 製造販売元: エンピスタジャパン株式会社 東京都品川区北品川4-7-35 ●販売名: オブチディスク 一般名: 歯科用アブレンシブディスク 届出番号: 13B1X10405100900(一般) 製造販売元: エンピスタジャパン株式会社 東京都品川区北品川4-7-35

お取引歯科ディーラー名

販売元 株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問合せ
TEL: 0800-170-5541(コンタクトセンター)
<https://www.yoshida-dental.co.jp/>



(01)02747937016459
C02078/2025年7月/⑤50/改

YOSHIDA

ダイレクトボンディングに特化した操作性を求めて
造り上げたこだわりの意匠。

ダイレクトボンディング レジン充填器

DENTCRAFT TSURUGI

デントクラフト TSURUGI



ダイレクトボンディングのために開発した専用インスツルメント「デントクラフト TSURUGI」。

用途により使い分けできる5種類の形状をご用意しました。付形や操作がしやすいのはもちろん、こだわりのエルゴノミックデザインにより、さらに精度の高いダイレクトボンディングやレジン充填を可能にします。

写真提供：青島 徹児 先生（青島デンタルオフィス）

六角 ハンドル部 アルマイト処理

軽量でグローブが絡みにくいアルマイト表面処理を施したハンドル部は、緻密なダイレクトボンディングでも快適に施術が可能。術者の手指負担を軽減します。



TSURUGI No.2 充填・形成



充填しにくい臼歯部遠心面は、先端部のしなりがあり、同方角から近心・遠心へのアプローチが可能です。先端が非常に薄くかつ弾力があるので、なめらかな外形の形態付与に高い操作性を発揮します。

TSURUGI No.3 形成



先端が逆向きの両頭なので、近心・遠心両方から咬合面にアプローチできます。小窩裂溝の最深部にも的確にアプローチできる、鋭い先端形状になっています。

■TSURUGI 5本キット（滅菌ケース付）60,000円（税別）[422756](#)

■TSURUGI 単品 1本 各12,000円（税別）
No.1 [422699](#) No.2 [422700](#) No.3 [422717](#) No.4 [422724](#) No.5 [422731](#)


■TSURUGI 滅菌ケース 黒（単品） 10,000円（税別）[422749](#)

TSURUGI No.4 充填・形成



もっとも使用頻度の高い、先端がしなやかで極薄なブレードタイプです。隣接部の充填や形成、臼歯咬合面の小窩裂溝付形など、繊細な作業が可能です。

TSURUGI No.1 充填

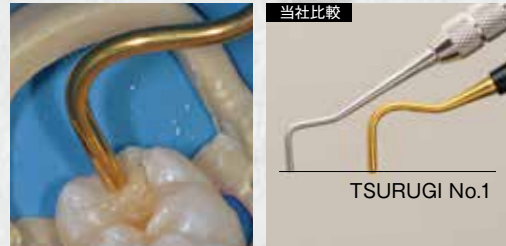

独自の先端角度により、最後臼歯へのアクセスも角度をつけずにアプローチすることが可能。患者さんの開口負担を軽減します。

TSURUGI No.5 着色・形態付与




手用ファイルを装着でき、小窩裂溝の付形や着色など幅広く使用できます。



簡単にファイルの装着・取り外しができます。
※ファイルは別売りです。

効率的な作業性

両頭の先端形状が異なり、近心から遠心の形態付与まで行えます。術者・患者ともに負担の少ない、効率的な作業性を実現しました。

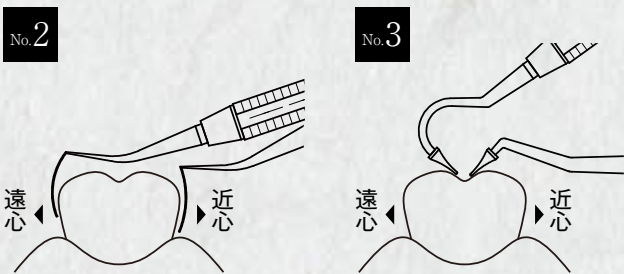

シンメトリーウィズゲージ
(Symmetry width gauge)

中心位から歯牙幅径を計測でき、反対側の形態付与時に便利です。



0.5mm 単位のスケール

コーティング処理

「剣」のように尖った先端形状なので、臼歯小窩裂溝の主隆線や副隆線などリアルな咬合面付与を実現します。またステンレスチタンコーティングでレジン離れが良く、細やかな操作も可能です。



デントクラフト TSURUGI
5本キット（滅菌ケース付）

TSURUGIと同色のブラックカラー滅菌ケースが付属したキットです。

- ・寸法：W187×D87×H24mm
- ・材質：ポリプロピレン
- ・134℃ オートクレープ可能



※インスツルメント原寸大