

**YOSHIDA**  
**Bausch**

**Arti-Bite**

Vinyl Polysiloxane Bite Registration  
Made in Japan

バウシュ初！  
咬合採得用シリコーン印象材

# Arti-Bite

正確な咬合記録を実現。  
咬合紙メーカーのバウシュが  
新しいアプローチ

日本製

Bausch Articulating Papers Japan K. K.



8 $\mu$ から200 $\mu$ までの咬合紙を揃え、“...we make Occlusion visible<sup>®</sup>”がコンセプトのバウシュ製品。正しい咬合と健全な口腔機能状態を目指して、Dr. Jean Bausch GmbH&Co. KG社では1953年から咬合検査材の開発と製造に取り組んでいます。複数の検査材を組み合わせ使用できるバラエティ豊かなバウシュ製品に、咬合検査と記録にも適した咬合採得用シリコーン印象材がラインナップに登場。バウシュの新しいアプローチをご提案します。



# 精度の高い咬合採得で最適な補綴作りをサポート

For Occlusal Record


## この硬さ! 操作性! ラボもクリニックも使いやすい

軽い押し出し感で、流動性が良いため、歯面の狙った部位へ盛りやすく、余裕をもって操作が行えます。  
30秒という短い口腔内保持時間で採得中のズレが生じにくく、正確な咬合採得が可能。  
ショアA硬度90のアルティバイトの適度な硬さと弾力性は、ラボサイドからの評価も高く、安心してトリミング作業をしていただけます。



## 咬合状態が見やすい色調

咬合紙メーカー、パウシュならではの色調。咬合面の状態を確認しやすいダークブルーになっています。接触面の濃淡が出やすく、口腔内全体の咬合バランスを確認することにもアルティバイトは有用です。

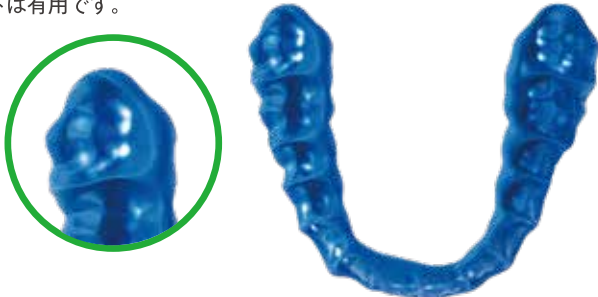

## 咬合記録の保管も可能

咬合面の再現性が高く、収縮率-0.1%以下で寸法変化が維持できるアルティバイトは、採得したバイトの長期間の保管に向いています。咬合調整や矯正治療中の咬合状態の経過確認にもお勧めです。



※イメージ  
咬合接触面の状態変化を記録

### 物性情報(テクニカルデータ)

操作余裕時間	20秒
口腔内保持時間	30秒
ショアA硬度	90
弾性ひずみ	1.1%以下
寸法変化(48時間後)	0~-0.10%

※パウシュ咬合紙ジャパン(株) 試験結果による



**BK400**  
カートリッジ50ml×4  
ミキシングチップL(グリーン)×12  
標準価格 **¥9,180** (税別)

販売名:アルティバイト  
一般名称:歯科咬合採得用材料  
届出番号:27B3X00271000006(一般)

販売元:  株式会社 **ヨシダ**

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問合せ: **0800-170-5541**

対応時間: 月~金 9:00-17:30 土 9:00-17:00 (日曜・祝祭日を除く)

歯科医院様専用フリーダイヤルのため、お問合せは固定電話専用となっています。  
携帯電話からは 03-6880-2155 にお問合せください。

製造販売元: **Bausch Articulating Papers Japan k.k.** (パウシュ咬合紙ジャパン株式会社)  
大阪府池田市城南1-4-2

価格は 2024 年 3 月現在の税別価格です。

担当販売店



(01)02747937016718

C02104/2024年3月/01/PRI/1/改