

商品ラインナップ

デントクラフト RE ファイル CT

| 商品コード | 作業長 | テーパ | サイズ |
|--------|-------|-------|-------|
| 658169 | 19mm | 08 | #20 |
| 663604 | | | #25 |
| 663611 | | | #35 |
| 663629 | | 12 | #25 |
| 663216 | | | #15 |
| 663223 | | | #20 |
| 663530 | | 02 | #25 |
| 663231 | | | #30 |
| 663248 | | | #35 |
| 663255 | | | #40 |
| 663262 | | | #45 |
| 663270 | | | #50 |
| 663287 | #55 | | |
| 663294 | #60 | | |
| 663305 | #70 | | |
| 663515 | 03 | | #50 |
| 658176 | | | ★ #15 |
| 658183 | | | ★ #20 |
| 658191 | 21mm | ★ #25 | |
| 658201 | | ★ #30 | |
| 658219 | | ★ #35 | |
| 658226 | | ★ #40 | |
| 658233 | | #45 | |
| 658241 | | #50 | |
| 658258 | | #55 | |
| 658265 | | #60 | |
| 658272 | | ★アソート | |
| 663547 | | 05 | #10 |
| 663554 | | | #15 |
| 658280 | | | ★ #15 |
| 658297 | 06 | ★ #20 | |
| 658308 | | ★ #25 | |
| 658315 | | ★ #30 | |
| 658322 | 06 | ★ #35 | |
| 658330 | | ★ #40 | |
| 658347 | | #45 | |
| 658354 | 02 | #50 | |
| 658361 | | ★アソート | |
| 663312 | | #15 | |
| 663320 | 25mm | 03 | #20 |
| 675186 | | | #25 |
| 663337 | | | #30 |
| 663344 | | #35 | |
| 663351 | | #40 | |
| 663369 | | #45 | |
| 663376 | | #50 | |
| 663383 | | #55 | |
| 663391 | | #60 | |
| 663401 | | #70 | |
| 663522 | | 04 | #50 |
| 657964 | | | ★ #15 |
| 657971 | ★ #20 | | |
| 657989 | 04 | ★ #25 | |
| 657996 | | | ★ #30 |
| 658009 | | | ★ #35 |
| 658016 | | ★ #40 | |
| 658023 | | #45 | |
| 658031 | | #50 | |
| 658048 | | #55 | |
| 658055 | | #60 | |
| 658062 | | ★アソート | |

*内容量 単品:各6本入
アソート: #15-#40 各1本入
*標準価格 単品:各5,800円(税別)
アソート:5,800円(税別)



デントクラフト RE ファイル VT

| 商品コード | 作業長 | テーパ | サイズ | |
|--------|------|-------|-------|-------|
| 663561 | 19mm | 05 | #10 | |
| 663579 | | | #15 | |
| 658070 | | | ★ #15 | |
| 658087 | | 06 | ★ #20 | |
| 658094 | | | ★ #25 | |
| 658105 | | | ★ #30 | |
| 658112 | | 25mm | ★ #35 | |
| 658120 | | | | ★ #40 |
| 658137 | | | | #45 |
| 658144 | | | #50 | |
| 658151 | | | ★アソート | |
| 663419 | | | 02 | #15 |
| 663426 | #20 | | | |
| 675193 | #25 | | | |
| 663433 | 02 | | #30 | |
| 663441 | | | #35 | |
| 663458 | | | #40 | |
| 663465 | 31mm | | 04 | #45 |
| 663472 | | #50 | | |
| 663480 | | #55 | | |
| 663497 | | 04 | #60 | |
| 663508 | | | #70 | |
| 658379 | | | ★ #15 | |
| 658386 | | 04 | ★ #20 | |
| 658393 | | | ★ #25 | |
| 658404 | | | ★ #30 | |
| 658411 | | 04 | ★ #35 | |
| 658429 | | | ★ #40 | |
| 658436 | | | #45 | |
| 658443 | 05 | #50 | | |
| 658451 | | #55 | | |
| 658468 | | #60 | | |
| 658475 | 05 | ★アソート | | |
| 663586 | | #10 | | |
| 663593 | | #15 | | |
| 658482 | 06 | ★ #15 | | |
| 658490 | | ★ #20 | | |
| 658501 | | ★ #25 | | |
| 658518 | 06 | ★ #30 | | |
| 658525 | | ★ #35 | | |
| 658532 | | ★ #40 | | |
| 658540 | 06 | #45 | | |
| 658557 | | #50 | | |
| 658564 | | ★アソート | | |

*内容量 単品:各6本入
アソート: CX-A3 各1本入
*標準価格 単品:各5,800円(税別)
アソート:5,800円(税別)



デントクラフト RE ファイル ONE

| 商品コード | 作業長 | テーパ | サイズ | |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 657551 | 21mm | 02 | #15 | |
| 657591 | | | 05 | #45 |
| 663141 | | | | #50 |
| 657583 | | 06 | | #35 |
| 663134 | | | #40 | |
| 657569 | | | #20 | |
| 657576 | | 07 | #25 | |
| 663127 | | | #25 | |
| 657601 | | | 02 | ★ #15 |
| 657641 | | 05 | ★ #45 | |
| 663173 | | | #50 | |
| 657633 | | | 06 | ★ #35 |
| 663166 | #40 | | | |
| 657619 | 07 | ★ #20 | | |
| 657626 | | ★ #25 | | |
| 663159 | | 08 | #25 | |
| 657708 | ★アソート | | | |

*内容量 単品:各3本入
アソート: #15-#45 各1本入
*標準価格 単品:各4,800円(税別)
アソート:8,000円(税別)



デントクラフト RE ファイル GP(グライドパス)

| 商品コード | 作業長 | テーパ | サイズ |
|--------|------|-----|-----|
| 660565 | 21mm | — | — |
| 660572 | 25mm | 02 | — |
| 660580 | 31mm | — | — |

*内容量 各3本入
*標準価格 各4,500円(税別)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2024年6月現在の税別価格です。

禁無断転載

一般名称: 電動式歯科用ファイル 販売名: RE ファイル
認証番号: 301ALBZX00015000(管理)
製造販売元: 株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9

●お問い合わせは下記まで

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは
株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター
0800-170-5541

※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 土 9:00~17:00
(日曜・祝祭日を除く)



C02181/2024年6月/PRI/20/@40/改

YOSHIDA



ニッケルチタン ファイル

DENTCRAFT. RE ファイル


High Performance and Resistance
NiTi File.

DENTCRAFT.
RE FILE CT

DENTCRAFT.
RE FILE VT

DENTCRAFT.
RE FILE ONE

DENTCRAFT.
RE FILE Glide Path

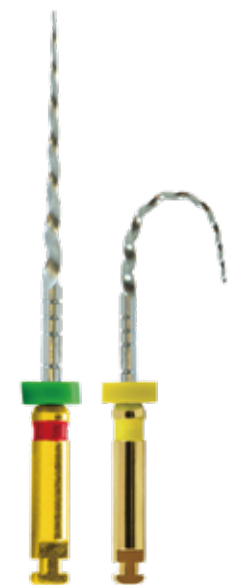

DENTCRAFT®

RE FILE

High Performance and Resistance
NiTi File.



詳しくはこちらの
動画をご覧ください

優れた柔軟性による高い根管追従性

特殊な熱処理加工による優れた柔軟性で、
ファイル破折のリスクを軽減しています。

スプリングバックがなく、
トランスポーテーションやレジジが起りにくい性状です。

プレカーブを付けることも可能ですので、湾曲根管への追従性も高く、
根管内壁を均等に拡大・形成することを可能にしました。



1本単価 970円* を実現

ニッケルチタンファイルがより導入しやすい価格を実現しました。
根管治療の可能性を上げます。

* [CT・VT (6本入)] 標準価格 ¥5,800 (税別) / [ONE (3本入)] 標準価格 ¥4,800 (税別) /
[ONEアソート (5本入)] 標準価格 ¥8,000 (税別)

ショートシャンクによる操作性の向上

11mmのショートシャンクにより、特に臼歯部へのアクセスが
容易になります。

DENTCRAFT®

RE FILE CT

刃部全長に沿って均一なテーパーを付与した形状です。(コンスタントテーパー)
クラウンダウン法・フルレンジステック 両方でご使用いただけます。

推奨回転速度
500回転/3N

1 ストレートラインアクセス

2 ネゴシエーション(穿通)

MM ファイル 滅菌済みを使用

#8 または #10



3 グライドパス

REファイル GP
(グライドパス)を使用

推奨回転速度
300回転/2N



※作業長まで到達しない場合は、最初のファイルへ戻り作業します

クラウン
ダウン法

4 根管形成

5 根尖部の拡大

フルレンジ
ステック
テクニック

4 根管形成



DENTCRAFT®

RE FILE VT

先端からシャフトにかけてテーパーが異なる形状です。(パリアブルテーパー)
根管壁に接触する部分が限られ、ファイルの応力を軽減しています。

推奨回転速度
500回転/3N

1 ストレートラインアクセス

2 ネゴシエーション(穿通)

MM ファイル 滅菌済みを使用


#8 または #10



3 グライドパス

REファイル GP
(グライドパス)を使用

推奨回転速度
300回転/2N

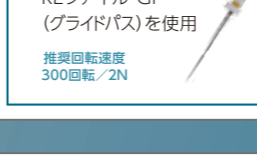


4 根管の
拡大形成

5 根管上部の
拡大形成

6 根管中部の
拡大形成

7 根尖径に合わせて使用

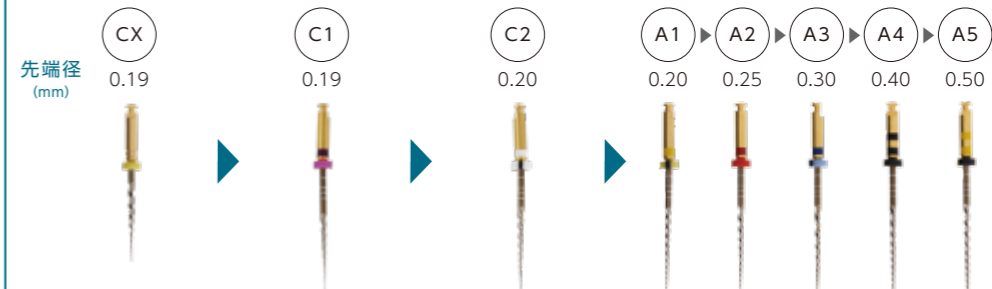

DENTCRAFT®

RE FILE ONE

反復運動(レシプロケーション)により、
シングルファイルテクニックでの根管形成が可能です。

1 ストレートラインアクセス

2 ネゴシエーション(穿通)

MM ファイル 滅菌済みを使用

#10



3 グライドパス

REファイル ONEを使用

#02
#15



4 根管形成

