

# 1台2役

Simple&Useful




レントゲン室から訪問先まで、  
撮影シーンを問わず  
いつでもどこでも有効活用。

## エックス-ショット ウィズ リパラ

X-Shotを最大活用するために。  
それが、X-Shot with Ripara.

X-Shot

ripara  
with arm chair

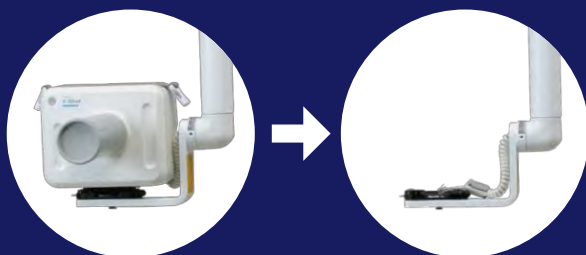

簡単に取り外しが可能!



## コンパクト、軽量、シンプル

直感的な操作性に優れており、簡単操作でX線画像が得られます。また、訪問診療以外にも、手術室などでもレントゲン撮影が可能です。



## クリーンで安心

コーン先端に、交換可能なシリコン製のフィルターを付けました。患者さんに触れる可能性のある部分への優しい配慮です。シリコン製なので、オートクレーブ滅菌が可能です。



## X線センサーやフィルムに対応

コンピュレイ  
X線センサー

ビスタスキャン  
イメージングプレート

デンタルフィルム

コンピュレイのX線センサー、ビスタスキャンのイメージングプレート、及びデンタルフィルムに対応します。




## 直感的な操作性。短時間充電

操作パネルはシンプルで、操作性に優れています。撮影部位のピクトグラムを選択するだけで、適切なX線画像が得られます。また、専用ケーブルを差込むだけで簡単に充電ができます。



※フル充電時間:約40分  
※フル充電で約50回照射可能

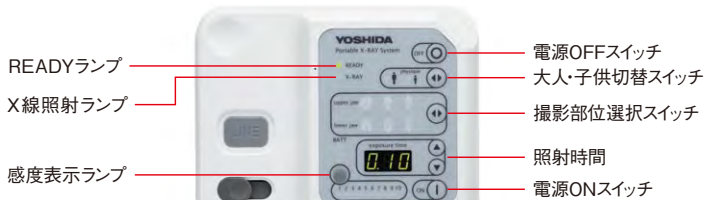

## X-shot with Ripara

X-shot with Ripara

【標準価格 ¥880,000】



座面下部にはオプションのキャリングケースが収納可能なため、ちょっとした移動でも、スムーズに持ち出しが可能です。

※レントゲン照射スイッチ(10m)は標準装備です。

## オプション

X-shotアーム付チェアー  
Ripara

【標準価格 ¥300,000】

オプションハンドスイッチ  
訪問診療用



専用ケース



交換用シリコンキャップ



仕様 ●X線管球:D-410 (TOSHIBA製) ●X線管焦点:0.4 ●管電圧:60KV ●管電流:2mA ●撮影時間:0.02~2.5秒 ●総ろ過:1.5mm (Al) 以上 ●本体寸法:W179×D262×H143mm ●重量:2.5kg  
●一般の名称:アナログ式口外汎用歯科X線診断装置 ●販売名:エックスショット ●医療機器認証番号:224AKBZX00011000 (管理医療機器 特管 設置管理医療機器)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

◎発売元: 株式会社 **ヨシダ** <http://www.yoshida-dental.co.jp/>  
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2925 (画像情報営業本部)

◎製造販売元:吉田精工(株) 茨城県行方市八木蒔660



2013年12月/PRO/50/@60/新

(01)02747937012000