

**YOSHIDA**



技工用製品

歯科複模型用ゴム質弾性印象材料

**GIマスク オートミックス**

**GIマスク 3D**

 **COLTENE**



## GI マスク オートミックスタイプ CAD/CAM用スキャンタイプが誕生!

- 優れた弾性と耐引裂性により取り外しがカンタン
- トリミングしやすい!
- スキャンングパウダー不要で操作が楽! (※GIマスク3Dのみ)
- 均一なスキャンが可能! (※GIマスク3Dのみ)
- 硬化時間7分 (練和開始後)


### Direct Technic 直接法



GI マスク分離材で印象を分離



GI マスク 3Dを印象材に直接適用

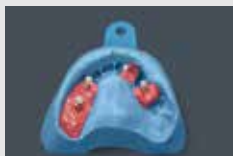

優れたチキソトロピー安定性



超硬石膏でインプレッションを付与する



GI マスク 3Dで完成した模型



デスクトップスキャナーで模型をスキャン

### Indirect Technic 間接法



コルテン ラボパテで作製した模型を使用



GI マスク分離材で印象を分離



GI マスク 3Dを投入



GI マスク 3Dで仕上がった模型



容易な切削とトリミング



デスクトップスキャナーで模型をスキャン

## ORDER INFORMATION



427803	GI マスク 3D スターターキット		
	3D カートリッジ	2本 × 50ml	
	分離材	1本 × 50ml	
	ユニバーサルミキシングチップ	12個	
	オーラルチップ	12個	
	シリコン用トリマー	1本	
標準価格:	16,600円		

427828	GI マスク オートミックススターターキット		
	オートミックスカートリッジ	2本 × 50ml	
	分離材	1本 × 50ml	
	ユニバーサルミキシングチップ	12個	
	オーラルチップ	12個	
	シリコン用トリマー	1本	
標準価格:	15,000円		



427811	GI マスク 3D リフィル		
	カートリッジ	2本 × 50ml	
	ユニバーサルミキシングチップ	12個	
	オーラルチップ	12個	
標準価格:	7,100円		

427835	GI マスク オートミックス リフィル		
	カートリッジ	2本 × 50ml	
	ユニバーサルミキシングチップ	12個	
	オーラルチップ	12個	
標準価格:	6,400円		



427792	分離材 (スプレータイプ)	50ml	
標準価格:	6,750円		
385005	ユニバーサルミキシングチップ	40個	
標準価格:	6,200円		

683126	オーラルチップ	100個	
標準価格:	12,000円		
427842	シリコン用トリマー	1本	
標準価格:	4,200円		

販売名: GI マスク オートミックス /3D 一般名: 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 届出番号: 13B1X10231000140 製造販売業者: AJMD 株式会社 東京都中央区日本橋久松町4-7 久松町ロータリービル

©販売元: 株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9 <https://www.yoshida-dental.co.jp>

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ※価格は2022年8月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月~金 9:00~19:00 ± 9:00~17:00  
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937017388

C02169/2022年8月/PRI/  
1/ @ 20/改