

YOSHIDA

戦うキミの 歯を守る

DENTCRAFT®



GUARD

デントクラフト Jガード

フロントアーマータイプ
安心の耐衝撃性



対象スポーツ (マウスガード着用規定が定められています。詳しくは各競技団体にご確認ください。)



サッカー



ラグビー



ボクシング



ラクロス



野球



バスケットボール

etc

5 COLORS



クリア



ブルー



レッド



ホワイト



ブラック


薄くても高い衝撃吸収力と優れた装着性!! 2種5層構造からなるスポーツ用マウスガード



FIVE LAYER
2種5層シート構造

PO(特殊ポリオレフィン)と硬さの異なるEVA(エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)を積層した2種5層構造で薄くても高い衝撃分散効果と衝撃吸収効果があります。外層の特殊ポリオレフィン(デュロ硬度44)で衝撃力を分散させ、内層のEVA(デュロ硬度39)で衝撃力を吸収し、歯をダメージから守ります。

PO
特殊ポリオレフィン樹脂(デュロ硬度44)
柔軟性、弾性に優れた新素材

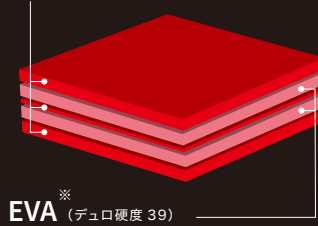


EVA※
(デュロ硬度39)

衝撃吸収 / 分散効果比較



各種シート材(4mm)の衝撃吸収試験結果

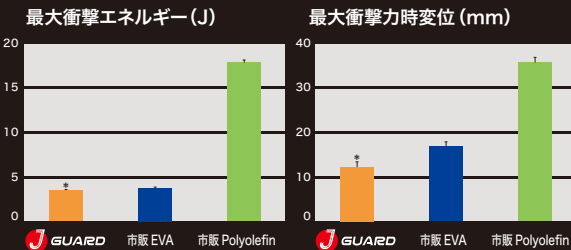

※注釈
最大衝撃エネルギー(J)：各種シートを介して同じ衝撃を与えた際の、受けるエネルギー量。小さいほど介したシートの衝撃吸収量が高い。

最大衝撃力時変位(mm)：最大衝撃エネルギーを受けた際のシートの変形量。小さいほど力の吸収・分散能が優れている。
*p<0.01

一般財団法人 日本品質保証機構(JQA)にて測定
測定日：2020年3月26日


TYPE：製品情報

カラー	サイズ	厚み	包装	タイプ/標準価格	
				スタンダード	フロントアーマー
● クリア	125mm × 125mm	2mm	5枚入	2mm 2,500円(税別)	2mm 3,500円(税別)
● ブルー		3mm 2,700円(税別)		3mm 3,700円(税別)	
● レッド		4mm 2,900円(税別)		4mm 3,900円(税別)	
● ホホワイト					
● ブラック					



FRONT ARMOR TYPE
フロントアーマータイプ

前歯部分の厚みを確保できるスポーツ用マウスガードを製作可能です。従来のシートの厚みのコントロール操作や補強材を重ねる作業の手間がなく、前歯部の耐衝撃性を高めることができます。

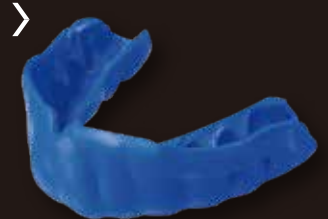

前歯部分の厚み

- フロントアーマータイプ
- スタンダードタイプ



※ EVA：エチレン酢酸ビニルアセテート (Ethulene Vinyl Ace tate copolymer)

LINEUP：関連製品

マウスピースウォッシュ
100mL

除菌性に優れ、汚れを剥離
臭いも気になりません

標準価格：1,350円(税別)
患者参考価格：1,800円(税別)



マウスガード洗浄器
デンタルクリーナー

テーパー状のソフトブラシで
全体を一度に簡単ブラッシング

標準価格：3,900円(税別)
患者参考価格：4,900円(税別)

持ち運べる
携帯ケース付き



デンタルクリーナー
交換用ブラシ

(2個セット)

標準価格：1,250円(税別)
患者参考価格：1,850円(税別)



マウスガード携帯ケース
デンタル携帯用ケース

スタイリッシュで頑丈なデザイン
大切なマウスガードを安全に保管

標準価格：1,350円(税別)
患者参考価格：1,950円(税別)



●取扱い店

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

月～金 9:00～19:00
土 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)

●製造販売元：(株)ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9



C02304/2021年5月/@20/PRI/30/改