

NOVA  
SERiO α

□ U26 ユニット

◎ 一般名称：歯科用ユニット  
◎ 認証番号：304AGBZX00078000(管理 特管 設置)  
● 製造販売元：吉田精工株式会社 茨城県行方市八木崎660  
※ノバセリオαの販売名はU26ユニットです



ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

**0800-170-5541**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

<https://www.yoshida-dental.co.jp>



(01)02747937020173  
C02447/2025年4月/PME/10/@80/改

NOVA  
SERiO α



アルファでいこうよ。

ノバセリオアルファは  
2種類のチェアタイプと  
5種類のテーブルタイプ、  
計10種類からお選びいただけます。

NOVA  
SERiO α



製品ページ

# 快適性



快適な質感とやわらかさで  
リラックスできる診療時間へ


追求した快適性

それは、これまでの操作性と機能性を更に高めること。  
それは、ドクターの診察や治療時の安定したよりよい環境を創ります。  
その安定した環境は、治療中の患者さんの快適性にも繋がります。



## 優しくスタート&ストップ ショックレスチェア

チェアを動かす際の振動や音を大幅に軽減。患者さんに恐怖を  
与えることなくリラックスしていただき、穏やかな診療空間を  
演出します。

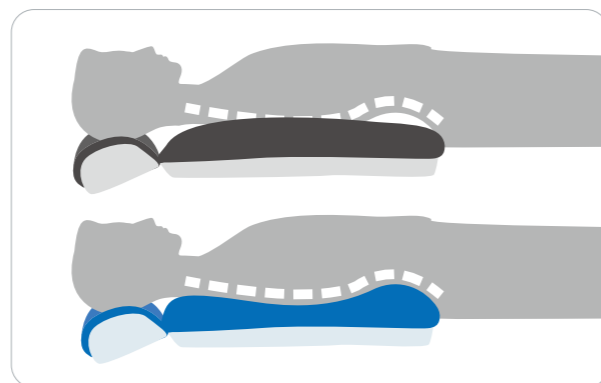

## 背骨のS字カーブに沿った形状で 体をささえるランバーサポート

背骨のS字カーブにシートがフィットする形状です。  
楽な姿勢で診療を受けていただけます。

※一体成型シート対応


# 操作性

優れた操作性

OPTION

ワンランク上の操作性で  
効率化をサポート  
4.3インチ液晶タッチパネル

チェアやインスツルメントの状態をわかりやすく表示。  
カラー表示&液晶タッチパネルは、診療中の押し間違い  
を防ぎ、直感的な操作を実現します。

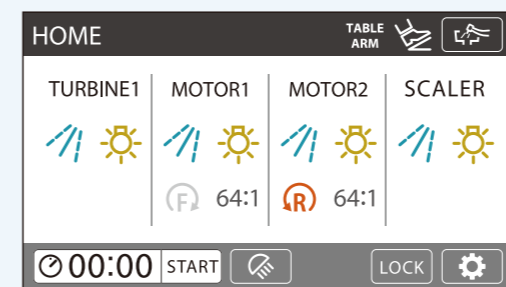

HOME画面



## 2ハンド診療対応 アシスタントハンガー

2ハンド診療対応アシスタントハンガーを標準装備。  
アシスタントハンガーの可動域が広く先生の診療を  
サポートします。

## 効率を重視した清掃性

# 清掃性



## 一体成型シート

標準シートは拭き上げしやすい一体成型。  
清掃しやすく加工されている為、簡単に  
清潔を保つ事ができます。



## 保護カバー

テーブルとスイッチパネルを覆う透明カバー。  
簡単に取り換えるカバーで直接手で  
触れる部分の清掃効率を高めました。



## 取り外しができる 大きなスピットンボウル

吐きこぼしを少なくする為に、うがい鉢は  
大きく設計。取り外しも容易で、患者さんから  
見えるところを清潔に保つお手伝いをします。

チェア

CHAIR



カウンタータイプ



カウンターチェア



ステップタイプ



前折れステップチェア

テーブル

TABLE



[1型] ベースマウント



[2型] オーバーアーム



[3型] カート



フライングアーム



フライングアーム



[1型] ベースマウント



[2型] オーバーアーム



[3型] カート



フライングA



フライングLm

チェアシートカラー

CHAIR SEAT COLOR

一体成形シート

標準装備

座りやすさとメンテナンスしやすさを備えたスタンダードシート。豊富なカラーバリエーションをご用意しています。

Fukka-Fukaシート

OPTION

シートの形状・素材・質感など、最高級ソファのような座り心地を実現しました。

Fukka-Fuka シート  
2トーンカラー

OPTION

2種類の生地を用いた2トーンカラーシート。通常のFukka-Fukaシートとは違った上質さを演出しました。品質や性能はもちろん、デザインにもこだわりたい方へ。



スノーホワイト



フレンチベージュ



エクストリームレッド



ウォーターブルー、ピーチピンク、サマーイエロー、アップルグリーン、スノーホワイト、ダークブルー、ブラック、ホルダーメタリック、グリーンメタリック、ブラックメタリック



リッチブラック、ショコラブラウン、バニラホワイト、フレンチベージュ、L-2543、イタリアンレッド、ターコイズブルー、ブルゴーニュレッド、L-8146、L-2532、L-2538、L-8149



エクストリームレッド、ミッドナイトグレー、カフェブラウン、グランブルー、L-2533、L-2538、プリティッシュグリーン

装備関係

EQUIPMENT



LED無影灯Lライト

販売名: Lライト  
一般的名称: 汎用歯科用照明器  
届出番号: 088ZX0001000012 (一般)  
製造販売元: 吉田精工株式会社  
茨城県行方市八木崎660

インフォームドコンセントを行えるLED無影灯「ルキオン」

前面にミラーパネルを採用したことにより、患者さんにより直接的な説明をすることができます。




ルキオン12



ルキオン24



ルキオン12(使用イメージ)

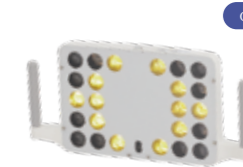

ルキオンCR

販売名: ルキオン 一般的名称: 汎用歯科用照明器 届出番号: 088ZX0001000006 (一般)  
製造販売元: 吉田精工株式会社 茨城県行方市八木崎660

さまざまな機能

OTHER FUNCTION


頭椎保持型2軸ヘッドレスト

標準装備



電動ヘッドレスト

OPTION

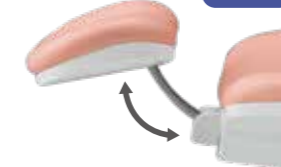

フットコントローラー

標準装備



横スライド式S型  
※チェアスイッチはオプションです

OPTION



踏み込み式930型

OPTION



ジョイスティック

フラッシング機能

口腔内に入るすべてのインスツルメント類とコップ給水の滞留水を自動サイクルで排出します。簡単な操作で水回路をクリーンに保ちます。(フラッシングボウルはオプション)



ユニポア / エアフィルター

ユニポアは最孔径0.1μmの中空糸膜により、赤錆・水アカを除去しきれいな水をつくります。エアフィルターは、エアーをきれいに保ちます。



交換の目安はそれぞれ6ヶ月です。

エアフィルター

インスツルメント

OPTION



ワイドレンジマイクロモーター 40is-LUX

販売名: 40is-LUX モーター  
一般的名称: 歯科用電動回転駆動装置  
届出番号: 227AKBZX00008Z00 (管理 特管)  
選任製造販売業者: AJMD 株式会社  
東京都中央区東日本橋2丁目4番5号真光ビルディング



5倍速光付マイクロモーター ハンドピースYW SV200MLXS

販売名: YWハンドピース  
一般的名称: ストレート・キードアングルハンドピース  
届出番号: 219AKBZX00160000 (管理 特管)  
製造販売元: 株式会社吉田製作所  
東京都墨田区江東橋1-3-6



超音波スケーラー ビエゾSII (光付き/光なし)

販売名: ビエゾSII  
一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器  
届出番号: 227AKBZX00076000 (管理 特管)  
製造販売元: 株式会社吉田製作所  
東京都墨田区江東橋1-3-6



超音波スケーラー ニュートロン (光付き/光なし)

販売名: ニュートロン モジュールキット  
一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器  
届出番号: 224ALBZX00038000 (管理 特管)  
製造販売元: 白水貿易株式会社  
大阪府大阪市淀川区新島1-1-1



超音波スケーラー ブチビエゾII (光付き/光なし)

販売名: ブチビエゾII  
一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器  
届出番号: 220ACBZX00050000 (管理 特管)  
製造販売元: 株式会社吉田製作所  
東京都墨田区江東橋1-3-6



エアスケーラー ボビー

販売名: ボビー  
一般的名称: 歯科用エアスケーラー  
届出番号: 231AKBZX00013000 (管理 特管)  
製造販売元: 株式会社ミクロン  
東京都大田区池上2-17-7



クイック・エアスケーラー根管拡大・洗浄装置 ルーティエー560-YL-NEO

販売名: ルーティエー560  
一般的名称: 歯科用エアスケーラー  
届出番号: 20706BZX00045000 (管理 特管)  
製造販売元: 株式会社ミクロン  
東京都大田区池上2-17-7



サブソニックブラシシステム ユリー

販売名: ユリー  
一般的名称: 歯科用エアスケーラー  
届出番号: 226AKBZX00110000 (管理 特管)  
製造販売元: 株式会社ミクロン  
東京都大田区池上2-17-7



エアスケーラー サリー

販売名: サリー  
一般的名称: 歯科用エアスケーラー  
届出番号: 21400BZX00149000 (管理 特管)  
製造販売元: 株式会社ミクロン  
東京都大田区池上2-17-7

その他

OPTION



マウス・テンキー置き

※マウス単独も可能



ガスバーナー GB-II B-1



ティッシュボックス



小物置き& ティッシュボックス



タテ型ハンガー

※フライングシステムは除く (ウォーターライン除菌装置)



ポセイドン

項目	品名	セリオα	シーズンズα	備考
テーブルタイプ	1型 ベースマウント(カンター後出/ステップ前出・後出)	○	○	選択
	2型 オーバーアーム	○	○	選択
	3型 カート	○	○	選択
	5型 キャビネット	○	×	選択
	フライングA	○	×	選択
	フライングLm	○	×	選択
チェアタイプ	前折れステップ	○	○	選択
	カンター(ダンブ式)	○	○	選択
シート	一体成形シート	○	○	
	Fukka-Fukaシート	▲	▲	
ヘッドレスト	クールシート	■	×	Fukka-Fukaシートのみ選択可能
	2軸ヘッドレスト レバー固定	○	○	
	ユニバーサルヘッドレスト レバー固定	▲	▲	
	2軸ヘッドレスト エアー固定	■	×	
	ユニバーサルヘッドレスト エアー固定	■	×	
	電動ヘッドレスト	■	×	
アームレスト	ユニット側アームレスト	○	○	
	ドクター側アームレスト	■	■	
	アームレスト(加飾タイプ)	▲	×	カンターチェアのみ選択可能
	アームレスト(Muタイプ)	▲	×	ステップチェアのみ選択可能
チェア機能	ショックレス アク्यूムレータ方式	○	×	
	各部安全スイッチ (挟み込み防止)	○	○	
	ノーズニョポジション	○	○	
	最低位 カンター380mm/ステップ450mm	○	○	
	最高位 カンター700mm/ステップ670mm	○	○	
	連動チルト	※	※	※カンターチェアのみ
	レッグカバー(裏面)	○	▲	
テーブル部オプション	テーブルパネル(LED表示)	○	○	
	液晶タッチパネル	■	×	
	MM回転数設定 回転VRタイプ	○	○	
	水量調節弁	○	▲	
	モニターケーブル(HDMI) 内部引き回し	■	■	1型、2型、3型のみ選択可能
	USBリピーターケーブル 内部引き回し+接続ポート	■	■	
	デンキ受台	▲	▲	
	マウスレー	▲	▲	
	ガスバーナ GB-2β1	▲	▲	
	パネルシャーカステン S型	▲	▲	フライングは選択不可
	横型ハンガ	○	×	選択
	縦型ハンガ	○	×	選択
	汚物入れ掛け	○	○	
	シリコンシート	○	○	
	保護カバー(テーブル)	○	×	サンプル同梱
保護カバー(ハンガー)	○	×	サンプル同梱	
エアタービン	ルナサス1s	○	○	
	エアロード01	▲	▲	
マイクモータ	40DSα	○	○	光付
	40is-LUX	■	×	光付 ブラシレス ワイドレンジ ショートフランジ 耐滅菌
マイクモータ ハンドピース	エキスパートマチックE20L+E10C	○	○	光付
	YWハンドピース SV 40MLX+SV 40SI	▲	▲	光付
	YWハンドピース SV 40MI+SV 40SI	▲	▲	光無
超音波スケーラー	ピエゾSII 光無	▲	▲	
	ピエゾSII 光付	▲	▲	
	ニュートロン 光無	▲	▲	
	ニュートロン(LED・スリム)	▲	▲	
	プチピエゾII 光無 (EMS)	■	■	
	プチピエゾII 光付 (EMS)	■	■	
シリンジ	905シリンジ(Dr側)	○	○	
	905シリンジ(AEH側)	○	▲	
	905用ディスボノズル	▲	▲	
AEH	バキュームチップ	○	○	
	排唾チップ	○	▲	
	2ハンド用アーム	○	▲	3関節
	4ハンド用アーム	×	○	
	保護カバー(AEH)	○	×	サンプル同梱
スピットンボウル	白陶器鉢	○	○	選択
	ガラス鉢 クリア/ブルー	○	○	選択
バキュームセパレーター	セバマチック	▲	▲	シーズンズαは外付けBOXタイプ
コップ給水	超音波式	○	×	
	光センサ/タイマー式	○	○	切り替え可能
ユニット外部接続	エアワンタッチジョイント	▲	▲	
	水ワンタッチジョイント	○	▲	
無影灯	Lライト(Hi) 5,000K 40,000lx	○	○	
	ルキオン12 5,000K 23,000lx	■	■	
	ルキオン24 5,000K 46,000lx	■	■	
	ルキオンCR 5,000K 23,000lx	■	■	
	モニターブラケット	▲	▲	モニターアーム/胸上トレー搭載時は選択不可
ボール固定装備	モニターアーム	▲	▲	モニターブラケット/胸上トレー搭載時は選択不可
	胸上トレー	▲	▲	モニターブラケット/モニターアーム搭載時は選択不可
	ティッシュボックス	▲	▲	
	小物置き	▲	▲	
フットコントローラー	横スライド式S型(チェアスイッチなし)	○	○	オプションでチェアスイッチ追加可能
	踏み込み式930型	■	■	
	ジョイスティック チェア取付	■	■	