

NOVA SEASONS α

爽やかな季節がやってきた。



カウンター2型（オーバーアーム）
※オプション装着例です。

ちょっとずつバージョンアップすればいいんです。そのための「シーズンズα」ですからね。

Option Item ●オプションインストルメント・チェア・テーブル・スピットンエリア

もっと便利にする、もっとみんなを笑顔にするオプション。
診療の幅をさらに広げるさまざまな機能。用途に合わせて数々のオプションをご用意しました。

オプション/インストルメント

<p>光付きマイクロモーター ●ジェーエフワン 40DS-LUX</p> <p>一般名称：歯科用電気回転駆動装置 承認番号：2100GBZZ00052000（管理 特管） 製造販売元：吉田精工（株）</p>	<p>光付5倍速マイクロモーターハンドピース ●YW SV200MLX</p> <p>一般名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース 承認番号：2119AKBZX00160000（管理 特管） 製造販売元：株式会社製作所</p>	<p>光付5倍速マイクロモーターショートハンドピース ●YW SV200MLXS</p> <p>一般名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース 承認番号：2119AKBZX00160000（管理 特管） 製造販売元：株式会社製作所</p>	<p>PMTC 専用ハンドピース ●プロフィーコントラハンドピース 8MIIA</p> <p>一般名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース 承認番号：2090GBZZ00015000（管理 特管） 製造販売元：株式会社製作所</p>
<p>超音波スケーラー ●ピエソII（光なし / 光付き）</p> <p>一般名称：歯科用多目的超音波治療器 承認番号：227AKBZX00076000（管理 特管） 製造販売元：（株）吉田製作所</p>	<p>超音波スケーラー ●ニュートン（光なし / 光付き）</p> <p>一般名称：歯科用多目的超音波治療器 承認番号：224ALBZX00038000（管理 特管） 製造販売元：株式会社製作所</p>	<p>超音波スケーラー ●ブチピエソII（光なし / 光付き）</p> <p>一般名称：歯科用多目的超音波治療器 承認番号：220ACBZX00050000（管理 特管） 製造販売元：（株）吉田製作所</p>	<p>PMTC サブソニックシステム ●ユリー</p> <p>一般名称：歯科用エアスケール 承認番号：226AKBZX00111000（管理 特管） 製造販売元：（株）ミクロン</p>
<p>エアスケラー・根管拡大・洗浄装置 ●ルーティー 560-YL-Neo</p> <p>一般名称：歯科用エアスケール 承認番号：20700BZX00045000（管理 特管） 製造販売元：（株）ミクロン</p>	<p>エアスケラー ●ポビー</p> <p>一般名称：歯科用エアスケール 承認番号：231AKBZX00013000（管理 特管） 製造販売元：（株）ミクロン</p>	<p>根管拡大装置 ●ソニックエンド</p> <p>一般名称：歯科用根管拡大装置 承認番号：226AKBZX00040000（管理 特管） 製造販売元：（株）ミクロン</p>	<p>歯面清掃器 ●クイックジェット M</p> <p>一般名称：駆動型機器歯面清掃器具 承認番号：21900BZX00750000（管理 特管） 製造販売元：（株）ミクロン</p>

オプション/チェア/テーブル/スピットンエリア

<p>ヘッドレスト ●ユニバーサルヘッドレスト</p>	<p>LED ライト ●ルキオン 12/24</p> <p>一般名称：汎用歯科用照明器具 承認番号：0802X0001000006（一般） 製造販売元：吉田精工（株）</p>	<p>ティッシュボックス ●ライトボール取付ティッシュボックス</p>	<p>アシスタントハンガー ●2ハンド用ハンガー受</p>
<p>フットコントローラ ●踏み込み式 930 型</p>	<p>●横スライド式S型</p> <p>※チェアスイッチはオプションです</p>	<p>スピットン ●陶器製スピットン（左から・うす墨・青磁・瑠璃）</p>	

Sheet Color ●シートカラー

デンタルオフィスのデザインに合わせてお選びいただけます。

標準色	オプション色
<ul style="list-style-type: none"> ブラック ピーチ スノーホワイト ダークブルー ウォーターブルー アップルグリーン サマーイエロー 	<ul style="list-style-type: none"> グリーンメタリック ボルドーメタリック ブラックメタリック オーシャンメタリック

●仕様・型式◎商品名：ノバシーズンズα◎電源：AC100V50/60Hz ◎消費電力：750VA ◎チェアタイプ：カウンター1型（ベースマウント）・2型（オーバーアーム）・3型（カート）/前折れステップ1型（ベースマウント）・2型（オーバーアーム）・3型（カート）
●標準装備◎タービン1回路：ルナス1 ◎マイクロモーター1基：40C【内部注水】◎マイクロモーターハンドピース：エキスパートマテックE20C/E10C ◎トリプルシリンジ：905シリンジ1基
◎シリコンホース◎パキウム：セントラル方式 ◎排膿：セントラル方式 ◎オペレーターランプライト：無影灯Lライト（HI）◎フットスイッチ：横スライドS型（チェア作動SWなし）◎コップ給水：光センサー/タイマー式
◎水除菌フィルタ【ユニボア】◎チェアアームレスト【ユニット型】◎ヘッドレスト：縦横保持型
●販売名：U26ユニット ◎一般名称：歯科用ユニット ◎承認番号：304AGBZX00078000（管理 特管 設置） ※ノバシーズンズαの販売名はU26ユニットです。

※当カタログに掲載の商品仕様（2022年11月）は、改良等により予告なく変更する場合があります。また、掲載商品の色調は実際の商品と異なる場合があります。
●お問い合わせは下記まで

禁無断転載



カウンター2型（オーバーアーム）
※オプション装着例です。

3型（カート）
※オプション装着例です。

NOVA SEASONS α

明るく爽やかな診療空間創りを演出。
 チェアとテーブルの組み合わせで、
 計6つのバリエーションからお選びいただけます。



カウンター1型（ベースマウント）
 ※オプション装着例です。



前折れステップ1型（ベースマウント）
 ※オプション装着例です。



前折れステップ2型（オーバーアーム）
 ※オプション装着例です。

シンプルイズベストな仕様でコストパフォーマンスを
 追求し誕生した「ノバ シーズンズα」。
 オプション品も充実していますので、
 先生の診療スタイルに合わせた仕様を実現します。

さまざまな
 インstrument類をご用意



光付インストゥルメントを各種ご用意。術視野をいっそう明るく自然に確保し、常に安定した診療を行えます。

※オプション

乗り降りと診療姿勢を考えた
 最低位 380mm・最高位 700mm



小さな子供や老人、体の不自由な患者さんが乗り降りをスムーズに行えるように、また楽な姿勢で診療が可能な最低位 380mm/最高位 700mm に設定しました。（カウンタータイプ）

ノーズニーポジションで
 患者さんに安心感とリラックスを



ノーズニーポジションは横隔膜が圧迫されず呼吸が楽にできるポジション。患者さんの鼻と膝が同じ高さになることでリラックスできる体勢を作ります。

自然な明るさで
 口腔内状況を視認できます



口腔内を自然な明るさで照らすLED無影灯。診療中の口腔内状況、例えば出血時でも治療部位が判別しづらくなるよう設計されています。


各回路を毎日洗浄
 フラッシングボウル



フラッシング機能で各給水回路から残留水の自動排出が可能です。フラッシングボウルをセットし、各ホースをボウル内に接続。ボタン操作で簡単にフラッシング作業を行うことができます。

※オプション

シンプルで使いやすい
 操作パネル

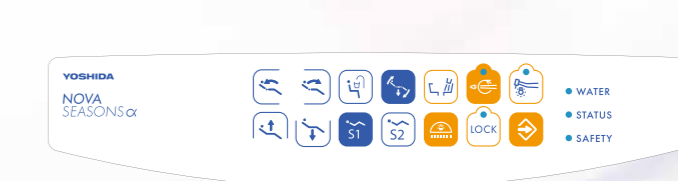

シンプルで使いやすい操作パネル。ピクトグラムボタンでチェアの動きやハンドピースの制御、メモリー機能にアクセスします。

清潔感溢れる
 洗口エリア



取り外し可能な陶器製の鉢を採用した洗口エリア。排唾等で汚れやすい鉢のメンテナンスを容易にします。