

NOVA SEASONS α

爽やかな季節がやってきた。



カンター 2 型 (オーバーアーム)
※オプション装着例です。



3 型 (カート)
※オプション装着例です。

カンター 2 型 (オーバーアーム)
※オプション装着例です。

Option Item ●オプションインストルメント・チェア・テーブル・スピットンエリア

もっと便利にする、もっとみんなを笑顔にするオプション。
診療の幅をさらに広げるさまざまな機能。用途に合わせて数々のオプションをご用意しました。

オプション/インストルメント

<p>光付きマイクロモーター ●40DSa</p>  <p>販売名: 805 マイクロモーター 一般的名称: 歯科用電気回転駆動装置 認証番号: 305AKBZ00033000 (管理 特管) 製造販売元: 吉田精工株式会社 茨城県行方市八木町 660</p>	<p>光付 5 倍速マイクロモーター ●YN200MLX</p>  <p>販売名: エスマックス MC (YN200MLX) 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース 認証番号: 221ALBZX00020000 (管理 特管) 製造販売元: 株式会社ナカニ 栃木県鹿沼市下日向 700 番地</p>	<p>光付 5 倍速マイクロモーター ●MaxiDrive YK25L</p>  <p>販売名: ヨシダ MaxiDrive YK25L 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース 認証番号: 223ABZX00039400 (管理 特管) 製造販売元: カオプランカジヤC株式会社 大阪府八尾市神武町 2-24</p>	<p>PMTC 専用ハンドピース ●プロファイアコントラハンドピース 8MIIA</p>  <p>販売名: コントラハンドピース 8M 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース 認証番号: 20900BZ00015000 (管理 特管) 製造販売元: 株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋 1-3-6</p>
<p>超音波スケーラー ●ピエソII (光なし / 光付き)</p>  <p>販売名: ピエソ II 一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器 認証番号: 227AKBZX00076000 (管理 特管) 製造販売元: 株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋 1-3-6</p>	<p>超音波スケーラー ●ニューロン (光なし / 光付き)</p>  <p>販売名: ニューロン モジュールキット 一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器 認証番号: 224ALBZX00038000 (管理 特管) 製造販売元: 白水製薬株式会社 大阪府大阪市淀川区高島 1-1-1</p>	<p>超音波スケーラー ●フチピエソII (光なし / 光付き)</p>  <p>販売名: フチピエソ 一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器 認証番号: 220ABZX00050000 (管理 特管) 製造販売元: 株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋 1-3-6</p>	<p>PMTC サブソニックシステム ●ユリアス</p>  <p>販売名: ユリアス 一般的名称: 歯科用エアスケーラー 認証番号: 226AKBZX00111000 (管理 特管) 製造販売元: 株式会社ククロン 東京都大田区池上 2-17-7 ※ユリアス系の販売名はユリアスです。</p>
<p>エアスケーラー・根管拡大・洗浄装置 ●ルーティ 560-YL-Neo</p>  <p>販売名: ルーティ 560 一般的名称: 歯科用エアスケーラー 認証番号: 20700BZ00045000 (管理 特管) 製造販売元: 株式会社ククロン 東京都大田区池上 2-17-7</p>	<p>エアスケーラー ●ポビー</p>  <p>販売名: ポビー 一般的名称: 歯科用エアスケーラー 認証番号: 231AKBZX00013000 (管理 特管) 製造販売元: 株式会社ククロン 東京都大田区池上 2-17-7</p>	<p>根管洗浄装置 ●ソニックエンド</p>  <p>販売名: ソニックエンド 一般的名称: 歯科用根管拡大装置 認証番号: 229AKBZX00040000 (管理 特管) 製造販売元: 株式会社ククロン 東京都大田区池上 2-17-7</p>	<p>歯面清掃器 ●クイックジェット M</p>  <p>販売名: クイックジェット M 一般的名称: 電動型歯器歯面清掃用器具 認証番号: 21900BZ00075000 (管理 特管) 製造販売元: 株式会社ククロン 東京都大田区池上 2-17-7</p>

オプション/チェア/テーブル/スピットンエリア

<p>ヘッドレスト ●ユニバーサルヘッドレスト</p> 	<p>LED ライト ●ルキオン 12/24</p>  <p>販売名: ルキオン 一般的名称: 汎用歯科用照明器具 最出番号: 08BZX0001000006 (一般) 製造販売元: 吉田精工株式会社 茨城県行方市八木町 660</p>	<p>ティッシュボックス ●ライトボール取付ティッシュボックス</p> 	<p>アシスタントハンガー ●2 ハンド用ハンガー受</p> 
<p>フットコントローラ ●踏み込み式 930 型</p> 	<p>横スライド式 S 型</p>  <p>※チェアスイッチはオプションです</p>	<p>スピットン ●陶器製スピットン (左から・うす墨・青磁・瑠璃)</p> 	

Sheet Color ●シートカラー

デンタルオフィスのデザインに合わせてお選びいただけます。

標準色	オプション色
<ul style="list-style-type: none"> ブラック ピーチ スノー ダーク ウォーター アップル サマー 	<ul style="list-style-type: none"> グリーン ホルド ブラック ブルー オーシャン

●仕様・型式◎商品名: ノバシーズンα◎電源: AC100V50/60Hz ◎消費電力: 750VA ◎チェアタイプ: カンター 1 型 (ベースマウント)・2 型 (オーバーアーム)・3 型 (カート) / 前折れステップ 1 型 (ベースマウント)・2 型 (オーバーアーム)・3 型 (カート)
●標準装備◎タービン 1 回路: ルナサス 1 ◎マイクロモーター 1 基: 40DSa [内部注水] ◎マイクロモーターハンドピース: エキスパートマテック E20C / E10C ◎トリプルシリンジ: 905 シリンジ 1 基
◎シリコンホース◎パキューム: センtral方式 ◎排膿: センtral方式 ◎オペレーターライト: 無影灯 L ライト (HI) ◎フットスイッチ: 横スライド S 型 (チェア作動 SW なし) ◎コップ給水: 光センサー / タイマー式
◎水除菌フィルター [ユニエア] ◎チェアアームレスト [ユニット側] ◎ヘッドレスト: 縦横保持器 ◎エアフィルター
●販売名: U26 ユニット ◎一般的名称: 歯科用ユニット ◎認証番号: 304AGBZX00078000 (管理 特管 設置) ◎製造販売元: 吉田精工株式会社 茨城県行方市八木町 660 ※ノバシーズンαの販売名は U26 ユニットです。

※当カタログに掲載の商品仕様 (2026 年 6 月) は、改良等により予告なく変更する場合があります。また、掲載商品の色調は実際の商品と異なる場合があります。 **無断転載禁止**

●お問い合わせは下記まで



YOSHIDA

NOVA SEASONS α

明るく爽やかな診療空間創りを演出。
 チェアとテーブルの組み合わせで、
 計6つのバリエーションからお選びいただけます。



カウンター1型（ベースマウント）
 ※オプション装着例です。



前折れステップ1型（ベースマウント）
 ※オプション装着例です。



前折れステップ2型（オーバーアーム）
 ※オプション装着例です。

シンプルイズベストな仕様でコストパフォーマンスを
 追求し誕生した「ノバ シーズンズα」。
 オプション品も充実していますので、
 先生の診療スタイルに合わせた仕様を実現します。

さまざまな
 インstrument類をご用意



光付インストゥルメントを各種ご用意。術視野をいっそう明るく自然に確保し、常に安定した診療を行えます。

一部オプション

乗り降りと診療姿勢を考えた
 最低位 380mm・最高位 700mm



小さな子供や老人、体の不自由な患者さんが乗り降りやスムーズに行えるように、また楽な姿勢で診療が可能な最低位 380mm/最高位 700mm に設定しました。（カウンタータイプ）

ノーズニーポジションで
 患者さんに安心感とリラックスを



ノーズニーポジションは横隔膜が圧迫されず呼吸が楽にできるポジション。患者さんの鼻と膝が同じ高さになることでリラックスできる体勢を作ります。

自然な明るさで
 口腔内状況を視認できます



口腔内を自然な明るさで照らす LED 無影灯。診療中の口腔内状況、例えば出血時でも治療部位が判別しづらくなるよう設計されています。


各回路を毎日洗浄
 フラッシングボウル



フラッシング機能で各給水回路から残留水の自動排出が可能です。フラッシングボウルをセットし、各ホースをボウル内に接続。ボタン操作で簡単にフラッシング作業を行うことができます。

一部オプション

シンプルで使いやすい
 操作パネル

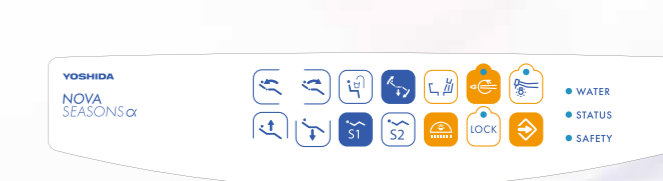

シンプルで使いやすい操作パネル。ピクトグラムボタンでチェアの動きやハンドピースの制御、メモリー機能にアクセスします。

清潔感溢れる
 洗口エリア



取り外し可能な陶器製の鉢を採用した洗口エリア。排唾等で汚れやすい鉢のメンテナンスを容易にします。