

■ 模型スキャナー

スピード・精度・操作性に優れ、洗練されたデザインです。



Coex T7+



Coex T5+



Coex T3+

フルアーチスキャン時間 (ベース&対合)	8 秒	12 秒	18 秒
精度	4 μm	7 μm	9 μm
カメラ	5.0MP×4	5.0MP×2	5.0MP×2
オートエレベーション	○	○	○
カラーテクスチャー	○	○	○
咬合器スキャン	○	○	オプション
印象スキャン	○	－	－
レプリカデンチャー	○	オプション	オプション
フレキシブルスキャン	○	○	オプション
標準価格	¥2,580,000	¥1,680,000	¥980,000

■ ミリングマシン

湿式乾式両用・5軸加工対応の実用性に特化。

様々な症例・材料に対応しています。



Coex450



Coex400




Coex300Pro

寸法	W790×D790×H1,645 mm	W545×D590×H1,630 mm	W545×D590×H1,580 mm
重量	250 kg	160 kg	155 kg
精度	± 5 μm	± 5 μm	± 5 μm
対応症例	クラウン・インレー / アンレー・ブリッジ・穴あきクラウン		
対応材料	レジンブロック・セラミックブロック・ジルコニアディスク・PMMA ディスク・WAX ディスク・チタンディスク	レジンブロック・セラミックブロック・ジルコニアディスク・PMMA ディスク・WAX ディスク	
標準価格	¥ 9,900,000	¥ 6,950,000	¥ 6,800,000

MEDIT iSeries

Intra Oral Scanner

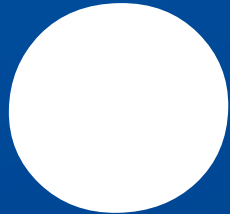

YOSHIDA

Series

販売名：i600&i700 オーラルスキャナ 一般的名称：デジタル印象採得装置 / 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
承認番号：30300BZi00031000（管理 特管）
※「i700 ワイヤレス」「i700 オーラルスキャナ」「i600 オーラルスキャナ」の販売名は、「i600&i700 オーラルスキャナ」です。
製造販売元：株式会社ダブリューエスエム 石川県金沢市高尾南 2-33-101

○一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス T3プラス 届出番号：13B1X00005000243（一般）
○一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス T5プラス 届出番号：13B1X00005000244（一般）
○一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス T7プラス 届出番号：13B1X00005000245（一般）
○一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス 450 届出番号：13B1X00005000242（一般）
○一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス 400 届出番号：13B1X00005000232（一般）
○一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス 300 プロ 届出番号：13B1X00005000248（一般）

製造販売元：株式会社ヨンダ 東京都台東区上野 7-6-9

販売元：株式会社ヨシダ
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 コンタクトセンター TEL.0800-170-1170

※仕様および外観は製品改良等のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※このカタログに記載の価格は 2025 年 8 月現在の標準価格（税別）です。

（税別価格）



C02501/2025 年 8 月 /@150/ 改

あなたに合ったスキャナーで
診療をスタイリッシュに

MEDIT *i*Series

スピーディーなスキャンを実現。
高画質・高精度なデータで、快適な診療をサポートします。



i600

i700

i700 wireless

i700 wireless

Magic Made Easy with a Simple Touch

i700のハイスペックさをそのままに
より操作性に優れたワイヤレスに

製品の
WEBサイト
はこちら



ワイヤレス

ケーブルがないため、どの角度でも快適にスキャンできます。近接部もスキャンしやすく、動きに制約がありません。



高速スキャン

最大 70FPS* でスキャンができるため、スキャン時間の短縮を可能にします。
*Frames per second：1秒間にスキャンするデータのフレーム数



軽量

328g(バッテリー+チップ込み)と非常に軽量なため、持ちやすく、スキャン中の負担を軽減します。

広いスキャンエリア

一度に広範囲を読み込むことができます。

180°回転チップ

上向きに装着できるため、上顎のスキャン時に持ちやすくなります。

リモートコントロールモード

PCに触らずに画面上のスキャンデータを操作できます。

UV-C LEDライト

UV-C LEDによってスキャナーを清潔に使用できます。

次世代通信技術 mmWave 採用

60GHzの高い周波数で大容量のデータ伝送をスムーズに行います。

長いバッテリー寿命

バッテリー寿命は最大8時間です。

連続スキャン

スタンバイモード

1時間
最大8時間*

*バッテリーの寿命は使用環境(温度、電波強度等)、バッテリーの状態により異なります。

安定したバランス

バッテリーを装着した状態でも、安定した重量バランスで快適に使用できます。

3つのバッテリーが付属されているので、1つのバッテリーの充電がなくなってもすぐに交換できます。3つ同時に充電可能です。



インテリジェントパワーマネジメント機能搭載。未使用時は自動的にスリープモードに切り替わり、最大8時間スタンバイ。スタンバイ状態からスキャン再開に必要な時間はわずか数秒です。



3つのバッテリーを使い切ってしまった場合、電源ケーブルを接続するだけで、スキャナーを使い続けられます。



i700

Unleash Your Clinic's Potential

ハイスピードスキャン


最大70FPSでスキャンができるため、短時間でスキャンが完了します。
チェアタイムが短くなり、患者様、術者の負担が軽減します。
時間の削減ができるため、治療効率の向上が期待できます。

製品の
WEBサイト
はこちら



180°回転チップ

上向きに装着できるため、
上顎のスキャン時に
持ちやすくなります。

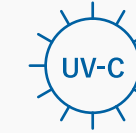

UV-C LEDライト

UV-C LED によって
スキャナーを清潔に使用できます。



245gの軽量さ

本体重量 245gと非常に軽量で、
持ちやすくなっています。




広いスキャンエリア

一度に広範囲を
読み込むことができます。



リモートコントロールモード

リモートコントロールモードで
パソコンに触れずに
画面の操作が可能です。

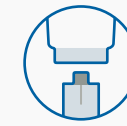

取り外し可能なケーブル

スキャナー本体から
ケーブルの取り外し可能です。

PCまわりをきれいに

USB Type-C ポートにケーブル 1 本で接続。
電源ハブや余分なケーブルがなくなり、
持ち運びしやすく、PCまわりがすっきりします。



i600

Digital Dentistry at Your Fingertips



製品の
WEBサイト
はこちら



シンプルで簡単操作

ボタン1つでスキャンをコントロール。
シンプルなデザインで、直感的な操作が可能。
初めて口腔内スキャナーを利用する方、
デジタル歯科を始めたい方におすすめです。

MEDIT iSeries



180°回転チップ

上向きに装着できるため、
上顎のスキャン時に
持ちやすくなります。



スキャン開始

スキャンの開始 / 停止の
コントロールします。



245gの軽量さ

本体重量 245gと非常に軽量で、
持ちやすくなっています。



広いスキャンエリア

一度に広範囲を
読み込むことができます。



取り外し可能なケーブル

スキャナー本体から
ケーブルの取り外し可能です。

PCまわりをきれいに

USB Type-C ポートにケーブル 1 本で接続。
電源ハブや余分なケーブルがなくなり、
持ち運びしやすく、PCまわりがすっきりします。



iシリーズ 比較表

カテゴリー		i600 オーラルスキャナ	i700 オーラルスキャナ	i700 ワイヤレス
外観写真				
スキャン技術	フレームレート	35 FPS	70 FPS	
	光源	LED		
精度	フルアーチ	10.9μm ± 0.98		
ハンドピース	寸法	248 × 44 × 47.4 mm		313 × 44 × 47.4 mm
	重量	245g		328g（バッテリー＆チップ含む）
チップ	スキャン領域	15 × 13 mm		
	Reversible Tip	○	○	○
モード	リモートコントロール	×	○	○
	UV-C LED	×	○	○
	スマートシェードガイド	○	○	○
	HD モード	×	○	○
接続方法	タイプ	ワイヤーあり USB3.1 ケーブル		ワイヤレス バッテリー付きケーブル
	ケーブル接続	○	○	○ （バッテリー充電器に直接接続）
	ケーブル取り外し	○	○	○

MEDIT iSeries

i700 wireless



i700



i600



フルサポート保証
(5年)

i700 wireless

フルサポート保証

標準価格 400,000 円

i600・i700

フルサポート保証

標準価格 300,000 円

関連製品

	i700 wireless 標準価格 3,300,000 円	i700 標準価格 2,500,000 円	i600 標準価格 1,580,000 円
チップ	i700 ワイヤレスチップ (4個) 標準価格 62,800 円 	i700 オーラルスキャナ チップ (4個) 標準価格 62,800 円 	i600 オーラルスキャナ チップ (4個) 標準価格 62,800 円 
ケーブル	ケーブル付きバッテリー 標準価格 62,800 円 	USB 3.1 ケーブル 標準価格 34,600 円 	USB 3.1 ケーブル 標準価格 34,600 円 
バッテリー	バッテリー (3個) 標準価格 61,500 円 	—	—
ワイヤレスハブ	マルチハブセット* 標準価格 391,000 円 	—	—

* セット品はワイヤレスハブ、USB3.1 ケーブル、USB3.0 ケーブル、電源コード&アダプター、ワイヤレスハブホルダーです。



SC108 スキャンカート

標準価格 128,000 円

※対応機種：i700 オーラルスキャナ
i600 オーラルスキャナ