



**SERIO** *Mu*

販売名: U23 ユニット  
一般的名称: 歯科用ユニット  
認証番号: 303AKBZX00064000 (管理 特管 設置)  
製造販売元: 吉田精工株式会社 茨城県行方市八木崎 660  
セリオ Mu の販売名は U23 ユニットです。



ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

**0800-170-5541**

〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9

<https://www.yoshida-dental.co.jp>



C02354/2024年12月/GRA/@240/改

ひとに寄りそう

**SERIO** *Mu*



患者さんにも、ドクターにもやさしい、  
新しいセリオの登場です。  
緊張と不安を少しでも和らげるために  
シートの安定感と、快適な座り心地を追求しました。  
シンプルでわかりやすい操作性に磨きをかけ、  
スムーズで思いどおりの治療をサポートします。

「寄りそう」をかたちにしたセリオ Mu で  
すべてのひとに気持ちいい診療空間へ。

セリオ Mu : <sup>ミュー</sup>Mu とは “ザ <sup>ザ</sup>フィーリング <sup>イズ</sup>is <sup>ミューチュアル</sup>mutual.”  
『同じ気持ちだよ』

セリオ Mu  
プロモーション動画



ゆったりと身をゆだねられる  
最高級ソファのような心地よさ

— Fukka-Fuka シート —



快適な質感とやわらかさで  
リラックスできる診療時間へ



職人の手で一点一点丁寧に

多層構造のクッションとそのやわらかさを  
最大限に活かすために、ギャザーをよせて  
レザーを贅沢に使用。シート縫製は、職人  
の手で一点一点丁寧に仕上げられています。





使いやすさと、  
思いやりを、  
ひとつに

静かな動きで、やすらぎを提供

ショックレス機構により、チェアを動かす際の振動や音を大幅に軽減しました。診療開始の緊張感を与えることなく、穏やかな診療空間を演出します。

カームモーションヘッドレストはエア一圧と油圧を組み合わせた機構により、動作音を最小限に抑え、静かでなめらかな動きを実現。チェアの動きと連動し、患者さんにやすらぎを提供します。



高低差400mmのロングストローク。  
だから、ドクターも患者さんも使いやすい。

当社ユニットで最も高い、最高位835mm<sup>\*</sup>を実現しました。術者は楽な姿勢で立位診療に対応できます。高齢者や小児の患者さんに対しては、最低位を低くすることでスムーズな乗り降りができるように配慮しました。

※前折れステップの場合。  
カンター/前折れタイプの場合は800mm



最高位 800mm (カンター、前折れ)  
835mm (前折れステップ)

最低位 400mm (カンター、前折れ)  
435mm (前折れステップ)



**Calm Motion Headrest** カームモーションヘッドレスト  
option

頸椎をサポートし、頭の動きに沿う位置へ調整することができるので、患者さんに合わせた開口しやすいポジションを確保できます。チェアの動作と連動し、ボタン一つで設定したポジションへ移動します。ヘッドレストの操作はチェア背板に備えられたスイッチとフットコントローラーで操作が可能です。治療中でも微細な調整ができます。



**頸椎保持型2軸ヘッドレスト**  
2軸可動式により、患者さんに合わせた頭部の角度調整が可能に。頸椎を支え、開口しやすいポジションをサポート。



**ユニバーサルヘッドレスト  
レバー固定式/エア固定式**  
option  
枕の可動軸にボールジョイントを追加。寝起き方向だけでなく、左右にもヘッドレストを傾けることができます。処置部位に合わせて、ヘッドレストを適切な角度に固定できるので、スムーズに診療を行うことができます。



スイッチ



**患者さんの頭の位置が  
前後しない  
垂直上昇機構**


チェアが垂直上昇するため、患者さんの頭の位置が前後しません。診療ポジションの調整を最小限に抑えます。

手を使わず衛生的にチェアを操作



**ジョイスティック**  
option

足元のジョイスティックは感覚的で細やかなチェアの操作や、カームモーションヘッドレストの操作が可能です。手で触れる必要がなく衛生的です。

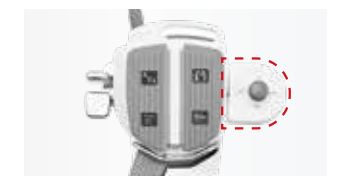

**枕操作スイッチ (FC 取付用)**  
option

フットコントローラー拡張型の枕操作スイッチ。カームモーションヘッドレストを選択した場合、フットコントローラーに枕操作スイッチが標準で搭載されます。  
※移動用フックの同時搭載はできません。

高い拡張性  
真価を引き出す  
セリオMuの



ベーシックでありながら、  
その拡張性により高い性能を実現。  
目的に合わせたカスタマイズで、  
診療精度をさらに高めます。


エアーと水がもたらす  
ユーザービリティ



#### クールシート option


クールシートは猛暑や蒸し暑い環境でも、患者さんに爽快感を提供する機能です。シートからエアーが流れ出る機構により、患者さんに心地よい涼しさを提供し、長時間の診療でも快適にお過ごしいただけます。汗の付着や蒸れを防止することで、お洋服の色移りが発生しにくくなります。

※Fukka-Fukaシート搭載の場合のみ、対応可能。

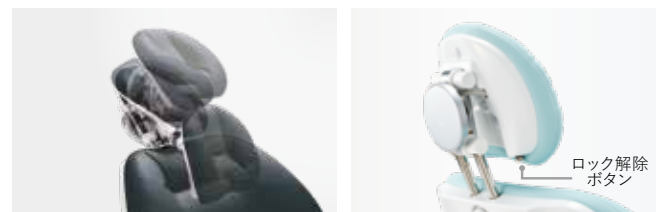

#### エアー固定式ヘッドレスト option

ボタン一つで枕の固定を解除できます。患者さん毎のヘッドレストの位置付けが簡単にできます。2軸可動式、ユニバーサル式のヘッドレストに対応しています。

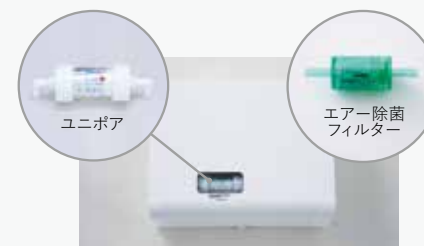

#### 除菌水フィルター「ユニポア」 「エアー除菌フィルター」

ユニポアは最大孔径0.1マイクロメートルの中空糸膜により赤錆・水アカを除去し、きれいな水をつくります。エアー除菌フィルターは、エアーをきれいに保ちます。交換の目安はそれぞれ6ヶ月です。



#### きれいな水と空気をつくる ポセイドン option

給水回路の水道水を電解し成分を補正することで、水道水の中に存在している細菌やウイルスを除菌。ユニットウォーターライン内の菌の繁殖を抑制します。

詳細はカタログをご覧ください。



#### ウルトラファインバブル Ultra Fine Bubble を生み出す 歯科ユニット用ウルトラジョイント option

流量が少ないユニットウォーターラインの水を一気に圧縮することで直径約1マイクロメートル未満の超微細な泡を発生させます。UFBが水の表面張力を低下させることで、ユニットウォーターラインの洗浄性能を高めます。

詳細はカタログをご覧ください。





ひとときを  
気持ちのいい  
ストレスなく、



セリオ Mu R (鉢回転タイプ)

### 診療スタイルに適應する 2種のスピットンタイプ

スピットンは鉢回転タイプ・鉢固定タイプの2種類をご用意。医院の診療スタイルに合わせてお選びいただけます。

#### [セリオ Mu R] 鉢回転タイプ

スピットンが自動で回転するように設計されています。

#### [セリオ Mu] 鉢固定タイプ

スピットンが患者さんの体側にせり出すよう設計されています。

セリオ Mu (鉢固定タイプ)




ずっとクリーンな環境を維持するための工夫をご用意しました。



#### 取り外してまるごと洗える スピットンボウル

スピットンボウルを取り外すことができるので、日々のメンテナンスも簡単です。患者さんの目につきやすい部分を清潔に保てます。

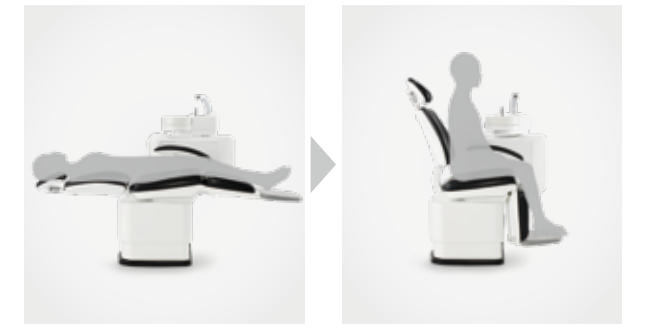

#### スムーズにうがいポジションへ チェアマウントユニット

チェアとユニット部が一体化しているため、うがいの際にチェアを下げる操作が不要です。身体を起こしてすぐ、うがいすることができます。



#### 正面を向いたまうがい可能 自動回転式スピットン

うがいをする際に、自動で患者さんの正面まで回転するスピットンです。無理に身体をひねる必要が無く、吐きこぼしを軽減します。  
([セリオMu R] 鉢回転タイプのみ)



#### スムーズなうがい動作とメンテナンス性を両立した 回転式給水塔

診療中のコップの置きやすさと、診療後のメンテナンスしやすさを考慮し、回転式給水塔を採用しました。  
([セリオMu] 鉢固定タイプのみ)



#### チェア上での患者さんの動作を考慮した アシンメトリーデザイン

体をスピットンに寄せやすい、滑らかなカーブを描くデザインです。患者さんは自然な姿勢でうがいすることができます。  
([セリオMu] 鉢固定タイプのみ)



#### 水回路を清潔に保つ オートフラッシング機能 option

口腔内に入るすべてのインストゥルメント類とコップ給水の滞留水を自動サイクルで排出し、水回路をクリーンに保ちます。鉢回転タイプ・鉢固定タイプ、それぞれ専用のフラッシングボウルをご用意しています。


目の前の診療に  
集中できる  
操作性を実現



ワンランク上の操作性で効率化をサポート

4.3 インチ液晶タッチパネル **option**

チェアやインストルメントの状態をわかりやすく表示します。カラー表示&タッチパネルは、直感的な操作が可能です。

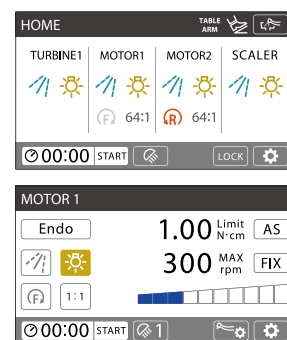

エンドモード

ブラシレス光付ワイドレンジマイクロモーター  
40is-LUX **option**

回転数制御、トルク値制御、オートリバース機能を搭載できます。エンド専用モータを使用することなく根管治療が可能です。



販売名：40is-LUXモーター  
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置  
認証番号：227A0BZ100008Z00（管理 特管）  
選任製造販売業者：AJMD株式会社  
東京都中央区東日本橋  
2丁目4番5号真光ビルディング



色分けで誤操作を防ぐ  
パネルボタン

用途に合わせて色分けされた操作ボタンの間隔を広くとり配置しました。誤操作を防ぎ、直感的な操作をサポートします。



感覚的な微調整が可能  
テーブル前部つまみ

エアタービン、マイクロモーターの出力・水流量などを手元のつまみで感覚的に調整できます。



視線を切らずに取り出せる  
インストルメントハンガー


独立可動方式を採用しました。使いやすいポジションに移動できます。

診療スタイルや患者さんの年齢層に適したチェアタイプをお選びいただけます。




カウンターチェア

脚のラインにフィットし、座り心地が良いタイプ。若い患者さんや予防歯科がメインの医院にオススメです。

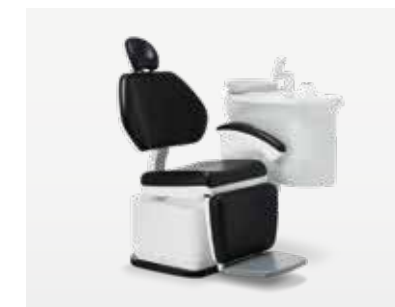

前折れステップチェア

ステップがあり、おさまや高齢の方でも座りやすいタイプ。小児歯科や高齢者が多い医院にオススメです。

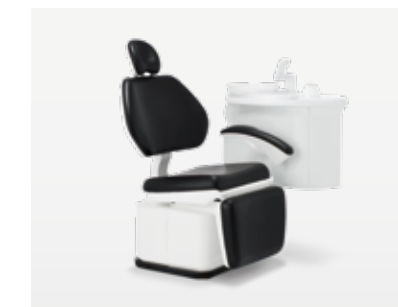

前折れチェア

段差がなく、乗り降りしやすいタイプ。土足スタイルを採用している医院にオススメです。

テーブル



1型 (ベースマウント)



2型 (オーバーアーム) ※セリオMu Rでは選択不可



3型 (カート)



フライング A ※セリオMu Rでは選択不可



フライング Lm ※セリオMu Rでは選択不可

拡張テーブル



胸上トレイ 2型用 **option**



2型用ワイドテーブル **option**



毎日  
の診療  
をサポ  
ート

使  
い心  
地で

軽  
く、  
しな  
やか  
な



### フライングLm

柔軟性の高い板バネを採用し、操作性を追求したフライングシステムでホースを引き出す際に手指にかかる負担を軽減しました。

※セリオMuのみ搭載可能



### インストゥルメントテーブルを 胸上配置

ドクターテーブルを口腔内と同一平面上に胸上配置することで、術視野から目を離すことなく、スムーズな診療ができます。ドクターとアシスタントでテーブルを共有でき、診療時の作業ロスが少なくなります。



### 自由度の高いサブテーブル

310mm×415mmのサブテーブルを標準搭載。必要な器具の置き場所を選択できるため、術者の診療スタイルにあわせて配置できます。



### 4.3インチ液晶タッチパネル

直感的なタッチ操作でスムーズな診療を実現します。スイッチパネルも搭載しており、術者のお好みに合わせて操作可能です。



### 清掃性を高めたハンドピース受け

ハンドピース受けは、シリコン製のカバーで取り外して滅菌できます。ホースが床につかないので、衛生的にご使用いただけます。患者さんの目につきやすいところの清掃性を高めました。



### エアブレーキ ※2型、フライングA、フライングLmで搭載可能

ドクターテーブルの上下の動きを、エア圧によるブレーキで制御。ハンドルを握るとセンサーが反応し、自動的にブレーキが解除され、軽い力でテーブルの高さを調整できます。患者さんの乗り降りの際も、スムーズな操作性を実現しました。通常時はブレーキがかかっているため、テーブル上の器具の増減による意図しない移動を防ぎます。







プライベート空間がもたらす  
コミュニケーションの“かたち”

## type C

診療に適した自然な動線と  
コミュニケーションをスムーズにする  
キャビネット一体型のユニット

## 自由な空間づくり

モニターやPCなどのデジタルツールが配置しやすく、パーテーションの高さや器具の収納棚もバリエーション豊かにご用意。  
医院のデザインや診療スタイルに合わせた自由な選択ができます。

### キャビネット HIGH

高さ約 170cm のハイ・タイプのパーテーション。  
専用のオプション収納棚を最大 4 つ設置することができます。



オプション収納棚装着時  
※掲載の写真はオプション1・3・5・6を組み合わせた際のセットイメージです。

#### キーボードテーブル

標準装備

患者さんの動線と術者の操作性を妨げないスペースを確保するために、90°可動式のキーボードテーブルを標準装備しました。



#### オプション収納棚 option

全 6 種類の収納棚をご用意しました。  
用途やお好みに合わせて自由にレイアウト可能です。

|                                | CLOSE | OPEN |
|--------------------------------|-------|------|
| オプション 1<br>扉付き収納 A             |       |      |
| オプション 2<br>扉付き収納 B             |       |      |
| オプション 3<br>紫外線灯付<br>基本セット収納    |       |      |
| オプション 4<br>ディスプレイ収納 A<br>(扉なし) |       |      |
| オプション 5<br>ディスプレイ収納 B          |       |      |
| オプション 6<br>ミラー扉付き収納            |       |      |


※ベストカップホルダー別売




※キャビネットはLOWタイプもご用意ございます。  
詳細はtypeCユニットのカタログをご覧ください。

## 1,000 通り以上の組み合わせから、 選べるカラー

キャビネット・シート・カラーカバーの組み合わせは、1,000 通り以上！  
医院のデザインや、診療スタイルにあわせてお選びいただけます。

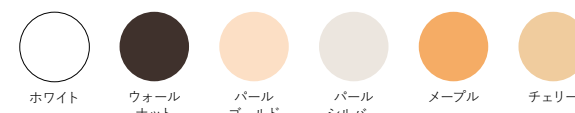

セリオ Mu type C  
カラーシミュレーターは  
こちら

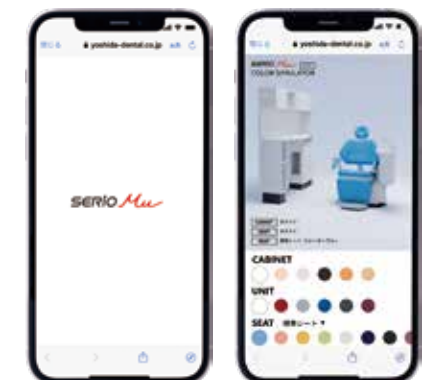

セリオ Mu type C COLOR SIMULATOR 実画面

患者さんが  
まず目にする光景を  
デザインする



あらゆるシーンに対応できる  
多彩な機能とデザインをご用意。  
使いやすさと快適さを追求した  
理想の診療空間をご提案します。

## シートバリエーション

セリオ Mu  
カラーシミュレーション



### 標準シート



座りやすさとメンテナンスしやすさを備えたスタンダードシート。  
豊富なカラーバリエーションをご用意しています。




### Fukka-Fuka シート

option



シートの形状・素材・質感など、最高級ソファのような座り心地を実現しました。

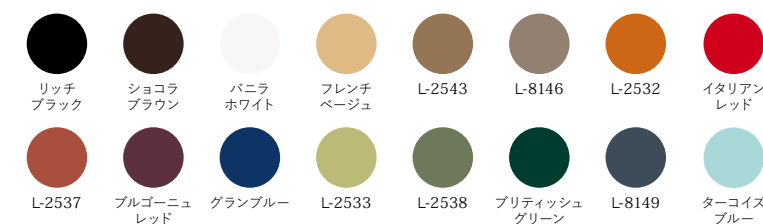

### Fukka-Fuka シート 2 トーンカラー

option



エクストリーム  
レッド

2種類の生地を用いた2トーンカラーシート。従来品とは違った上質さを演出しました。  
品質や性能はもちろん、デザインにもこだわりたい方へ。



ミッドナイト  
グレー




カフェ  
ブラウン

### ユニットカラーカバー





省スペースで導入  
精密治療機器も  
大型の

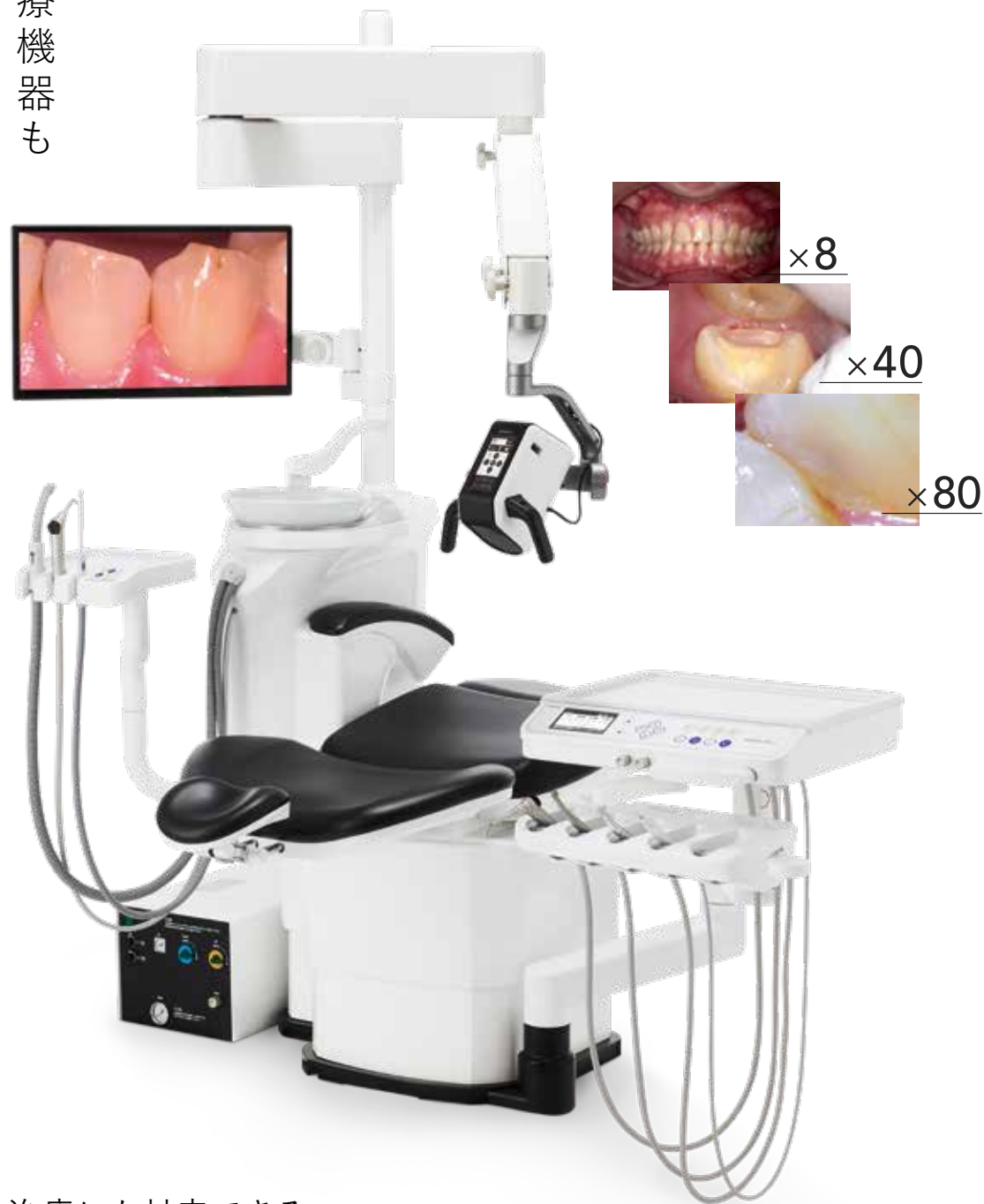

### 微細な治療にも対応できる 診療環境を構築

細かい術部を最大倍率80倍まで拡大し、  
精密な治療をサポートする  
『ネクストビジョン』をマウント装備可能です。  
安定した新型フレーム機構のセリオMuは、  
拡大視野でも振動を最小限に抑え、  
その性能を最大限に引き出します。

#### ネクストビジョンでひろがる臨床の幅

スケーリング／形成／修復／インプラントなど

ネクストビジョンは歯科医療のあらゆる臨床をサポート  
します。右の2次元コードを読み込みますと、ネクストビ  
ジョンで撮影した臨床例がご覧いただけます。



販売名：ネクストビジョン  
一般的名称：手術用顕微鏡 可搬型手術用顕微鏡  
架台式手術用顕微鏡 歯科用口腔内カメラ  
届出番号：13B1X00133000079（一般 特管 設置）  
製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6

## Precision SM620



#### 4 in 1 Module

30°エクステンダー、ビームスプリッター、ターンテーブル、  
4Kカメラが1つにまとまった[4 in 1 module]を標準装備。  
内蔵されている4Kカメラは、フットスイッチまたはワイヤ  
レスマウスで静止画と動画の撮影が可能です。  
詳細は右の2次元コードよりカタログをご参照ください。



販売名：プレジジョン SM620  
一般的名称：手術用顕微鏡 可搬型手術用顕微鏡  
届出番号：27B1X00147000018（一般 特管 設置）  
製造販売元：Angelus Japan株式会社 大阪府茨木市下穂積4丁目13番206

### マイクロスコープによる 精密な治療を可能に

チェアマウントユニットのためチェアを上昇下  
降させても、ワーキングディスタンスを一定に保  
つことができます。また、フレーム構造と油圧シ  
ステムを見直したことで、高耐荷重を実現。  
施術中の揺れを最小限に抑え、精密治療の効  
率化に貢献します。



## テーブル部



保護カバー 標準



テーブルトレイ option



汚物入れスタンド option

## インスツルメント



超音波スケーラー  
ピエゾ S II (光付き / 光なし)  
option

販売名:ピエゾSII  
一般的名称:歯科用多目的超音波治療器  
認証番号:227AKBZX00076000 (管理 特管)  
製造販売元:株式会社吉田製作所  
東京都墨田区江東橋1-3-6



超音波スケーラー  
プチピエゾII (光付き / 光なし)  
option

販売名:プチピエゾ  
一般的名称:歯科用多目的超音波治療器  
認証番号:220ACBZX00050000 (管理 特管)  
製造販売元:株式会社吉田製作所  
東京都墨田区江東橋1-3-6



超音波スケーラー  
ニュートロン (光付き / 光なし)  
option

販売名:ニュートロン モジュールキット  
一般的名称:歯科用多目的超音波治療器  
認証番号:224ALBZX00038000 (管理 特管)  
製造販売元:白水貿易株式会社  
大阪府大阪市淀川区新高1-1-15



クイック・エアスケーラー・  
根管拡大・洗浄装置  
ルーティー 560-YL-Neo option

販売名:ルーティー560  
一般的名称:歯科用エアスケーラー  
認証番号:20700BZZ00045000 (管理 特管)  
製造販売元:株式会社ミクロン  
東京都大田区池上2-17-7



サブソニックプラスシステム  
ユリー option

販売名:ユリー  
一般的名称:歯科用エアスケーラー  
認証番号:226AKBZX00111000 (管理 特管)  
製造販売元:株式会社ミクロン  
東京都大田区池上2-17-7



エアスケーラー  
ポビー option

販売名:ポビー  
一般的名称:歯科用エアスケーラー  
認証番号:231AKBZX00013000 (管理 特管)  
製造販売元:株式会社ミクロン  
東京都大田区池上2-17-7



5倍速光付きマイクロモーター  
ハンドピース  
SV200MLX option

販売名:YWハンドピース  
一般的名称:ストレート・ギアードアングル  
ハンドピース  
認証番号:219AKBZX00160000 (管理 特管)  
製造販売元:株式会社吉田製作所

## 拡張アーム



ディスプレイアーム S option



アーム型胸上トレイ 1・3 型用 option



アーム型胸上トレイ 1・3 型用  
ディスプレイマウント option

## その他



横スライド S 型フットコントローラー  
標準  
※チェアスイッチはオプション



930 型フットコントローラー option



枕操作スイッチ (FC 取付用) option



ジョイスティック option

## ライト



LED 无影灯 L ライト (Hi) 標準  
販売名:Lライト  
一般的名称:汎用歯科用照明器  
届出番号:08B2X00001000012 (一般)  
製造販売元:吉田精工株式会社  
茨城県行方市八木蒔660



LED 无影灯 ルキオン 12/24 option  
販売名:ルキオン  
一般的名称:汎用歯科用照明器  
届出番号:08B2X00001000006 (一般)  
製造販売元:吉田精工株式会社  
茨城県行方市八木蒔660



LED 无影灯 ルキオン CR option  
販売名:ルキオン  
一般的名称:汎用歯科用照明器  
届出番号:08B2X00001000006 (一般)  
製造販売元:吉田精工株式会社  
茨城県行方市八木蒔660

## 仕様／装備表

○:標準 ▲:オプション ■:工場オプション

| 項目               | 品名                               | セリオ Mu<br>(鉢固定タイプ) | セリオ Mu R<br>(鉢回転タイプ) | 備考                |
|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| テーブルタイプ          | 1 型 ベースマウント                      | ○                  | ○                    | 選択                |
|                  | 2 型 オーバーアーム                      | ○                  | ×                    | 選択 (鉢回転タイプでは選択不可) |
|                  | 3 型 カート                          | ○                  | ○                    | 選択                |
| チェアタイプ           | フライング型                           | ○                  | ×                    | 選択 (鉢回転タイプでは選択不可) |
|                  | 前折れステップ                          | ○                  | ○                    | 選択                |
|                  | 前折れ                              | ○                  | ○                    | 選択                |
|                  | カンター                             | ○                  | ○                    | 選択                |
| シート              | 一体成形シート                          | ○                  | ○                    |                   |
|                  | Fukka-Fuka シート                   | ▲                  | ▲                    |                   |
|                  | クールシート (Fukka-Fuka の追加オプション)     | ■                  | ■                    |                   |
| ヘッドレスト           | 2 軸ヘッドレスト レバー固定                  | ○                  | ○                    | 選択                |
|                  | ユニバーサルヘッドレスト レバー固定               | ▲                  | ▲                    | 選択                |
|                  | 2 軸ヘッドレスト エア固定                   | ■                  | ■                    | 選択                |
|                  | ユニバーサルヘッドレスト エア固定                | ■                  | ■                    | 選択                |
| アームレスト           | カムモーションヘッドレスト                    | ■                  | ■                    | 選択                |
|                  | ユニット側アームレスト                      | ○                  | ○                    |                   |
| コップ給水            | ドクター側アームレスト                      | ▲                  | ▲                    |                   |
| 水フィルター           | 水量 超音波式                          | ○                  | ○                    | タイマー式に切り替え可       |
| エアフィルター          | ユニボア                             | ○                  | ○                    |                   |
| 滞留水除去            | エア除菌フィルター                        | ○                  | ○                    |                   |
| ワンタッチジョイント       | フラッシングポウル                        | ▲                  | ▲                    |                   |
|                  | 水ワンタッチジョイント (ユニット装備)             | ○                  | ○                    |                   |
| スπιットポウル         | エアワンタッチジョイント (ユニット装備)            | ▲                  | ▲                    |                   |
|                  | 白陶器鉢                             | ○                  | ○                    |                   |
| バキュームセパレーター      | 着色陶器鉢                            | ▲                  | ×                    | 選択 (鉢回転タイプでは選択不可) |
|                  | ガラス鉢                             | ▲                  | ×                    | 選択 (鉢回転タイプでは選択不可) |
| フットコントローラー       | セバマチック                           | ■                  | ■                    |                   |
|                  | 横スライド S 型フットコントローラー              | ○                  | ○                    | チェアスイッチはオプション     |
| マイクロスコープ         | 930 型 フットコントローラー                 | ■                  | ■                    |                   |
|                  | ジョイスティック チェア取付                   | ■                  | ■                    |                   |
| 無影灯              | ネクストビジョン ユニットマウントタイプ             | ■                  | ■                    | 1 型・3 型のみ搭載可能     |
|                  | プレジジョン SM620 ユニットマウント型           | ■                  | ■                    | 1 型・3 型のみ搭載可能     |
|                  | L ライト (Hi)                       | ○                  | ○                    |                   |
|                  | L ライト (St)                       | ■                  | ■                    |                   |
| アメニティトレイ (ボール固定) | ルキオン 12                          | ■                  | ■                    |                   |
|                  | ルキオン 24                          | ■                  | ■                    |                   |
|                  | ルキオン CR (レジン硬化抑制モード付き)           | ■                  | ■                    |                   |
|                  | ティッシュボックス                        | ▲                  | ▲                    |                   |
| テーブル部            | 角形小物置き                           | ▲                  | ▲                    |                   |
|                  | 一体型 角形小物置き + ティッシュボックス           | ▲                  | ▲                    |                   |
|                  | テーブルトレイ (クリアのみ)                  | ▲                  | ▲                    |                   |
|                  | シリコンシート                          | ○                  | ○                    | 1 枚同梱、フライング型非対応   |
| テーブルハンガー         | 保護カバー                            | ○                  | ○                    |                   |
|                  | サブテーブル 2 型用 フライングテーブル取付タイプ       | ○                  | ×                    |                   |
|                  | ワイドテーブル (2 型用)                   | ■                  | ×                    |                   |
|                  | マウストレー                           | ▲                  | ▲                    |                   |
|                  | デンキー受台                           | ▲                  | ▲                    |                   |
|                  | オートガスバーナー GB-IIβ                 | ▲                  | ▲                    |                   |
|                  | 紙コップ対応汚物入れ                       | ○                  | ○                    |                   |
| タービン             | 横型ハンガー                           | ○                  | ○                    | フライング型では選択不可      |
|                  | 縦型ハンガー                           | ■                  | ■                    | フライング型では選択不可      |
| マイクロモーター         | 3WAY シリンジ (Dr 側)                 | ○                  | ○                    |                   |
|                  | 3WAY シリンジ (アシスタント側)              | ○                  | ○                    |                   |
| マイクロモーターハンドピース   | ルナサス1s                           | ○                  | ○                    |                   |
|                  | エアロード 01                         | ▲                  | ▲                    |                   |
|                  | 40DS α                           | ○                  | ○                    |                   |
|                  | 40is-LUX (ブラシレス 100 ~ 40,000rpm) | ■                  | ■                    |                   |
| 超音波スケーラー         | エキスパートマチック E20L + E10C           | ○                  | ○                    |                   |
|                  | YW ハンドピース SV40MLX                | ▲                  | ▲                    |                   |
|                  | YW ハンドピース SV40SI                 | ▲                  | ▲                    |                   |
|                  | YW ハンドピース SV200MLX               | ▲                  | ▲                    |                   |
|                  | YW ハンドピース SV40MLXS               | ▲                  | ▲                    |                   |
|                  | YW ハンドピース SV200MLXS              | ▲                  | ▲                    |                   |
| ピエゾ S II         | プチピエゾII 光無/光付                    | ■                  | ■                    |                   |
|                  | ニュートロン 光無/光付                     | ■                  | ■                    |                   |
|                  | ピエゾ S II 光無/光付                   | ■                  | ■                    |                   |