

## 交換式カートリッジ

専用カートリッジは医院内で交換することができます。  
預かり修理により使用出来ない期間がないため、医院の効率がアップします。



## 毎日のお手入れに

ハンドピースの力を最大限活かすには、毎日のお手入れが大切です。  
ヨシダスプレーなら1本で、ノズルを変えてタービンもマイクロモーターもご使用頂けます。



最短 **15**<sup>\*</sup>秒で  
タービン1本を  
自動注油

※タービンの場合

マイクロモーターハンドピースの場合は  
85秒(ライトモード)、145秒(ヘビー  
モード)が標準作業時間です。

## 仕様

無負荷最高回転数	380,000rpm±10%	チャック方式	プッシュチャック
ヘッドサイズ	φ10.9×H13.3	アングル角度	14°
注水	3方注水	重量	49g
推奨使用空気圧力	0.22MPa		

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

販売名:ルナス1  
一般的名称:歯科用ガス圧式 ハンドピース  
認証番号:219ABBZX00148000(管理 特管)

◎発売元:  株式会社 **ヨシダ**  
東京都台東区上野7-6-9  
<http://www.yoshida-dental.co.jp>

◎製造販売元:吉田精工株式会社 茨城県行方市八木崎660

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

 株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間/月~金9:00~19:00、土9:00~17:00(日曜・祝祭日を除く)



C02549/2023年11月/@40/新

禁無断転載

**YOSHIDA**

LUNASUS1 S

さらにスリムに。さらにスマートに。


# SLIM NECK MODEL

グリップの断面がトライアングル形状のスリムネックを採用。  
広い視野を確保することで切削部位を確認しながら施術できます。


視野がひろがるスリムネック構造

## クイックストップ機能


ヘッド部の弁がエアーのON/OFFにより開閉することで回転にブレーキがかかります。惰性回転を抑え、患者さんの頬粘膜や口唇に接触するリスクを軽減します。

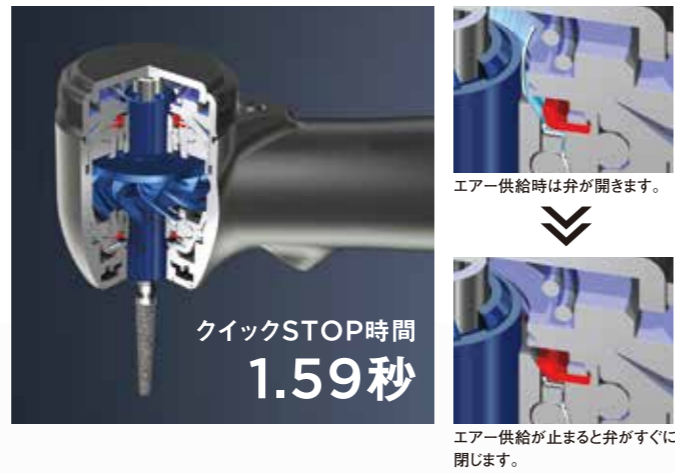

## ペングリップの指定席

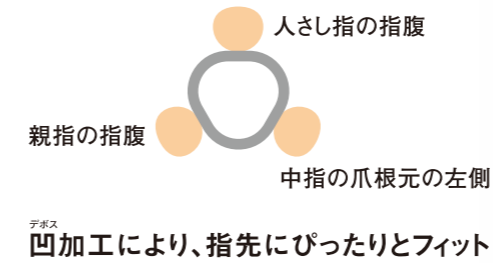


## スリムになったネック構造

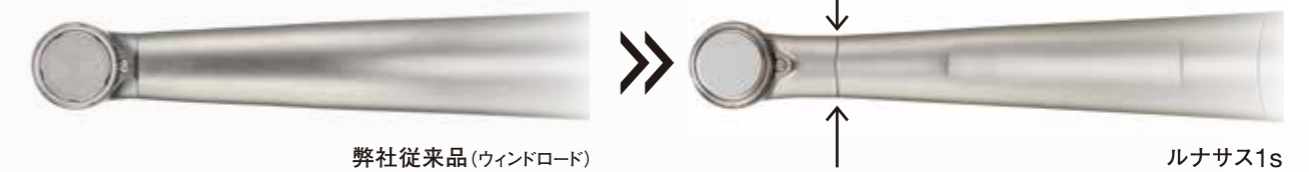

臼歯部へのアプローチ

## 浅いアングル角度

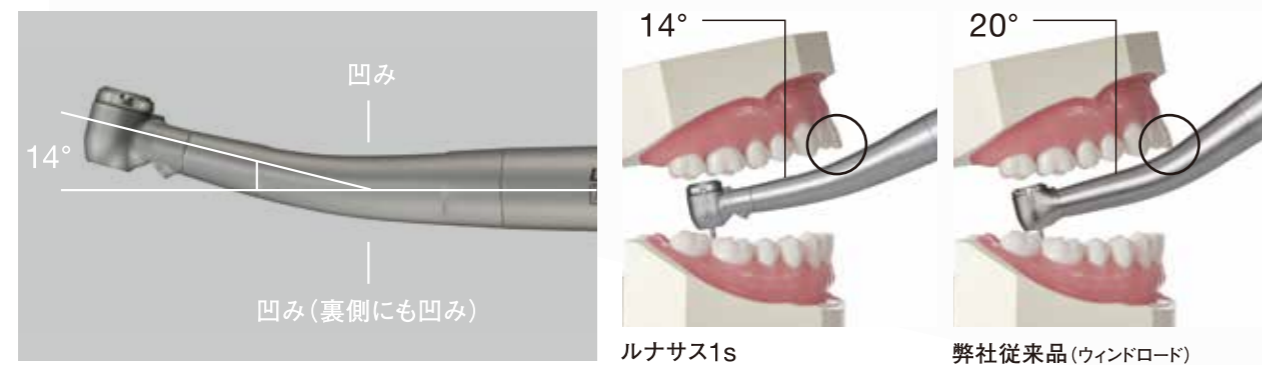

ルナサス1sはアングル角度が14°のため、開口量が少ない患者さんでも前歯部対合歯に接触することなく、臼歯部へのアプローチが容易に可能です。治療視野を確保しつつ、臼歯部の繊細な処置に最適です。

重量:49g

ネック部の太さΦ8mm

スリムネック形状と軽量化により微細なタッチが求められる処置に最適です。  
また、軽量化したことで術者の手指に負担をかけません。

LUNASUSUS1s  
YOSHIDA  
23100080Q1