





デントクラフト ユーセムは

デュアルキュア型セルフアドヒーシブセメントです。


ジルコニア、メタル、コンポジットレジン、ガラスセラミックと様々な補綴物に高い接着性を持っているので1本でいろいろな用途に使用可能です。

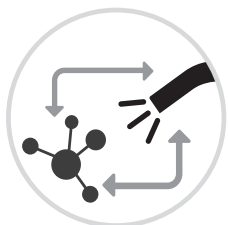

デュアルキュア/
セルフアドヒーシブ

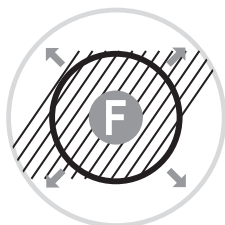

フッ素徐放性

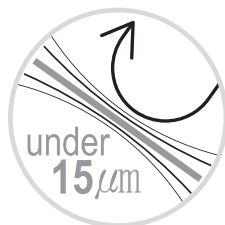

被膜厚さ 15µm以下

社内試験(試験方法はISO 4049:2009の方法に準ずる)




マルチユース

余剰セメントの除去について

- ・光重合の場合、1～5秒の照射後、除去可能です。
- ・化学重合の場合、練和開始後約2分でゲル状になり除去可能です。

※使用する重合用光照射器の性能や口腔内外・環境の温度によって硬化時間やゲル状態になる時間は異なります。

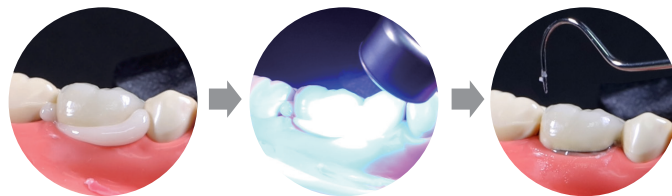

ヨシダコード	商品名	内容量	標準価格(税別)
428093	デントクラフト ユーセム ユニバーサル 9g×2本	18g	14,000円
440260	デントクラフト ユーセム オペーク 9g×2本	18g	14,000円

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2024年2月現在の税別価格です。

禁無断転載

◎販売名:デントクラフト ユーセム ◎一般的名称:歯科接着用レジンセメント ◎認証番号:229ACBZX00019000(管理)

◎製造発売元: 株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 <https://www.yoshida-dental.co.jp>



ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは **0800-170-5541**

C02577/2024年1月/PRI/10/@10/新

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター ※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00 (日曜・祝祭日を除く)