

YOSHIDA

CREST VEGA

●販売名: クレストベガ ●一般的名称: 歯科用ユニット ●認証番号: 305AKBZX00043000 (管理 特管 設置)
※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

無断転載禁止


◎発売元:  株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
◎製造販売元: 株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

コンタクト
センター **0800-170-5541**
※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00 (日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937021361
C02566/2026年9月/◎120/改

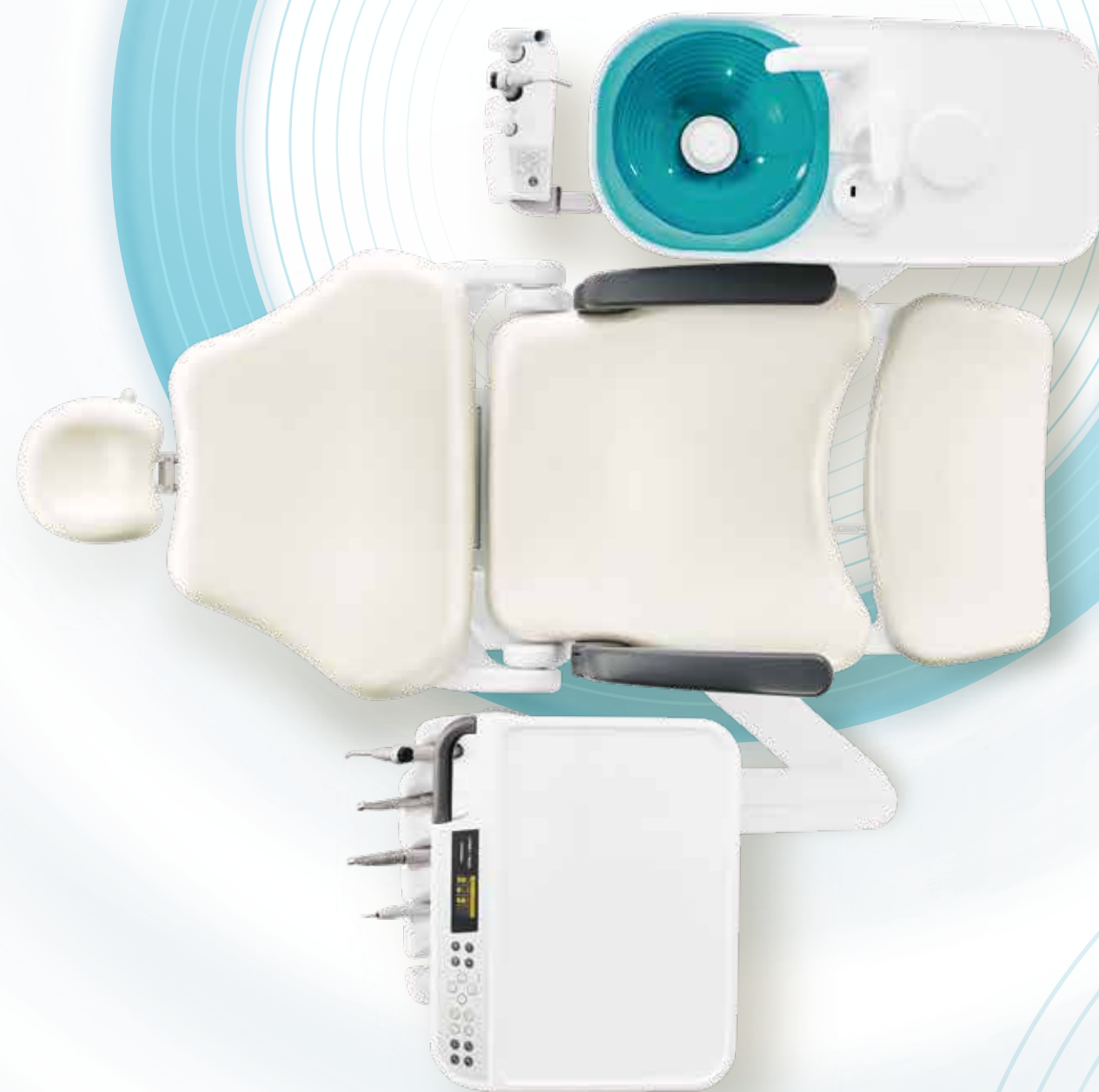

やさしさあふれるシンプルなカタチ。 その心地よさ。

クレストベガは、患者さんの目に触れる
スピットンボウルを中心にデザインしました。
波紋をイメージした3色のスピットンボウルは
簡単に付け替えができ、衛生的な診療をサポートします。
機能をミニマムに集約することで、
操作が明快で診療に集中できるように配慮しています。
水面の波模様が心地よく広がるように、
ドクターのやさしい思いが患者さんへ伝わりますように。

CREST VEGA

/ クレスト ベガ /

クレストベガの やさしさをあらわすカーブデザイン。

クレストベガは、やさしさをあらわす
カーブデザインを取り入れています。
心地よいカーブのスピットンボウルを軸に、
落下防止機能と清拭のしやすさが両立した、
ゆるやかなカーブ形状の
テーブル、ハンガー、ユーティリティスペース。
座りやすさ、立ち上がりやすさ、
診療のしやすさの機能をみたくチェアデザインは、
細部までこだわりました。



1型 前折れタイプ
ふっかふかシート：グランブルー
ふっかふかアームレスト（右）
スピットンボウル：アクアブルー



お手入れしやすいシンプルなカタチ

3色セット軽量樹脂スピットンボウル



割れにくく、洗いやすい
軽量樹脂のスピットンボウルは、
簡単に取り外して丸洗いができます。
3色セットで気軽に色変えができます。



無影灯カバー

无影灯の前面カバーは取り外し、
わずかな汚れも取り除くことができます。



ユーティリティスペース

ユニット上部に、アメニティや小物が置ける
ユーティリティスペースを設けています。
滑り止めのシリコンマットも用意しています。



オートフラッシング機能

口腔内に入るすべてのインスツルメント類とコップ給水の滞留水を自動
サイクルで排出します。簡単な操作で、水回路をクリーンに保ちます。



フラッシングアダプター（単体） OPTION

お手入れしやすいカーブデザイン

テーブルトップやインスツルメントホルダーなど、
ゆるやかなカーブ形状のデザインで、
細部までお手入れしやすい工夫をしています。



診療に集中できるシンプルなカタチ

診療動作に基づいたテーブル・ハンガー


拭き取りしやすい縁付きの広いテーブル



独立可動のインスツルメントホルダー



可動範囲が広いドクターテーブル

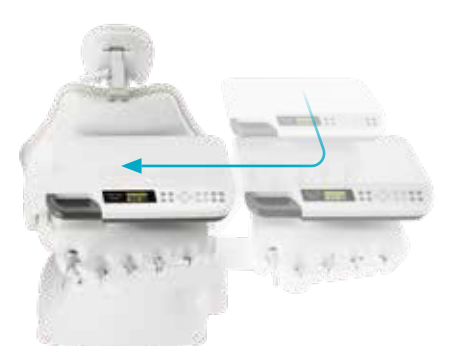


情報が素早くわかる 画面表示

ホーム画面は、インスツルメントごとの設定を
分かりやすく表示しています。

見やすい分類表示

階層ごとに見出しをつけた表示にしています。

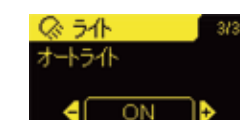

安全性

チェア動作時などに、安全装置が働いた場合の原因と対策方法をお知らせします。





前折れタイプ
標準シート：シャンパンホワイト
スピットボウル：アクアブルー
アームレスト（右）



アームレスト（右）
OPTION

心地よいシンプルなカタチ

人に寄り添うホスピタリティのあるチェア

治療に適したヘッドレスト

2軸可動式のため患者さんごとに合わせた頭部の角度調整が可能。頸椎をサポートし、開口しやすいポジションを得ることができます。



広いバックレスト


患者さんの肘がのせられるゆったり広いバックレスト。



やさしさをあらわすカーブデザイン


口腔にアクセスしやすいバックレスト

バックレストの肩周りのカーブ形状で、術者が口腔によりアクセスすることができます。

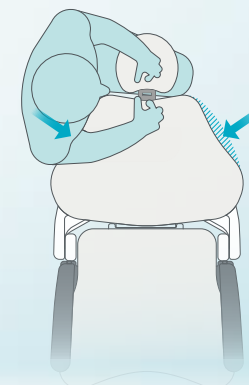


カーブ状レッグフィットシート

足が自然と閉じて快適なポジションへ誘導するレッグレスト。カーブ状の座面で、深く座ることができます。

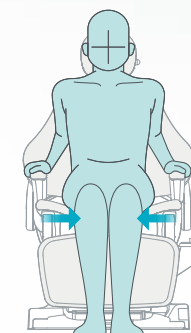

立ち上がりやすいチェア

ロングアームレストと、チェアの近くにかかとが置けるカーブ状のレッグレストで、立ち上がりやすいチェアです。

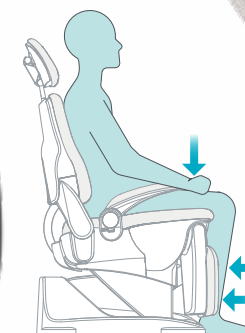



2型 カンタータイプ
標準シート：ライムグリーン
スピットンボウル：フローズンホワイト

シートカラーバリエーション

標準シートカラーバリエーション

(全6色からお選びいただけます)

縫い目がなく清掃性に優れたチェアシート。
イタリア製の人エレーザを使用したチェアシートはインテリアのアクセントになります。



ふっかふかシートカラーバリエーション

(全12色からお選びいただけます)

やわらかな座り心地に配慮したふっかふかシートをオプションでご用意しました。
デザイン性も含め、より上質な座り心地を提供し、デンタルオフィスのクオリティをさらに高めるオプションです。



チェア2タイプ、テーブル3タイプからの 組み合わせで全6タイプをご用意。

前折れ／カンターの2タイプのチェアと、1型ベースマウント／2型オーバーアーム／
3型カートの3タイプのドクターテーブルをご用意しました。
全6種類の組み合わせの中から診療スタイルに応じてセレクトできます。

チェアタイプ



前折れ



カンター

×

テーブルタイプ



1型
ベースマウント



2型
オーバーアーム



3型
カート

3型：カート 写真はオプション装備例



オプション

インスツルメント

エアタービン Airroad 01

標準



販売名：エアロード
一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
認証番号：302AKBZX00049000(管理 特管)
製造販売元：株式会社吉田製作所
東京都墨田区江東橋1-3-6

エアタービン Skyroad SDC1

OPTION



販売名：スカイロード
一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
認証番号：218AKBZX00116000(管理 特管)
製造販売元：株式会社吉田製作所
東京都墨田区江東橋1-3-6

5倍速光付きハンドピース YN200MLX

OPTION



販売名：エスマックス MC(YN200MLX)
一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
認証番号：221ALBZX00023000(管理 特管)
製造販売元：株式会社ナカニシ
栃木県鹿沼市下日向700番地

5倍速光付きハンドピース ヨシダ MaxiDrive YK25L

OPTION



販売名：ヨシダ MaxiDrive YK25L
一般的名称：ストリート・ギアードアングルハンドピース
認証番号：223AIBZX00039A01(管理 特管)
製造販売元：カボプランメカジャパン株式会社
大阪府八尾市神武町2-24

超音波スケーラー ピエゾSII (光付き／光なし)

OPTION



販売名：ピエゾS II
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器
認証番号：227AKBZX00076000(管理 特管)
製造販売元：株式会社吉田製作所
東京都墨田区江東橋1-3-6

超音波スケーラー プチピエゾ II (光付き／光なし)

OPTION



販売名：プチピエゾ
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器／
超音波歯周用スケーラー
認証番号：220ACBZX00050000(管理 特管)
製造販売元：株式会社吉田製作所
東京都墨田区江東橋1-3-6

超音波スケーラー ニュートロン (光付き／光なし)

OPTION



販売名：ニュートロン モジュールキット
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器
認証番号：224ALBZX00038000(管理 特管)
製造販売元：白水貿易株式会社
大阪府大阪市淀川区新高1-1-15

光付きマイクロモーター 40HD-LUX

標準



販売名：マイクロモータ 40H
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置
認証番号：21700BZX00045000(管理 特管)
製造販売元：株式会社吉田製作所
東京都墨田区江東橋1-3-6

LED無影灯 L4ライト (Bタイプ)

標準



販売名：L4ライト
一般的名称：汎用歯科用照明器
届出番号：13B1X00133000078(一般)
製造販売元：株式会社吉田製作所
東京都墨田区江東橋1-3-6

L4ミラー

OPTION



LED無影灯 ルキオン12

OPTION



販売名：ルキオン
一般的名称：汎用歯科用照明器
届出番号：08B2X00001000006(一般)
製造販売元：吉田精工株式会社
茨城県行方市八木路660

フットコントローラー (S型横スライド式・チェアコン無し)

標準



フットコントローラー (S型横スライド式・チェアコン有り)

OPTION



アメニティトレー

OPTION



アメニティトレー ティッシュBOX付

OPTION



※チェアコントロールはオプションです。

CREST VEGA

仕 様

項 目	装 備	標 準	オプション
チェアタイプ	カンター	●	
	前折れ	●	
テーブルタイプ	1型(ベースマウント、バランス機構なし)	●	
	2型(オーバーアーム)	●	
	3型(カート)	●	
チェア	2軸タイプ枕	●	
	アームレスト(左)	●	
	アームレスト(右)		●
	ふっかふかシート		●
テーブル	テーブルシリコンマット(ライトグレー)	●	
	オートガスバーナ		●
	表示器(有機EL)	●	
	USBポート		●
ハンガー	テーブル分離型ハンガー(ひっかけ式)	●	
	紙コップ対応汚物入れかけ	●	
フィルムビューア	パノラマ		●
ディスプレイアーム	ライトボール型		●
	テーブル型		●
スピットンボウル	樹脂製(3色セット)	●	
ユニット	重量検知式オートカラン	●	
	オートフラッシング	●	
	フラッシングアダプター(単体)		●
	水フィルター(ユニボア)	●	
	エアフィルター	●	
	水ワンタッチジョイント	●	
	エアワンタッチジョイント		●
	ユニットシリコンマット(ライトグレー)	●	
	バキュームセパレータ		●
	アメニティトレイ		●
無影灯	アメニティートレーティッシュBOX付		●
	L4ライト [®] (Bタイプ)	●	
	L4ミラー		●
	ルキオン [®] 12		●



項 目	装 備	標 準	オプション
AEH	滅菌対応手元コック付バキュームグリップ	●	
	滅菌対応手元コック付排唾グリップ		●
フット コントローラー	フットコントローラー (S型横スライド式・チェアコン無し)	●	
	フットコントローラー (S型横スライド式・チェアコン有り)		●
	フットコントローラー(踏み込み式)		●
タービン	エアーロード [®]	●	
	スカイロード [®] SDC1		●
	2タービン仕様		●
マイクロモーター	マイクロモータ 40H [®] D-LUX	●	
	マイクロモータ3L [®] (ブラシレス)		●
	2モーター仕様		●
マイクロモーター ハンドピース	YWハンドピース [®] SV 40MI		●
	YWハンドピース [®] SV 40SI		●
	YWハンドピース [®] SV40MLX		●
	YWハンドピース [®] SV 200MLX		●
	CUREALLハンドピース [®] 40S	●	
	CUREALLハンドピース [®] 40L	●	
	YWハンドピース [®] SV40MLXS		●
	YN200MLX		●
シリンジ	905シリンジY [®] (テーブル側)	●	
	905シリンジY [®] (AEH側)		●
超音波スケーラー	ピエゾSⅡ [®]		●
	プチピエゾ [®] Ⅱ		●
	ニュートロン [®]		●

※印の標準装備品、オプション品は各製品の「添付文書」または「取扱説明書」をご覧ください。



◎販売名:クレストベガ ◎認証番号:305AKBZX00043000 ◎一般的名称:歯科用ユニット(管理 特管 設置)
◎電源:AC100V 50/60Hz 1500VA ◎使用空気圧:0.56~0.60MPa ◎使用水圧:0.2~0.5MPa
◎電撃に対する保護の形式:クラスⅠ機器 ◎電撃に対する保護の程度:B形装着部 ◎質量:190kg~210kg
※本カタログに掲載の商品写真はオプション装備仕様です。 ※モニター画面は、はめ込み合成です。
※本カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により、予告なく変更する場合がございます。また色調は実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。

寸法図

1 型・前折れ

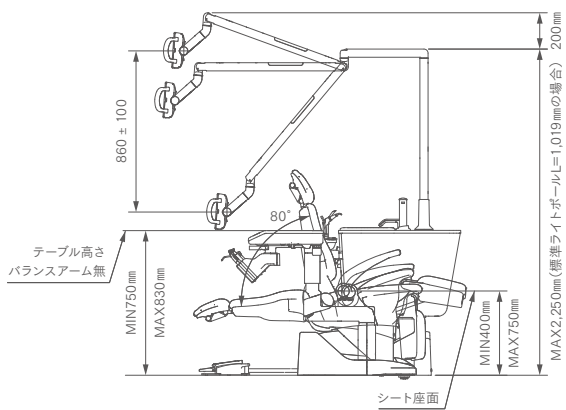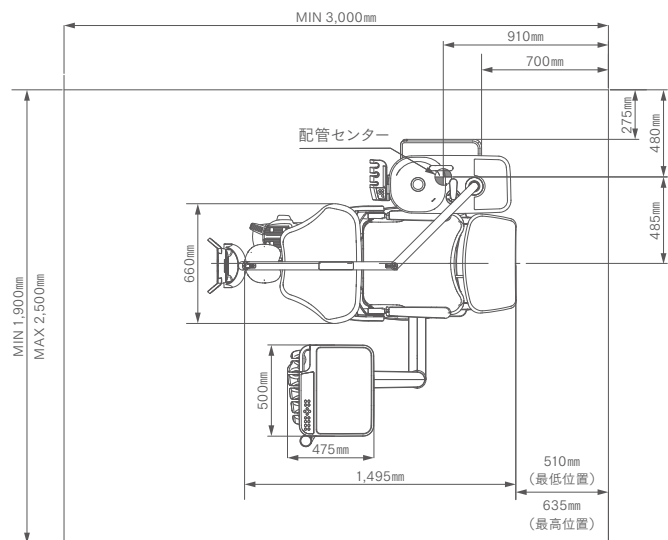

2型・カンター

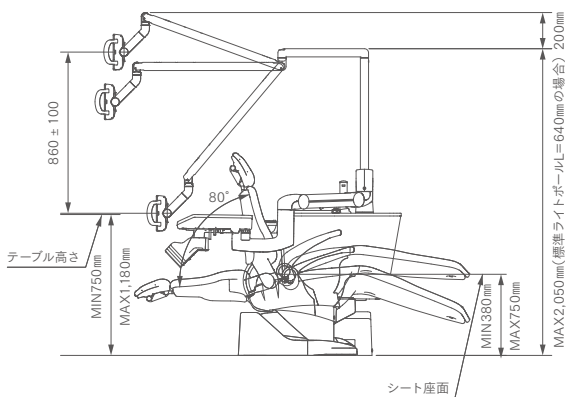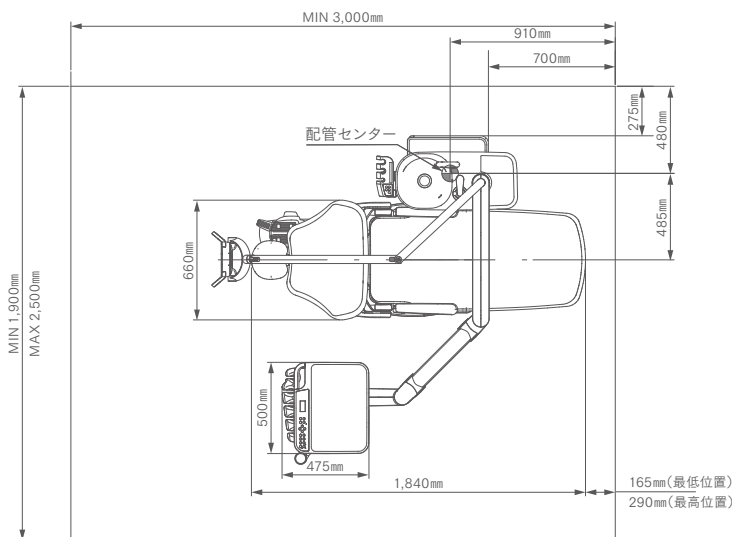

3型・前折れ

