

ARUM 関連製品

■ ARUM チタンディスク



生体親和性と耐食性に優れた
グレード4の純チタンディスクです。
クラウン・インレー・ブリッジ製作向けに、
10mm～25mmの豊富なディスク厚み
の中からお選びいただけます。

構成比
Ti : >99% N,C,H,Fe,O : < 1%

機械的特性
引張強度 : 689 MPa
ASTM F67 規格に基づきARUM社が実測したデータ
コエックス450のみ切削可能
※出展元: ARUM DENTISTRY Co., Ltd.

■ ミリングマシン

標準価格 : 14,400～27,900 円

あなたに合った一台がここにある
Coex ミリングマシンシリーズ

特設ページはこちら



■ ARUMジルコニアディスク

シリーズ	色調	形状					
		10 mm	14 mm	18 mm	20 mm	25 mm	30 mm
ARENA Star Pre-shade	A1/A2/A3	○	○	○	○	○	○
ARENA Star Multi	A1/A2/A3		○	○	○	○	

標準価格
[ARENA Star Pre-shade]
10 mm : 13,100 円 20 mm : 26,500 円
14 mm : 18,300 円 25 mm : 33,000 円
18 mm : 23,800 円 30 mm : 39,800 円
[ARENA Star Multi]
14 mm : 22,800 円 20 mm : 32,400 円
18 mm : 29,200 円 25 mm : 40,400 円

ヨシダ取り扱いブロック各種

■ DC HRブロック

※小臼歯CAD/CAM冠材料
(保険算定I)



[色調]
[LT] A1, A2, A3, A3.5, A4
[HT] A1, A2, A3
[サイズ]
12, 14L

標準価格
12 サイズ : 12,500 円
14L サイズ : 15,000 円

■ DC HRブロック セカンド

※小臼歯CAD/CAM冠材料
(保険算定II)



[色調]
[LT] A1, A2, A3, A3.5, A4
[サイズ]
12, 14L

標準価格
12 サイズ : 14,400 円
14L サイズ : 16,800 円

■ DC HRブロック ストロング

※大臼歯CAD/CAM冠材料
(保険算定III)



[色調]
[LT] A1, A2, A3, A3.5, A4
[HT] A2, A3, A3.5
[サイズ]
14L

標準価格
14L サイズ : 21,000 円

■ VITAブロック



VITAブロック エナミック
[色調]
[HT] OM1, 1M1, 1M2, 3M2
[LT] ※EM14のみ
OM1, 1M1, 1M2, 3M2
[サイズ]
EM10, EM14



VITAブロック マークII
[色調]
OM1, 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3,
3M1, 3M2, 3M3, 4M2, A1, A2, A3
[サイズ]
I10, I12, I14

◎販売名: ARUM ジルコニアディスク ARENA Star 一般的名称: 歯科切削加工用セラミックス 認証番号: 305ALBZX00018000 製造販売元: 株式会社ヨシダ 03-3845-2925
◎販売名: ARUM チタンディスク 一般的名称: 歯科非鋳造用チタン合金 認証番号: 304ALBZX00025000(管理) 製造販売元: 株式会社ヨシダ 03-3845-2925
◎販売名: コエックス300プロ 一般的名称: 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 届出番号: 13B1X00005000248(一般) 製造販売元: 株式会社ヨシダ 03-3845-2925
◎販売名: コエックス400 一般的名称: 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 届出番号: 13B1X00005000232(一般) 製造販売元: 株式会社ヨシダ 03-3845-2925
◎販売名: コエックス450 一般的名称: 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 届出番号: 13B1X00005000242(一般) 製造販売元: 株式会社ヨシダ 03-3845-2925
◎販売名: デントクラフト ハイブリッドレジンブロック 一般的名称: 歯科切削加工用レジン材料 認証番号: 228ACBZX00004000(管理) 製造販売元: 株式会社ヨシダ 03-3845-2925
◎販売名: デントクラフト ハイブリッドレジンブロック セカンド 一般的名称: 歯科切削加工用レジン材料 認証番号: 304ACBZX00015000(管理) 製造販売元: 株式会社ヨシダ 03-3845-2925
◎販売名: デントクラフト ハイブリッドレジンブロック ストロング 一般的名称: 歯科切削加工用レジン材料 認証番号: 303ACBZX00003000(管理) 製造販売元: 株式会社ヨシダ 03-3845-2925
◎販売名: ビタエナミック 一般的名称: 歯科切削加工用レジン材料 認証番号: 225AKBZX000099000(管理) 製造販売元: 白水貿易株式会社 06-6396-4400
◎販売名: ビタブロック 一般的名称: 歯科切削加工用セラミックス 認証番号: 222AKBZX00135000 製造販売元: 白水貿易株式会社 06-6396-4400

販売元  株式会社 **ヨシダ**

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL: 0800-170-1170(コンタクトセンター) 携帯電話からは03-6880-2155におかけください。

※仕様および外観は製品改良等のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載



C02628/2025 年 4 月 /PRI/@40/ 新

YOSHIDA

歯科切削加工用セラミックス

ARUM
ジルコニアディスク



ARENA Star Pre-shade & ARENA Star Multi-layered

ARENA Star Pre-shade

ARENA Star ST Zirconia

優れた透明性と高強度

幅広い補綴物に対応したジルコニアディスク



強度 **1,100 MPa**
透明性 **45 %**

※出展元: ARUM DENTISTRY Co., Ltd.




シェード	A1,A2,A3
厚さ (mm)	10,14,18,20,25,30
直径 (mm)	98

ARENA Star Multi-layered

ARENA Star SML Zirconia

補綴安定性と審美性を備えた

多層ジルコニアディスク

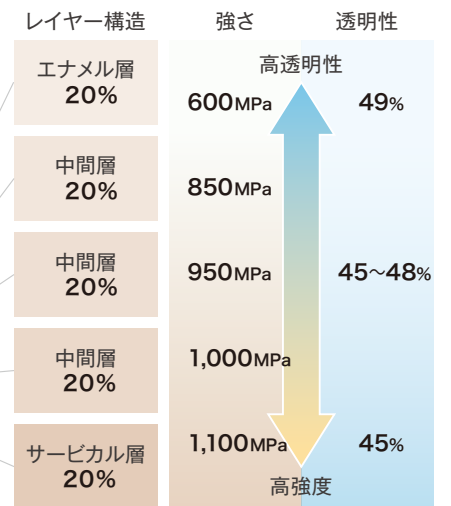

※出展元: ARUM DENTISTRY Co., Ltd.


シェード	A1,A2,A3
厚さ (mm)	14,18,20,25
直径 (mm)	98

製作手順

01 スキャン



02 デザイン

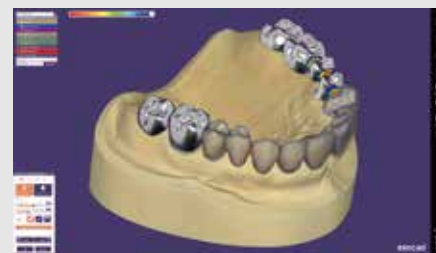


03 ミリング



04 焼成



- ARENA Star Pre-shade
 - ARENA Star Multi-layered
- ## 焼成スケジュール

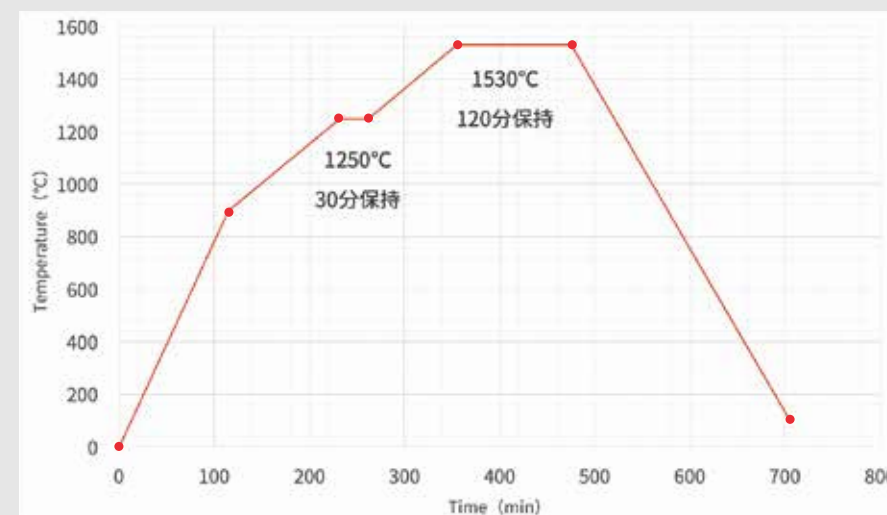

Step 1

室温~900°C: 115分 (7.8°C/分)

Step 2

900~1250°C: 117分 (3°C/分)

Step 3

1250°C保持: 30分

Step 4

1200~1530°C: 93分 (3.2°C/分)

Step 5

1530°C保持: 120分

Step 6

1530°C~100°C: 230分 (-6°C/分)

※出展元: ARUM DENTISTRY Co., Ltd.