

毎日お口に入れる器具だからこそ、
正しく洗浄し清潔に保つ習慣を
身につけることが大切です。

お手入れが不十分な場合、プラークや汚れ、細菌などが
繁殖しやすくなります。

これによって口内炎や歯周炎のみならず肺炎、
胃腸炎などの疾患を引き起こす可能性があります。

義歯、マウスピース、マウスガード等の洗浄にお使いいただけます。



ORAL APPLIANCE SMART CLEANER

いつでも、どこでも
キューエラでキレイに



Cuera

ORAL APPLIANCE
SMART CLEANER



(01)02747937021965
C02627/2024年7月/PRV/10/@20/新



4min
is enough with Cuera



製品の構成および名称



製品本体



チャージングケーブル



取扱説明書
および保証書

*本製品には充電アダプター(充電器)はございません。

超音波洗浄とUV装置を兼ね備えた スタンダードデンタルマネージャー。

超音波洗浄

Cueraはコンパクトサイズでありながら42~44kHzの超音波洗浄が可能です。お口の器具についている汚れやプラークを除去することで器具の隅々まで洗浄します。

UV装置

Cueraは270-280nm UV-C紫外線装置を搭載しています。



超音波洗浄
UV装置

いつでも、どこでもキレイに ポータブルデンタルマネージャー。

バッテリー内蔵で持ち歩き可能なコンパクトサイズ


Cueraはバッテリーで作動し、フル充電する場合最大30回使用可能です。コンパクトなサイズで自宅だけでなく外でも持ち歩きやすくいつでも、どこでも使やすく、お口の器具を清潔に保つことができます。

ユーザーフレンドリーなコードレス構造

Cueraはユーザーフレンドリーな設計です。コードレスタイプのため水の入れ替えがシンプルに行えます。また、USB (type C) 充電が可能ですので充電場所も選びません。



2,500mAh リチウムイオン電池
USB Type-C ケーブル使用

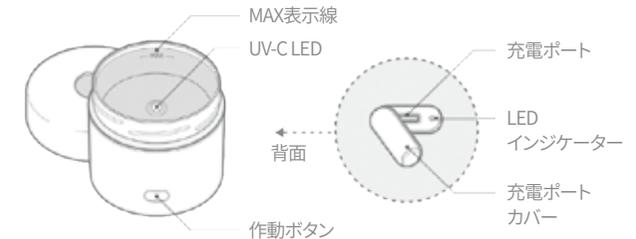

品名	Ultrasonic Cleaner	超音波周波数	42~44 kHz
品番	Cuera-Cleaner-JPN-V1	定格入力電圧	5V=2A
製品寸法	Ø 93.5mm*78.8mm	バッテリー容量	リチウムイオン 7.4V / 2,500mAh
製品重量	365g(+5g)		