

YOSHIDA

EXCEED *Tr*

エクシードが持つ

快適性をあらたに



安心と快適さを追求してきたエクシード。

その信頼を継承し、

快適性、機能性、清掃性が一体となった、
ワンランク上の安心感をエクシードTrが実現します。

大地のような安心感を

EXCEED Tr

/ エクシード テール /



プロモーション動画

エクシードTrのやさしいかたち

^{アール}Rを基調にしたやさしいフォルムは、
ドクターの思いが患者さんに
伝わるように、診療空間を柔らかく
包み込みます。




Chair

診療のしやすさと
快適性を両立




自然と口が開きやすくなる
位置付けをサポート

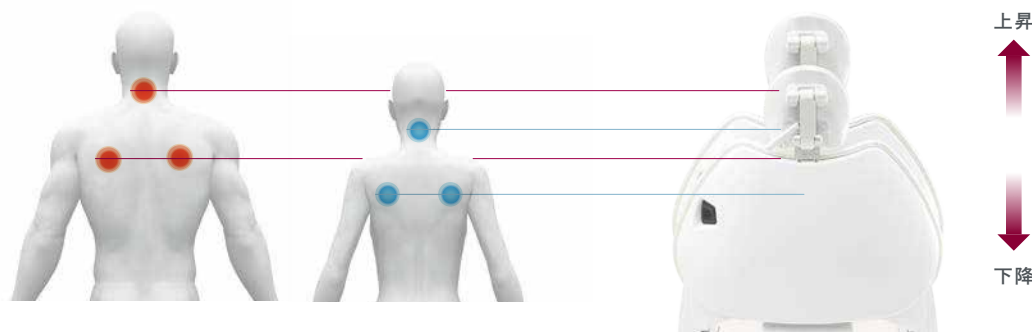

バックレスト

着座時に患者さんの肩甲骨と頸椎にバックレストの高さを合わせることで、診療時にもズレを少なくできます。

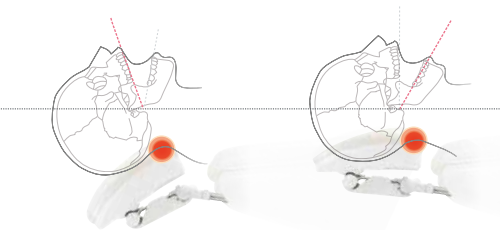

診療に適したヘッドレスト

2軸可動式のため患者さんごとに合わせた頭部の角度調整が可能。頸椎をサポートし、開口しやすいポジションを得ることができます。

角度調整



頸椎保持型
2軸ヘッドレスト

楽な姿勢が取れる

ノーズニーポジション

診療時の姿勢は、患者さんの快適さを左右するもっとも重要なポイントです。エクシードTr は、人がもっとも楽な姿勢を取れる「ノーズニーポジション」を採用。鼻と膝を結ぶ高さが水平になる位置に自然に導きます。



振動を感じさせない快適な動き

スロースタート&スローストップ

チェアの初動や停止時に振動を感じにくいスムーズな速度にコントロールしています。
※サイレントモータを使用し、動いていることを感じさせません。



人に寄り添う快適なかたち



カーブ状レッグフィットシート

脚が自然と閉じて快適なポジションへ誘導し、深く座ることができます。

立ち上がりやすいチェア

ロングアームレストと、チェアの近くにかかとを置くカーブ状のレッグレストで、立ち上がりやすいチェアです。

チェアタイプ: 前折れ

段差のない乗り降りしやすいタイプ。

スライドフットレスト



スライドフットレスト搭載で足もとをやさしく支えます。

チェアタイプ: カンター

脚のラインにフィットし寝心地がよいタイプ。



包みこまれる
やさしい座り心地

Power Headrest

OPTION

電動ヘッドレスト


電動モーターにより患者さんの体格に合わせた昇降や傾倒が可能な電動ヘッドレストを装備しています。



治療のしやすさと心地よさを兼ね備えたチェア

ヘッドレスト

電動で昇降や角度を微調整できます。

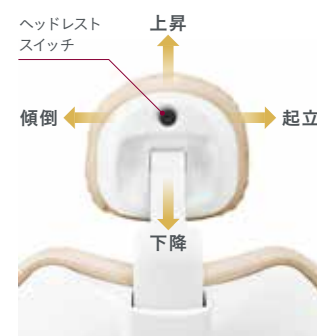

ジョイスティック

診療中のヘッドレストの微調整は、手指を使うことなくジョイスティックで行え、衛生面に配慮しています。



サイレントモーター

チェアやヘッドレストの動作時に、不快な振動や音を感じにくい、静かなモーターを採用しています。




バックレスト

患者さんの体格に応じてレバー操作ひとつで最適な高さに設定できます。



ヘッドレスト(電動)

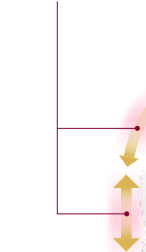

高さを変えられる
広いバックレスト

立ち上がりやすい
長いアームレスト

座り心地のよいクッション
足を閉じやすいカーブ設計

レンジの広い座面高さ

01

起立ポジションでは患者さんの体格に合わせて頭部をしっかり支えます。



02

バックレストの動きに連動し、ヘッドレストも円弧を描くように動きます。



03

診療ポジションでは、患者さんが楽に開口できる位置にヘッドレストが連動します。



01

02

03

シンクロナイズドヘッドレスト

バックレストの動作に合わせて、ヘッドレストの高さと角度が連動します。



電動ヘッドレストの動作を動画で確認いただけます。



Table

快適な操作性

テーブル・ハンガー・液晶タッチパネル



液晶タッチパネル

チェアやインスツルメントの状態をわかりやすく表示。
カラー表示&タッチパネルで、直感的な操作が可能です。

診療動作に基づいたかたち

引き寄せやすいハンドルと
使いやすい広いテーブル



取り出しやすい インスツルメントハンガー

インスツルメントハンガーは独立可動方式を採用。
また高さ違いのホルダーによりインスツルメントの手当
たりを防止できます。



置き式／掛け式に 切り替え可能なホルダー

診療スタイルに合わせて置き式／掛け式を術者がすぐに
切り替えられます。ホースは滑りのよい素材を使用し、
置き式でもインスツルメントの動きがスムーズです。



置き式 掛け式

可動範囲が広い ドクターテーブル



多機能 AEHテーブル

ユニットの操作スイッチ、小物置きスペースがついた
多機能なAEHテーブルです。可動域が広く、2ハンド
4ハンドに対応できます。



Spittoon bowl

快適にうがいができる

回転式スピットンボウル



清掃性の高いclean assist



取り外してお手入れができる各パーツ

インスツルメントホルダー、スピットンボウル、
水廻りの部品も取り外してお手入れができます。



汚れにくく拭きやすいR形状

指が入って拭けるクリアランス、隅をR形
状にすることで汚れが溜まりにくく、掃除
をしやすい工夫しました。



スピットンボウル

スピットンボウルは簡単に取り外せて丸
洗いでできます。



無影灯カバー

无影灯の前面カバーは取り外しができ、
ちいさなホコリなどを取り除くことがで
きます。

オートフラッシング機能

口腔内に入るすべてのインスツルメント類とコップ給水の滞留水を自動サイクル
で排出します。簡単な操作で、水回路をクリーンに保ちます。



フラッシングアダプターセットは、
ユニットカバー内に収納できます。

除菌水フィルターユニボア/ エアー除菌フィルター／ウルトラジョイント

最大孔径0.1ミクロンの中空糸膜ファイバーフィルターのユニボアが赤錆、
水アカを取り除き、きれいな水を作ります。(6ヶ月に1度の交換が目安です。)
エアー除菌フィルターも標準装備いたしました。
ウルトラジョイント(オプション)は、ウルトラファインバブルを発生させる
ことで、ユニットウォーターラインの洗浄性能を高めます。



除菌水フィルターユニボア



エアー除菌フィルター



ウルトラジョイント

OPTION

エアタービンアシスト機能

AirActive

OPTION

エアークティブで
チェアタイム短縮へ



エアークティブは、アシスト機能により
負荷時の回転速度低下を抑え
高トルクな切削を実現します。




エアークティブの仕組み



負荷時

エアタービンに負荷がかかると回転速度が低下、排気圧も減少します。

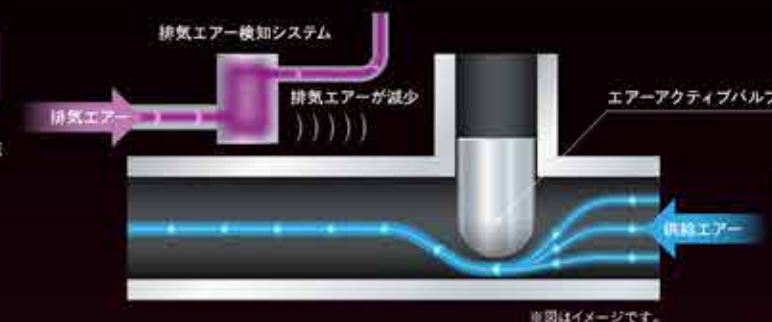


Dental Unit



アシスト時

排気エアの変化を検出し、供給エアを自動制御して切削時の回転速度の低下を抑制します。

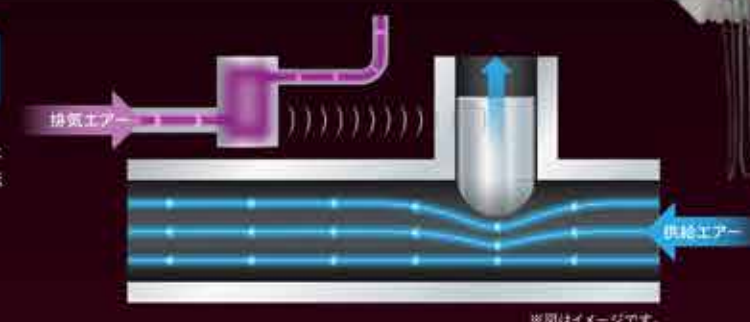


エアタービンは現在お使いの「Skyroad SDC1」と
「Airroad 01」をそのままお使いいただけます。

※対応機種以外のエアタービンハンドピースは使用しないでください。



回路別切削比較 (Airroad 01)

エアークティブの1秒間で削れる距離は通常回路の1.5倍以上となります。
また、負荷が大きくなるにつれ、より強いアシストが働きトルクの低下を抑えます。

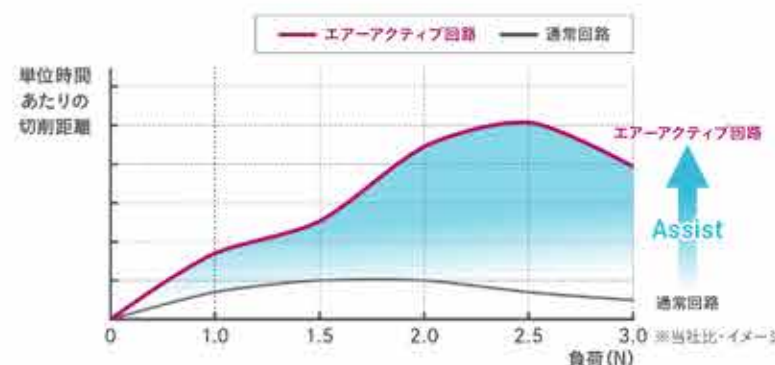


タービンピックアップ画面

アシストレベルをリアルタイムに表示します。
研修のシーンなどでも、効果的にお使いいただけます。



エアークティブ切削比較

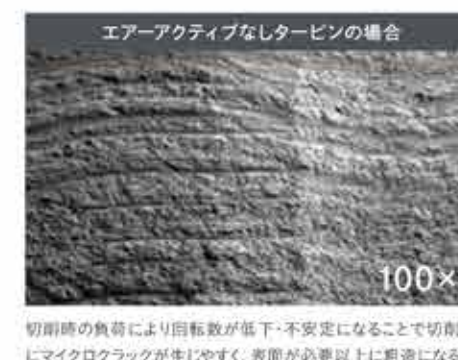

エアークティブシステムを
用いた切削イメージ動画を
ご覧いただけます。



TorqueControl

OPTION

エンド治療に適したオートリバース&オートフowardや
トルクコントロールが設定可能。

40JS-LUX (マイクロモータ40JS-LUX)

100回転から4万回転のワイドレンジ小型軽量マイクロモーター。



- ・注水 ON/OFF
- ・正回転/逆回転
- ・オプチカ ON/OFF
- ・ハンドピース ギヤ比



Endo モード切り替え

回転速度の安定性やトルク制御を強化したデジタルインターフェースを搭載。エンドモードでは設定負荷に達すると自動停止(オートストップ)、逆回転(オートリバース)、正回転(オートフoward)を行います。リバース角度は60°単位で設定可能で、回転速度やトルク値の調整も簡単。負荷を抑え、安全な根管治療をサポートします。

Standard PMTC

「Standard」「PMTC」モードも設定できます。
各モード3種類ずつメモリすることが可能です。

・エンドモード
・詳細設定

1日の始まりは、
気持ちの高まる診療空間で



トップパネルカラー：ブルゴーニュレッド
チェアシート：ブルゴーニュレッド



NV
Nextvision⁺

×

EXCEED Tr

ゆとりあるスペースで、アシストしやすい
ネクストビジョンプラスユニットマウントタイプ。



NVワンモードフットコントローラー



操作用
フットスイッチ




ネクストビジョンプラスのフォーカス/ズームができる操作用
フットスイッチをフットコントローラーに集約できます。

トップパネルカラー：ヴェールブルー
チェアシート：グランブルー

ネクストビジョンプラスで見える、わかる、ところ近づく

ネクストビジョンプラスで、より精密な治療と円滑なコミュニケーションをサポートします。

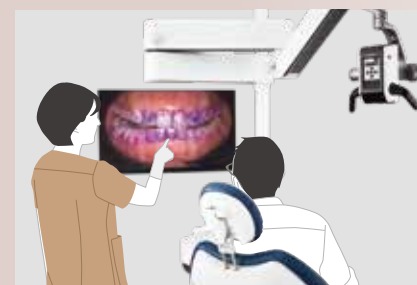

信頼される患者説明

インパクトある映像で口腔内の状態がしっかり伝わる患者説明。
信頼関係を構築できスムーズなコミュニケーションがはかれます。




高精細な治療を提供

高解像度の映像で術部を大きく鮮明に映し出すことで、
感覚に頼らない高精度な治療をサポートします。



ハイジーンワーク

特別な技術は不要で、直感的に操作できます。
口腔内診査からメンテナンスまで
すべてのハイジーンワークで歯科衛生士も使用可能です。

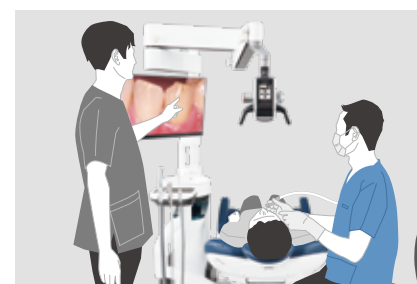

教育／スキルアップ

拡大映像で教育することで、更に手技が伝わり理解度が深まります。
スタッフのモチベーションアップ、スキルアップにも繋がります。



連携したチーム医療

モニターを通じて治療内容を共有し
連携力のあるチーム医療をサポートします。



ネクストビジョンプラスでひろがる臨床の幅

スケーリング/形成/修復/インプラント/根管治療 など

ネクストビジョンプラスは歯科医療のあらゆる臨床をサポートします。
右のQRコードを読み込みますと、ネクストビジョンプラスで撮影した臨床例をご覧いただけます。

©販売名：ネクストビジョン 一般的名称：可搬型手術用顕微鏡/手術用顕微鏡/架台式手術用顕微鏡/歯科用口腔内カメラ
届出番号：13B1X00133000079（一般特管設置）製造販売元：株式会社吉田製作所 〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6
※ネクストビジョンプラスの販売名はネクストビジョンです





ホワイト

シャンパンスノー

OPTION

ヴェールブルー

OPTION

ブルゴーニュレッド

OPTION

トップパネルカラーバリエーション
(全4色からお選びいただけます)

トップパネルは、
朝日が大地を照らす
光の輪の重なりをデザイン。

Color variation



シャンパンホワイト

標準シートカラーバリエーション
(全6色からお選びいただけます)

縫い目がなく清掃性に優れたチェアシート。
イタリア製の人工レザーを使用したチェアシートは
インテリアのアクセントになります。

オーシャン
メタリックライム
グリーンシャンパン
ホワイトボルドー
メタリックブラック
メタリックブルー
メタリック

グランブルー

ふっかふかシートカラーバリエーション
(全12色からお選びいただけます)

オプションでふっかふかシートをご用意しました。
驚くほど柔らかな座り心地で患者さんの緊張をほぐします。
デザイン性も含め、より上質な座り心地を提供し、
デンタルオフィスのクオリティをさらに高めるオプションです。



グランブルー

イタリアン
レッドバニラ
ホワイトブリティッシュ
グリーンフレンチ
ベージュ

L-2532



L-8146



L-8149

リッチ
ブラックブルゴーニュ
レッドショコラ
ブラウン

L-2543

2次元コードを読み込むと、
エクシードTrの
カラーシミュレーションを
ご覧いただけます。



Type Selection

チェア2タイプ、テーブル2タイプの
組み合わせで全4タイプをご用意。

前折れ/カンターの2タイプのチェアと、1型ベースマウント/3型カートの、
2タイプのドクターテーブルをご用意しました。

全4種類の組み合わせの中から診療スタイルに応じてセレクトできます。

チェアタイプ



前折れ



カンター

3型
カート

テーブルタイプ

1型
ベースマウント3型
カート

3型：カート
写真はオプション装備例



Option

装備関係

LED无影灯
L4ライト(Bタイプ)

標準

L4ミラー

OPTION

LED无影灯
ルキオン12

OPTION

販 売 名：L4ライト
一般的名称：汎用歯科用照明器
届 出 番 号：I3B1X00133000078(一般)
製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6

販 売 名：ルキオン
一般的名称：汎用歯科用照明器
届 出 番 号：08B2X00001000006(一般)
製造販売元：吉田精工株式会社 茨城県行方市八木蒔660

アメニティトレイ

OPTION

アメニティトレイ
ティッシュBOX付

OPTION

ジャスティV/IV Plus スタンド

OPTION



アシストハンドル

OPTION

サブライBOX

標準

サブライBOX(ロング)

OPTION



インスツルメント



エアービン **Airroad 01**
販 売 名：エアーロード
一般の名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
届 出 番 号：302AKBZX00049000(管理 特管)
製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6



エアービン **Skyroad SDC1**
販 売 名：スカイロード
一般の名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
届 出 番 号：218AKBZX00116000(管理 特管)
製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6



5倍速光付きハンドピース **YN200MLX**
販 売 名：エスマックス MC(YN200MLX)
一般の名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
認 証 番 号：221ALBZX00023000(管理 特管)
製造販売元：株式会社ナカニシ 栃木県鹿沼市下日向700番地



5倍速光付きハンドピース **MaxiDrive YK25L**
販 売 名：ヨシダ MaxiDrive YK25L
一般の名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
認 証 番 号：223AIBZX00039A01(管理 特管)
製造販売元：カボプランメカジャパン株式会社 大阪府八尾市神武町2-24



等速ハンドピース **キュアオールハンドピース40S**
販 売 名：CUREALLハンドピース
一般の名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
認 証 番 号：219ACBZX00011000(管理 特管)
製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6



等速ハンドピース **キュアオールハンドピース40L**
販 売 名：CUREALLハンドピース
一般の名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
認 証 番 号：219ACBZX00011000(管理 特管)
製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6



マイクロモーター **マイクロモータ40HD-LUX**
販 売 名：マイクロモータ 40H
一般の名称：歯科用電気回転駆動装置
届 出 番 号：21700BZX00045000(管理 特管)
製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6



マイクロモーター **マイクロモータ40JS-LUX**
販 売 名：マイクロモータ40J
一般の名称：歯科用電気回転駆動装置
認 証 番 号：306AKBZX00034000(管理 特管)
製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6



超音波スケーラー **ピエゾSII** (光付き/光なし)
販 売 名：ピエゾSII
一般の名称：歯科用多目的超音波治療器
届 出 番 号：227AKBZX00076000(管理 特管)
製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6



超音波スケーラー **ブチピエゾII** (光付き/光なし)
販 売 名：ブチピエゾ
一般の名称：歯科用多目的超音波治療器 / 超音波歯周用スケーラ
届 出 番 号：220ACBZX00050000(管理 特管)
製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6



超音波スケーラー **ニュートロン** (光付き/光なし)
販 売 名：ニュートロン モジュールキット
一般の名称：歯科用多目的超音波治療器
認 証 番 号：224ALBZX00038000(管理 特管)
製造販売元：水貿易株式会社 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15



エアスケーラー **ユリープラス**
販 売 名：ユリー
一般の名称：歯科用エアスケーラ
認 証 番 号：226AKBZX00111000(管理 特管)
製造販売元：株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

フットコントローラー

フットコントローラー
(S型横スライド式・チェアコン有り)

フットコントローラー
(踏み込み式)

NVワンモード
フットコントローラー (横スライド式)

NVワンモード
フットコントローラー (踏み込み式)

仕様

機能・性能		標準	オプション
チェアタイプ	前折れ	●	
	カンター	●	
テーブルタイプ	1型(ベースマウント)	●	
	3型(カート)	●	
チェア	アームレスト(左)	●	
	アームレスト(右)		●
	ふっかふかシート		●
	一体成型シート	●	
	バックレスト上下スライド機構(手動)	●	
	電動ヘッドレスト(ジョイスティック付)		●
テーブル	テーブルマット(シリコン)	●	
	ガスバーナー(マウステーブル併用不可)		●
	4.3インチタッチパネル	●	
	テーブル分離型DIハンガー	●	
	マウステーブル(ガスバーナー併用不可)		●
	USB(テーブル側)		●
ディスプレイアーム	ライトポール型		●
	テーブル型		●
スピットンボウル	陶器製	●	
	回転機構(手動)	●	
ユニット	オートフラッシング機能	●	
	フラッシングアダプター		●
	バキュームセバレーター(CSI)		●
	アメニティトレイ		●
	アメニティトレイティッシュBOX付		●
	アシストハンドル		●
	サブライBOX	●	
	サブライBOX(ロング)		●
無影灯	L4ライト(タイプB)	●	
	L4ミラー		●
	ルキオン		●

機能・性能		標準	オプション
デジタル マイクロスコープ	ネクストビジョンプラス ユニットマウントタイプ		●
AEH	水ワンタッチ	●	
	エアワンタッチ		●
	AEHマット(シリコン)	●	
	ジャスティIV(IV PLUS) スタンド		●
フット コントローラー	フットコントローラー (S型横スライド式・チェアコン有り)	●	
	フットコントローラー(踏み込み式)		●
	NVワンモードフットコントローラー (横スライド式)		●
	NVワンモードフットコントローラー (踏み込み式)		●
エアービン	エアーアクティブ仕様		●
	エアーロード	●	
	スカイロード		●
	2タービン仕様		●
マイクロモーター	マイクロモータ40HD-LUX	●	
	マイクロモータ40JS-LUX		●
	マイクロモータ40JS-LUX トルクコントロール		●
	2モーター仕様		●
ハンドピース	CUREALL ハンドピース 40S	●	
	CUREALL ハンドピース 40L	●	
	YWハンドピース SV 40MI		●
	YWハンドピース SV 40SI		●
	YWハンドピース SV 40MLX		●
	YN200MLX		●
シリンジ	905シリンジY	●	
超音波スケーラー	ピエゾSII (光付き / 光なし)		●
	ブチピエゾII (光付き / 光なし)		●
	ニュートロン(光付き / 光なし)		●

◎販売名:エクシード Tr ◎認証番号:306AKBZX00040000(管理 特管 設置) ◎一般の名称:歯科用ユニット
◎電源:AC100V 50/60Hz 1500VA ◎使用空気圧:0.56〜0.60MPa ◎使用水圧:0.2〜0.5MPa
◎電撃に対する保護の形式:クラスI機器 ◎電撃に対する保護の程度:B形装着部 ◎質量:210〜230kg

※本カタログに掲載の商品写真はオプション装備仕様です。
※モニター画面は、はめ込み合成です。
※本カタログに掲載の商品仕様は、改良等により、予告なく変更する場合がございます。
また色調は実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。

●発売元：株式会社 **ヨシダ**
●製造販売元：株式会社吉田製作所

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.0800-170-5541(コンタクトセンター)
〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 <https://www.yoshida-dental.co.jp>



(01)02747937022382

C02669/2026年8月/@200/改